

Sicherer Wundverschluss im Überblick

Bestellinformationen



Leukoplast® wound closure strip, steril, weiß, 1 BE mit 10 Peelbtl.				
Abmessung in mm	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
38 x 6	6 Streifen/Peelbeutel	1/16	7129200	17875665
75 x 6	3 Streifen/Peelbeutel	1/16	7129202	17875671
100 x 6	10 Streifen/Peelbeutel	1/16	7129203	17875688
100 x 12	6 Streifen/Peelbeutel	1/16	7129204	17875694

Leukoplast® wound closure strip, steril, weiß, 1 BE mit 50 Peelbtl.				
Abmessung in mm	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
38 x 6	6 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274000	17875719
75 x 3	5 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274001	17875725
75 x 6	3 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274002	17875731
100 x 6	10 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274003	17875748
100 x 12	6 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274004	17875754

Leukoplast® wound closure strip, steril, weiß, 1 BE mit 25 Peelbtl.				
Abmessung in mm	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
100 x 25	4 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274005	17875760



Leukoplast® wound closure strip, steril, beige, 1 BE mit 2 Peelbtl.				
Abmessung in mm	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
38 x 6	6 Streifen/Peelbeutel	16/16	7129214	17875702
75 x 6	3 Streifen/Peelbeutel			

Leukoplast® wound closure strip, steril, beige, 1 BE mit 50 Peelbtl.				
Abmessung in mm	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
38 x 6	6 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274006	17875777
75 x 6	3 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274007	17875808
100 x 12	6 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274008	17875814



Leukoplast® skin adhesive, steril				
Menge in ml	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
0,7	10	1/8	7254104	18240012
0,36	10	1/8	7254105	18240029

Noch nicht genug? Jetzt scannen!

Wir unterstützen Ihr Wissen rund um die Behandlung kleiner, aber auch großer Wunden. Fallbeispiele und Videos zur Wundversorgung mit den **Leukoplast® Wundnahtstreifen** finden Sie unter folgendem QR-Code:



GIB DIR
SICHERHEIT

Hacks für deinen Praxisalltag
www.leukoplast.de/praxishacks/sicherheit



Essity | BSN medical GmbH
Schützenstraße 1-3
22761 Hamburg

Tel. +49 (0)511 / 6781-110
Fax +49 (0)511 / 6781-132
www.leukoplast.de



SICHERHEIT - VOM KLEINEN KRATZER BIS ZUM GROSSEN SCHNITT

Wundverschluss mit
Hautkleber und
Wundnahtstreifen



Leukoplast® wound closure strip

Einfach wie ein Pflaster. Sicher wie eine Naht.

„Das muss genäht werden“ - für viele Patient*innen ein Stressmoment: Angst vor Nadeln, Betäubung oder vor sichtbaren Narben. Doch gerade bei kleinen Wunden und Inzisionen bieten Wundnahtstreifen von Leukoplast® eine sichere, atraumatische und nahezu schmerzfreie Alternative. Das verringert nicht nur Stress bei Ihren Patient*innen, sondern auch in der Praxis.

Indikationen

- Atraumatischer Verschluss von kleinen Wunden und Inzisionen.
- Zusätzliche Spannungs-entlastung bei Wunden, die mit intrakutanen Nähten geschlossen wurden.
- Als Ergänzung zur Hautnaht.

Vorteile auf einen Blick:



REDUZIERTES
INFEKTIONSRISIKO*




NAHEZU
SCHMERZFREI*



BESSERE KOSMETISCHE
ERGEBNISSE*



INTELLIGENTE
MATERIALSTRUKTUR

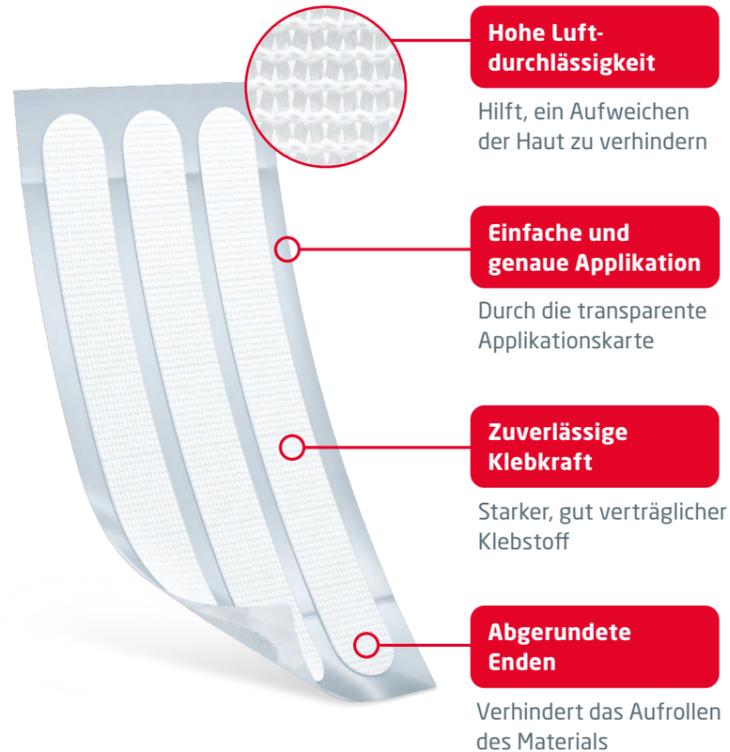

Hohe Luft- durchlässigkeit

Hilft, ein Aufweichen der Haut zu verhindern

Einfache und genaue Applikation

Durch die transparente Applikationskarte

Zuverlässige Klebkraft

Starker, gut verträglicher Klebstoff

Abgerundete Enden

Verhindert das Aufrollen des Materials

Intelligente Materialstruktur


Ermöglicht die Anpassung der Streifen an die ödembedingte Ausdehnung des Wundgewebes bei gleichzeitiger Vermeidung von Einschnürungen.



Ausgangspunkt
kurz nach der Applikation



Expansion
während der Ödemphase

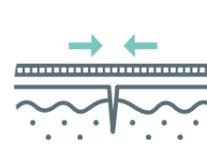

Kontraktion
im fortgeschrittenen Stadium der Heilung

Leukoplast® skin adhesive

Schnell aufzutragen. Praktisch aufzubewahren.

Kleine Wunden einfach zukleben? Ja, mit Leukoplast® skin adhesive ist die Wundversorgung tatsächlich so unkompliziert. Der hochvisköse Hautkleber ermöglicht präzises Auftragen, verschließt Wundränder und ist für kleine wie große Patient*innen geeignet.

Indikationen

- Oberflächliche Schnitt- und Platzwunden
- Saubere Risswunden
- Chirurgische Inzisionen
- Subkutan genähte Wunden als zusätzlicher Wundverschluss
- Katheterfixierung

Vorteile auf einen Blick:



HOHE
VISKOSITÄT



SCHNELLE
POLYMERISATION



FLEXIBEL BEI
BEWEGUNGEN



MINIMALE WÄRME-
ENTWICKLUNG

Lagerung
ohne Kühlung bei
Raumtemperatur
(bis zu 30 °C)
möglich.

2-in-1-Applikator



Feine Spitze
für präzisen Wundverschluss



Breiterer Bereich
für einen breiteren Schutzfilm

Handhabung wie ein Stift

Kaum Übung erforderlich

Tube und Applikator sind bereits verbunden

Kein Zurückziehen des Klebers in den Applikator nach Druckentlastung

Erhältlich in Blisterverpackung

Zur sicheren Aufbewahrung

