


JOBST® ELODUR® FORTE

LANGEREK ZWACHTEL VOOR KRACHTIGE COMPRESSIE

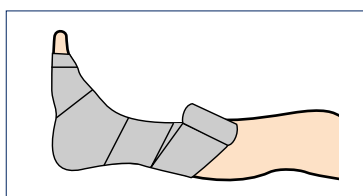


Elodur forte is een elastische (langerek) zwachtel die krachtige compressie geeft bij rust. Een correct aangelegde langerek zwachtel geeft graduele compressie waardoor de veneuze terugstroom wordt bevorderd. Elodur forte is vooral geïndiceerd wanneer de patiënt minder beweegt.

De zwachtel heeft een hoge rustdruk en dient op grond daarvan 's nachts of tijdens liggen te worden verwijderd. Gebruik Elodur forte niet in geval van ernstig arterieel vaatlijden.

DE PATIËNT

- Patiënten met spataderen, chronische veneuze insufficiëntie, diep veneuze trombose, thrombophlebitis (aderontsteking t.g.v. trombose), ulcus cruris venosum.
- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.
- Elodur forte is alleen geschikt als de enkel-armindex minimaal 0,8 is. Hoge compressiedrukken zijn gecontraïndiceerd bij arteriële aandoeningen (arteriële of voornamelijk arteriële ulcera of bestaande of vermoede arteriële aandoeningen).
- Het wordt aanbevolen om ook een teendrukmeting te doen.

ELODUR® FORTE

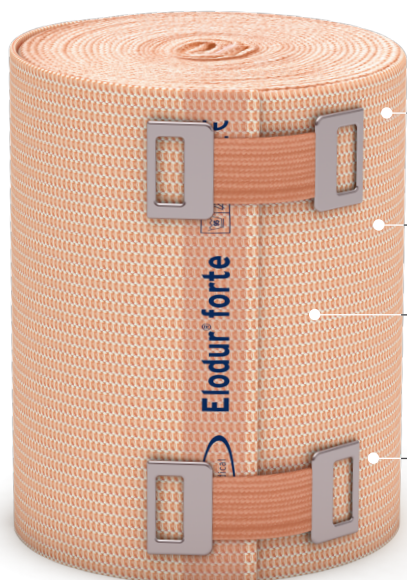

- ✓ Bestaat uit **94% katoen** en **6% elasthaan**, daardoor ademt het materiaal goed.
- ✓ Is wasbaar op 60 graden. De stof behoudt de therapeutische eigenschappen na sterilisatie in de autoclaaf.
- ✓ Niet geschikt om te strijken, bleken of drogen in de wasdroger.
- ✓ Heeft een **lengterek** van ca. 175%.

ASSORTIMENT

Omschrijving	Artikel-nummer	Z-index nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
Elodur forte 7 m x 6 cm	01765-00	12193143	5	10 x 5 (50)
Elodur forte 7 m x 8 cm	01766-00	12193151	5	10 x 5 (50)
Elodur forte 7 m x 10 cm	01767-00	12193178	5	10 x 5 (50)
Elodur forte 7 m x 12 cm	01768-00	12193186	5	10 x 5 (50)

DAAROM JOBST®

Dankzij meer dan **65 jaar** ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met veneuze en lymfatische aandoeningen behoefte aan hebben. Daarom vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor iedere unieke cliënt een passende compressie-oplossing. Met úw expertise en de producten & services van JOBST maken we samen het leven van elke cliënt lichter: **een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen als het gaat om comfort & kwaliteit.**