

**Beste absorptie
in zijn klasse***

Cutimed® Sorbion®

**Pak iedere hoeveelheid
wondexsudaat aan met
Sorbion Technology**

* Essity group - commissioned laboratory testing at SMTL: Evaluation of absorbency and fluid retention tested against 20 biggest competitors (based on EN 13726). 2024.



Exsuderende wonden brengen veel uitdagingen met zich mee

Patiënten met exsuderende wonden worden voortdurend geconfronteerd met uitdagingen. Ze hebben vaak last van huidirritatie en een verhoogd risico op infecties. Zorgen over lekkage en geur kunnen het sociale leven en het zelfvertrouwen van patiënten beperken. Zelfs eenvoudige dagelijkse routines en alledaagse activiteiten kunnen daardoor lastiger worden.

Onvoldoende werkzame wondverbanden kunnen het wondgenezingsproces vertragen en de kwaliteit van leven van de patiënt verminderen. Ze leiden vaak tot meer verbandwissels en meer tijd die wordt besteed aan wondzorg, en dus hogere zorgkosten.



**Verminderde
kwaliteit van leven**



**Vertraagde
wondgenezing**



**Hogere
zorgkosten**



Zorgt voor een juiste vochtbalans bij iedere hoeveelheid exsudaat

Maak kennis met Cutimed Sorbion met Sorbion Technology.

De superabsorberende polymeren zorgen voor een juiste vochtbalans bij elke hoeveelheid exsudaat¹, van licht tot zwaar. Hierdoor worden uitdroging² en maceratie³ voorkomen. Slimme technologieën, verwerkt tot in de kleinste details.

Hoe het werkt



Absorberen

Bevordert het genezingsproces van complexe wonden door gebruik te maken van superabsorberende polymeren die, na opname van exsudaat, veranderen in een zachte gel met een vochtige buitenlaag.



Balanceren

Zorgt voor de juiste balans: houdt de wondzijde vochtig en voert overtollig exsudaat weg van de wond.



Beschermen

Beschermt wondranden en de omliggende huid tegen maceratie.³

1 Essity group commissioned laboratory testing at SMTL,: Evaluation of absorbency and fluid retention of different superabsorbent wound dressings (based on EN 13726). 2024.

2 Cutting K. Made Easy - Cutimed Sorbion Sachet. Wounds International. 2016.

3 Cutting KF. Managing wound exudate using a super-absorbent polymer dressing: a 53-patient clinical evaluation. J Wound Care 2009;18(5):200-205.

De slimme keuze voor exsudaatmanagement

90%


van de zorgverleners
zijn tevreden met
Cutimed Sorbion.¹

Cutimed Sorbion met Sorbion Technology is toonaangevend op het gebied van absorptie.² Sorbion Technology zorgt voor effectief exsudaatmanagement, die de prestaties van andere superabsorberende verbanden overtreft.

Cutimed Sorbion heeft een tot 44% hogere absorptiecapaciteit dan concurrerende superabsorberende verbanden² en een absorptievermogen dat meer dan vier keer zo hoog is als dat van schuimverbanden van concurrenten.³ Hierdoor zijn er minder verbandwissels nodig, wat de werkdruk voor zorgprofessionals verlicht. Door minder bezoeken komen er middelen vrij en kunnen teams efficiënter werken. De wondgenezing verbetert, wat de kwaliteit van leven van patiënten verhoogt.


Ook is bij 84% van de Cutimed Sorbion gebruikers waargenomen dat maceratie van de huid rondom de wond wordt voorkomen.¹ Dankzij de vochtregulerende technologie is het product effectief bij zowel sterk als matig exsuderende wonden. Het beschermt de omliggende huid en maakt wondzorg eenvoudiger voor de zorgprofessional. Voor patiënten vermindert het ongemak en het risico op verdere huidschade, wat kan bijdragen aan therapietrouwheid.

Hoe werkt de technologie?

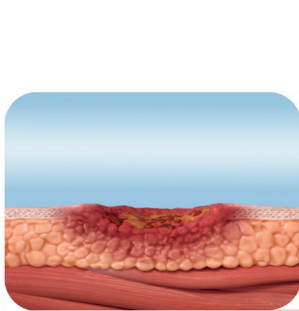


Vóór aanvang van de behandeling

Er komt exsudaat uit de wond en er is mogelijk een risico op infectie.

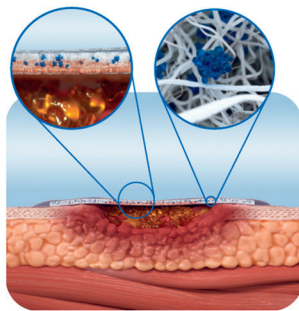


Start van de behandeling

Het exsudaat wordt verticaal opgenomen. Zodra het vocht is opgenomen, vormt de superabsorberende kern een zachte gel met een vochtige buitenlaag.

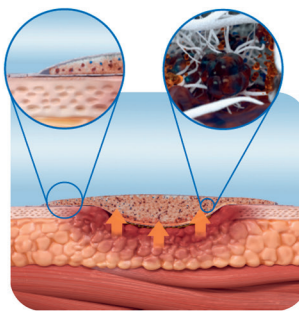

Tijdens de behandeling

De wondrand en de huid rondom de wond zijn droog en beschermd tegen maceratie. Zacht debridement bevordert het voorzichtig verwijderen van fibrineus beslag en celresten, doordat deze zich aan het verband hechten.

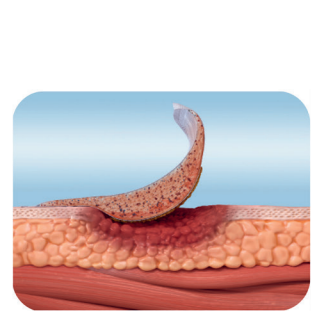

Tijdens de verbandwissel

Overtollig exsudaat, fibrine, MMP's en ontstekingsfactoren worden verwijderd.


¹ Essity Group – GIM Report P24-0631: Essity BSN Product Test Superabsorber. 2025 (Market Survey including HCPs (n=143) and patients (n=281)).

² Essity Group – commissioned laboratory testing at SMTL: Evaluation of absorbency and fluid retention tested against 20 biggest competitors (based on EN 13726). 2024.

³ Essity Group. SMTL: Wound dressing report. 2024. *Comparing the following competitor foam dressings Mepilex, Mepilex Border, Mepilex UP, Aquacel Foam Adhesive, Aquacel Foam Non Adhesive, Tegaderm, Tegaderm Non Adhesive, Allevyn Classic and Allevyn Life.

Prestaties die andere concurrenten overtreffen


Vergelijking met klassieke schuimverbanden

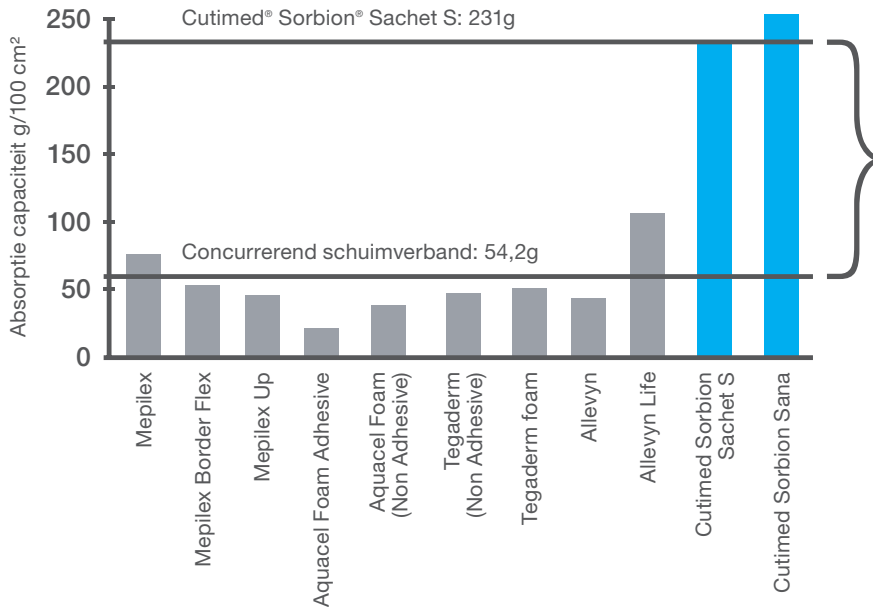

**4x meer
absorberend**
dan de gemiddelde
schuimconcurrent¹

Cutimed® Sorbion® Technology zorgt voor een effectieve exsudaatbehandeling die de prestaties van andere superabsorberende verbanden overtreft.

Free swell absorbency (EN 13726)

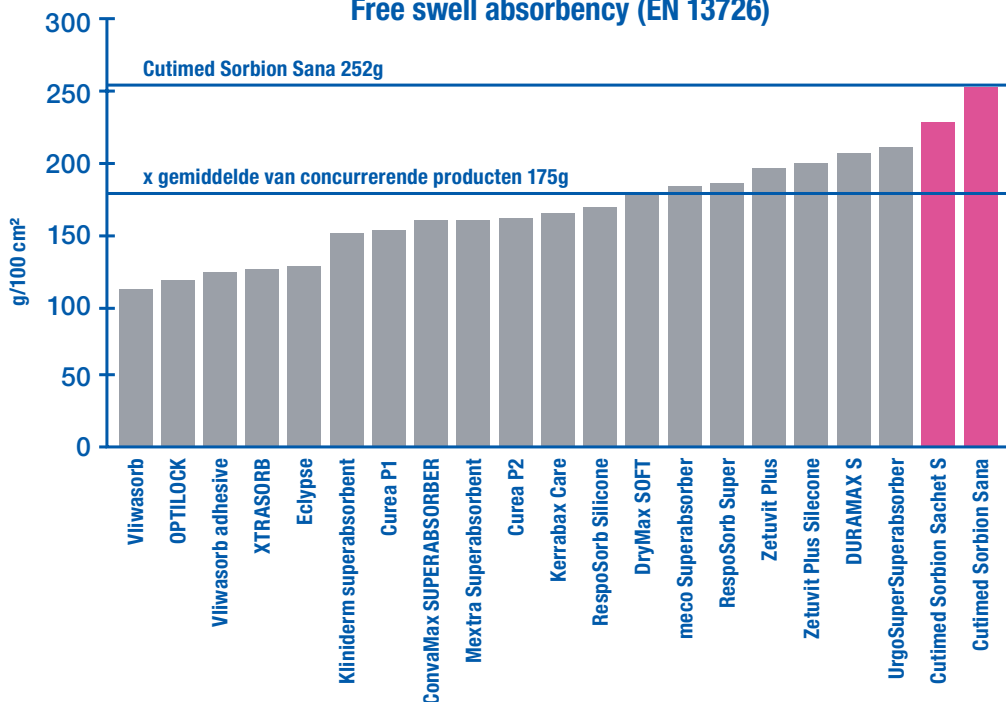

44%
hogere absorptie
capaciteit

De evaluatie is gebaseerd op EN 13726-1. Testen werden uitgevoerd door het onafhankelijke Laboratorium voor Testen van Chirurgisch Materiaal (S.M.T.L.) 2024.

1 Essity Group. SMTL: Wound dressing report. 2024.

2 Essity Group – commissioned laboratory testing at SMTL: Evaluation of absorbency and fluid retention tested against 20 biggest competitors (based on EN 13726). 2024.

Vind het juiste product voor de wonden van uw patiënt

Onze innovatieve technologie voorkomt uitdroging en maceratie van de omliggende huid en zorgt voor een optimale vochtbalans, ongeacht de hoeveelheid exsudaat.^{1,2} Bovendien biedt het een soepele, comfortabele pasvorm en is het eenvoudig aan te brengen en te verwijderen³, wat een efficiënte verzorging mogelijk maakt.

			
	Cutimed® Sorbion® Sachet S	Cutimed® Sorbion® Sana	Cutimed® Sorbion® Border
	Toonaangevend exsudaatmanagement	Atraumatisch exsudaatmanagement	Snel aan te brengen en atraumatisch te verwijderen
Exsudaatniveau	••••• ••••• Voor oppervlakkige wonden met matig tot zeer veel wondvocht	••••• ••••• Voor oppervlakkige wonden met weinig tot zeer veel wondvocht	••••• ••••• Voor oppervlakkige wonden met matig tot zeer veel wondvocht
Capaciteit voor exsudaatbeheer	Van 60ml (7.5x7.5cm) tot 2361ml (25x45cm)	Van 65ml (8.5x8.5cm) tot 862ml (22x22cm)	Van 37ml (10x10cm) tot 449ml (20x20cm)
Zorgt voor een vochtig wondmilieu	✓	✓	✓
Geen boven- of onderzijde	✓	✓	
Zacht debridement	✓	✓	✓
Geschikt onder compressie	✓	✓	✓
Zachter gevoel, flexibele kern	✓	✓	
Atraumatische verbandwissel		✓	✓
Douchebestendig			✓
Wondgeur controle	✓	✓	✓
Wondbed conditie	Fibrineus Granulerend	Fibrineus Granulerend	Fibrineus Granulerend

Wanneer diepe wonden worden opgevuld kan Cutimed Sorbion als secundair verband worden ingezet.

1 Cutting KF. Managing wound exudate using a super-absorbent polymer dressing: a 53-patient clinical evaluation. J Wound Care 2009;18(5):200-205.
 2 Wiegand C et al. SAP-containing dressings exhibit sustained antimicrobial effects over 7 days in vitro. J Wound Care. 2013;22(3):120-127.
 3 Geri C et al. Superabsorbent wound dressings for the management of highly exuding wounds: a literature review. J Wound Care. 2025;34(1):9-16.



Casus

Effectieve wondzorg

Cutimed® Sorbion® Sachet S

De patiënt

Een 78-jarige patiënt werd drie keer per week bezocht door het wijkverpleegkundig team. De patiënt had aan beide benen ulcera met veel exsudaat, en de bezoeken bestonden standaard uit het verwijderen van de aanwezige verbanden, het wassen van de benen, een herbeoordeling en het aanbrengen van nieuwe verbanden.

De behandeling

Cutimed Sorbion Sachet S en een compressiesysteem.

De uitkomst

Al binnen een week significante verbetering van de ulcera dankzij effectief exsudaatmanagement. Het aantal verpleegkundige bezoeken werd teruggebracht van drie keer per week naar slechts één keer per week, waarbij de patiënt duidelijk tevredenheid uitte over de genezingsresultaten en de verbeterde kwaliteit van leven.



DAG
0

Gediagnosticeerd met nattend variceus eczeem. Is ook verwezen naar het vaatteam en de wondexpert vanwege niet-genezende ulcera. Hoewel verschillende behandelings-opties zijn toegepast, werd er weinig vooruitgang geboekt.



WEEK
6


Dankzij het vermogen van Cutimed Sorbion Sachet S om grote hoeveelheden exsudaat te reguleren zijn de ulcera aanzienlijk verbeterd, omdat de huid niet langer aan overmatige vochtigheid wordt blootgesteld.

Veelzijdig toepasbaar

Cutimed® Sorbion® Sachet S en -Sana

De klassiekers


- ♦ Sachet S voor soft debridement
- ♦ Sana voor het voorkomen van verkleving aan het wondbed

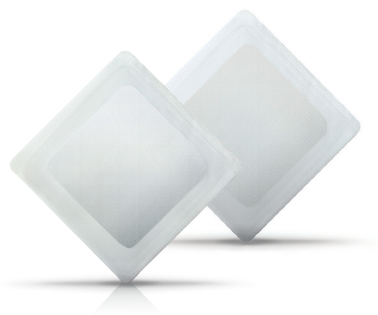

Cutimed® Sorbion® Border

De zelfklevende

- ♦ Snelle en betrouwbare fixatie
- ♦ Voorkomt lekkage van wondvocht en dient als bescherming
- ♦ Met Cutimed Sorbion Sachet als wondcontactlaag
- ♦ Geschikt voor onder de douche
- ♦ Atraumatisch te verwijderen

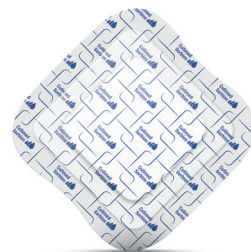

Cutimed® Sorbion® Multi Star

De Flexibele

- ♦ Vormt zich naar het lichaamsdeel
- ♦ Beschikbaar met zowel Cutimed Sorbion Sachet als Cutimed Sorbion Sana wondcontactlaag



Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage

De 2-delige

- ♦ Splitverband speciaal voor insteekopeningen van drains, PEG sonde en voor suprapubis catheter



Cutimed® Sorbion® XL

De Grote

- ♦ Voor eenvoudige toepassing op wonden op een groot oppervlak, zoals onderbenen
- ♦ Met inkeping voor bijvoorbeeld wreef
- ♦ Met Cutimed Sorbion Sachet als wondcontactlaag





Past altijd door de verschillende varianten

Behalve drie varianten met verschillende top- en wondcontactlagen biedt het Cutimed Sorbion assortiment vele afmetingen en vormen, inclusief een XL variant. Daarmee is er altijd een juiste variant beschikbaar!

Overgang hals-hoofd



Oksel



Palm



Vinger



Elleboog



Elleboogholte



Bovenlichaam



Sacrum



Onderbeen



Voet



Bovenzijde voet




Teen



Tracheostoma



PEG sonde

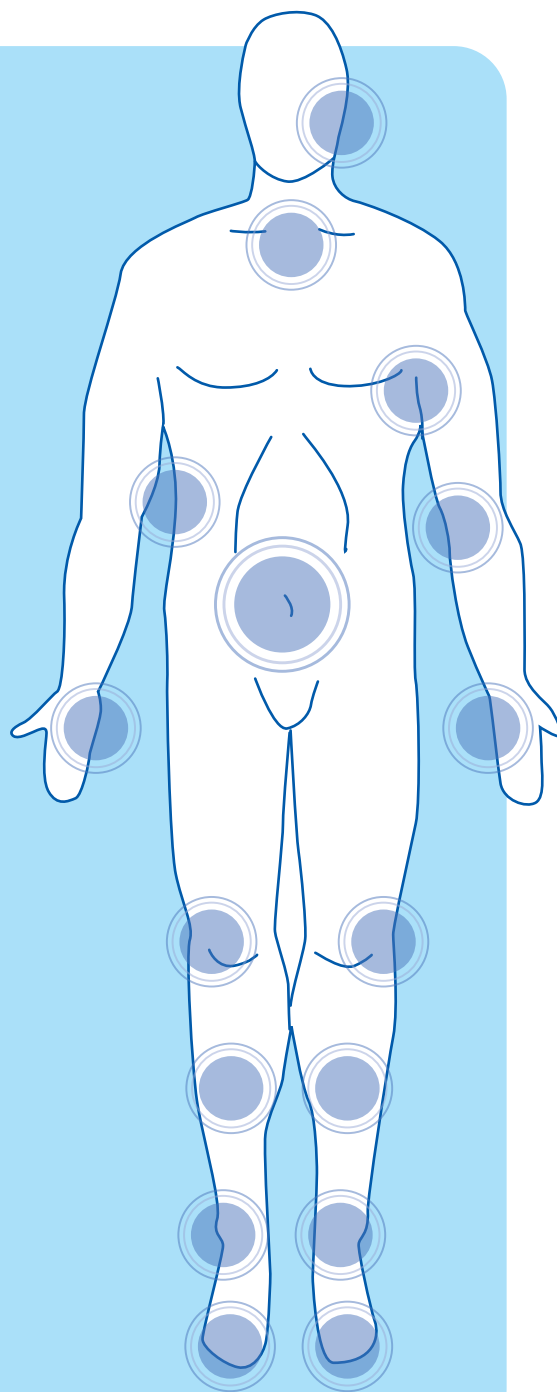

Productoverzicht

		Artikel-nummer	Afmeting	Afmeting wondkussen	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer
Cutimed® Sorbion® Sachet Superabsorberend wondverband met wondcontactlaag dat op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel verwijdt bij iedere verbandwissel (soft debridement) 	S 	73232-00	7,5 x 7,5 cm		10	62	16187962
		73232-01	7,5 x 7,5 cm		25	34	16187970
		73232-06	10 x 10 cm		10	62	16187989
		73232-07	10 x 10 cm		25	34	16187997
		73232-09	10 x 20 cm		10	34	16188020
		73232-10	10 x 20 cm		25	23	16188039
		73232-12	15 x 15 cm		10	36	16188004
		73232-13	15 x 15 cm		25	14	16188012
		73232-15	20 x 20 cm		10	22	16188047
		73232-16	20 x 20 cm		25	12	16188055
		73232-18	20 x 30 cm		10	17	16188063
	Multi Star 	73237-01	ø 8 cm		10	-	16188098
		73237-03	ø 14 cm		10	-	16188101
	XL 	73240-00	25 x 45 cm		10	-	16188071
	S Drainage 	73241-00	10 x 10 cm		10	76	16211723
Cutimed® Sorbion® Border Superabsorberend wondverband met siliconen border voor atraumatische verbandwissels 		71010-00	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10	32	17159814
		71010-02	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10	14	17159849
		71010-03	20 x 20 cm	15 x 15 cm	10	12	17159857
		71010-04	10 x 23 cm	5 x 18 cm	10	20	17159865
Cutimed® Sorbion® Sana Superabsorberend wondverband met niet verkleurende wondcontactlaag 		73233-00	8,5 x 8,5 cm		10	62	16188128
		73233-03	12 x 12 cm		10	62	16188144
		73233-06	12 x 22 cm		10	34	16188160
		73233-07	12 x 22 cm		25	10	16188179
		73233-09	22 x 22 cm		10	22	16188187
	Multi Star 	73238-01	ø 11 cm		10	62	16188195
		73238-09	ø 17 cm		10	36	16188209

Legenda

Type weefsel

-  Wond met necrose
-  Geïnfecteerde wond
-  Wond met fibrineus beslag
-  Granulerende wond
-  Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

-  Droog
-  Weinig wondvocht
-  Matig wondvocht
-  Veel wondvocht
-  Zeer veel wondvocht


Diepte wond

-  Oppervlakkig
-  Diep
-  Oppervlakkig + diep

Toepassingen

-  Kan op maat geknipt worden
-  Geschikt voor onder de douche

Cutimed Portfolio product selectiegids:

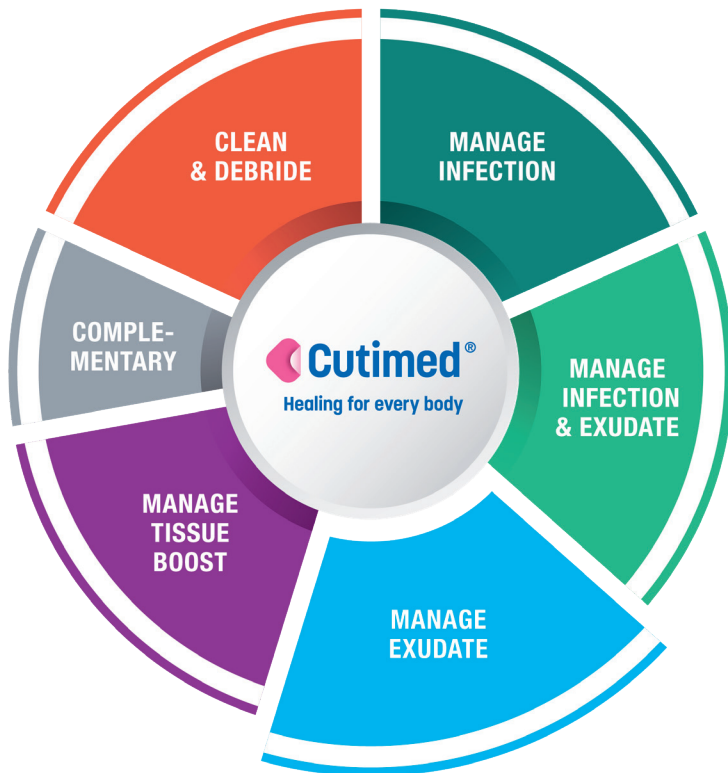

MANAGE EXUDATE


Cutimed® Siltec®

Cutimed® Sorbion®

Cutimed® Gelling Fiber

Cutimed® Hydro L/B

Cutimed® Alginate

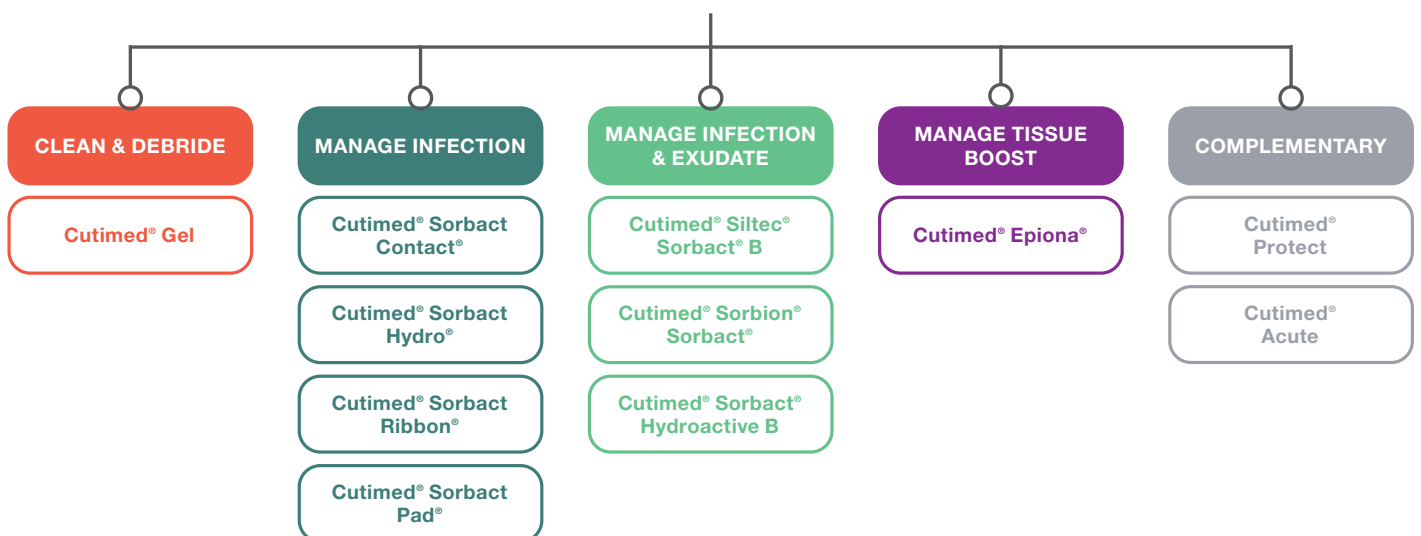



Cutimed®,
an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
wondzorg.nl@medical.essity.com
www.cutimed.nl



01326340M

09/2026