

AB 2026:
NEUE PRODUKTE
IM OST-TARIF!

NICHTS HÄLT DICH AUF


PHLEBOLOGIE- SORTIMENT

JOBST

JOBST® UltraSheer | JOBST® Opaque | JOBST® Maternity Opaque | JOBST® forMen Ambition | JOBST® forMen Explore
JOBST® Classic | JOBST® Bellavar® | JOBST® Travel | JOBST® Sport | JOBST® UlcerCare | JOBST® FarrowWrap®


www.jobst-austria.at

KUNDENSERVICE

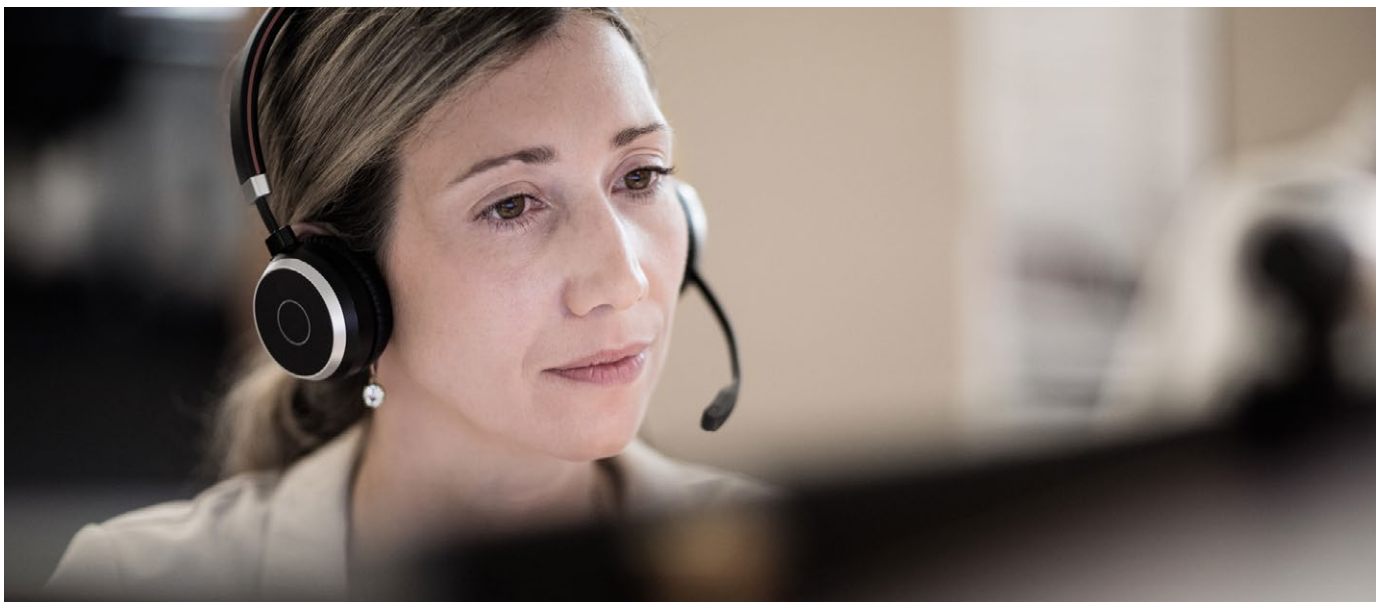

Der JOBST eShop

www.eshop.jobst-austria.at

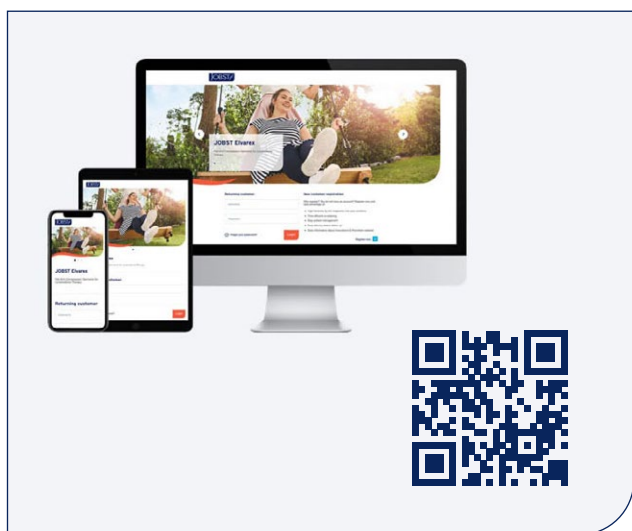

Sie wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern und Ihre Prozesse digitalisieren?

Kontaktieren Sie unser Digital-Team:

- Intelligente Patientenverwaltung
- Voll-digitale Dokumentation aller Maße
- Zeiteffiziente Folgebestellung

International

Phlebologie und Lymphologie (ISSE)

Mo - Do 8:00 - 18:00, Fr 8:00 - 17:00

Tel (DE/EN): +49 (0) 2822 607-333

- persönliche Auftragsannahme
- telefonische Sortimentsberatung
- allgemeine Informationen
- Sendungsverfolgung
- Verfügbarkeit der gewünschten Produkte
- Reklamationen

Bestellungen und Kostenvoranschläge

www.eshop.jobst-austria.at

E-Mail: ISSE@essity.com

Fax: +49 (0) 2822 607 - 208

Österreich

E-Mail: customerservice.hms.at@essity.com

Patientenservice


E-Mail: servicejobst@essity.com

Der Patientenservice von JOBST berät Sie gerne bei Fragen zu Produkten und allgemeinen Anliegen.



Kundenservice	2	SITUATIVES TRAGEN	
Wir stellen uns vor	4	JOBST® Travel	40
BERATUNG		JOBST® Sport	41
JOBST® in der Phlebologie	6	MEDIZINISCHE ADAPTIVE UND 2-IN-1 KOMPRESSIONSSYSTEME	
JOBST® Haftbandvarianten	8	JOBST® UlcerCare	42
Indikationsübersicht	10	JOBST® FarrowWrap®	44
Beratungsansätze	12	THROMBOSEPROPHYLAXE	
Bedeutung der Piktogramme	13	JOBST® Comprinet® pro	48
MEDIZINISCHE KOMPRESSION		JOBST® Comprinet® forte	49
JOBST® UltraSheer	14	KOMPRESSIONS BANDAGEN UND BANDAGENSETS	
JOBST® Opaque	18	Kompressionsbandagen	50
JOBST® Maternity Opaque	22	Kompressionssets	52
JOBST® Maternity Support Belt	25	ZUBEHÖR	
Kompression für Männer	26	Anziehhilfen und Kompressionspflege	54
JOBST® forMen Ambition	28	Serviceprodukte	58
JOBST® forMen Explore	30	Hautpflegeprodukte	60
JOBST® Classic	32	Kompression auf einen Blick	61
JOBST® Bellavar®	36	ANMESSEN IN DER PHLEBOLOGIE	
		Anleitung zum Anmessen	62

WIR STELLEN UNS VOR

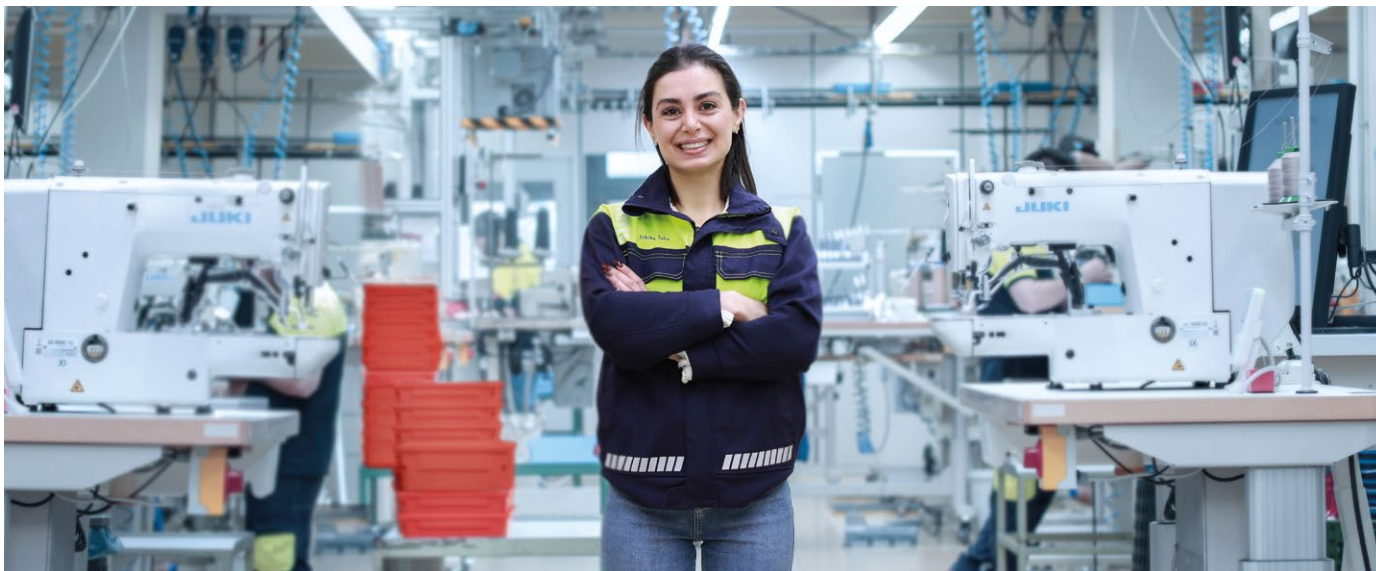

DESIGNED IN GERMANY
MADE IN GERMANY

Wir sind Essity

Zusammen sind wir **Leukoplast®**, **Cutimed®**, **Delta-Cast®**, **Actimove®**, **JOBST®**, **TENA®** und noch mehr. Unser Name setzt sich zusammen aus Essentials (Wesentliches) und Necessities (Notwendigkeiten). Wir setzen uns weltweit für Gesundheit und Wohlbefinden ein. Durch gezielte Initiativen wollen wir helfen, Grenzen und Tabus zu überwinden, die diesem Ziel entgegenstehen.

Wir handeln nachhaltig

Die vereinten Nationen haben die ‚Dekade des Handelns‘ zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele ausgerufen. Als ein weltweit führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen kommt Essity hier eine wichtige Rolle zu. Zusammen mit unseren Kund*innen und Partnerschaften arbeiten wir gemeinsam daran, dass es den Menschen und dem Planeten besser geht.

www.essity.de/nachhaltigkeit

Wir achten auf Qualität

Um höchste Standards erfüllen zu können, unterliegen unsere JOBST Produkte strengen Qualitätskontrollen. Interviews und Tests mit Patient*innen und medizinischem Personal helfen uns, behandlungsorientierte und auf Patient*innen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. JOBST folgt den strengen Qualitätskontrollen der ISO-Normen. Darüber hinaus werden unsere Produkte aus gesundheitsfreundlichen Materialien und ohne schädliche Farbstoffe hergestellt, die alle dem **STANDARD 100 by OEKO-TEX®** entsprechen.

Um die Symptome seiner venösen Insuffizienz zu lindern, gründete Conrad Jobst 1950 JOBST. Seit dem fokussieren wir uns auf die Herstellung hochwertiger, medizinischer Kompressionsversorgungen und setzen uns mit voller Kraft dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen sowie Lipödem zu verbessern.



Wir achten auf unsere Kund*innen, Konsument*innen, die Umwelt und aufeinander.

Unser Beitrag für eine aufgeklärte Gesellschaft

Wir wollen nicht, dass das Lipödem oder Venen- und Lymphkrankheiten ein Tabu bleiben. Deshalb haben wir sechs Personen mit lymphatischen und phlebologischen Erkrankungen vereint. Mit ihren inspirierenden Geschichten wollen wir, dass Patient*innen Mut und Selbstbewusstsein zurückgewinnen. Erfahren Sie im Folgenden mehr über ihre ermutigenden Erfahrungen: www.jobst-austria.at/nichtshaeltdichauf

Unsere Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben

Kompressionsstrümpfe sollen in Position bleiben ohne einzuengen. JOBST SoftFit ist unser einzigartig haftender Abschlussbund für spürbar mehr Komfort. Unsere jüngste Innovation trägt den Namen JOBST Confidence. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser nächsten Generation flachgestrickter Kompressionsversorgungen nach Maß, den Tragekomfort für Patient*innen mit einem Lymphödem und Lipödem nachhaltig verbessern.

Wir sagen Danke, denn zusammen können wir Grenzen überwinden

Wir bedanken uns bei allen, die engagiert dazu beitragen mit JOBST Produkten Grenzen und Tabus in der Kompressionstherapie zu überwinden. Dieser Dank gilt Ärzt*innen, medizinischen Expert*innen im Fachhandel, unseren Kund*innen und den Patient*innen sowie unseren Kolleg*innen in den Standorten und Werken. Dieses Engagement ermöglicht es uns, auch in Zukunft für Sie da zu sein und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden in unserer Gesellschaft zu leisten.

JOBST® IN DER PHLEBOLOGIE

Produkte für Venenerkrankungen und Venenthrombosen

7

TÄGLICHE THERAPIE

Für Patient*innen, die eine regelmäßige Kompressionstherapie benötigen, um den Symptomen einer Venenerkrankung vorzubeugen oder diese zu behandeln.

JOBST UltraSheer

Der modische und transparente Kompressionsstrumpf

>> Seite 14

NEU IM
OST-TARIF
AB 2026



JOBST Opaque

Der komfortable und kaschierende Kompressionsstrumpf

>> Seite 18

IM
OST-
TARIF



JOBST forMen Ambition

Der modische und geruchskontrollierende Kompressionsstrumpf mit Baumwolle - für Männer

>> Seite 28



JOBST forMen Explore

Der legere und strapazierfähige Kompressionsstrumpf mit Baumwolle - für Männer

>> Seite 30



JOBST Classic

Der strapazierfähige Kompressionsstrumpf für individuelle Ansprüche

>> Seite 32

NEU IM
OST-TARIF
AB 2026



JOBST Bellavar®

Der robuste Kompressionsstrumpf für maximale Therapiesicherheit

>> Seite 36

NEU IM
OST-TARIF
AB 2026





SITUATIVES TRAGEN

Für Patient*innen, die eine Kompressionstherapie benötigen, um die Vorbeugung von Symptomen einer Venenerkrankung während bestimmten Aktivitäten wie z.B. beim Sport oder auf Reisen zu unterstützen.

JOBST Travel

Die wohltuenden Kompressionsstrümpfe auf Reisen

>> Seite 40



JOBST Sport

Die sportlichen Kompressionssocken für ein frisches Gefühl beim Sport

>> Seite 41



SPEZIELLE MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

Für Patient*innen, die auf Empfehlung des Arztes eine Kompressionstherapie in einer akuten Phase oder für eine bestimmte Zeit brauchen.

JOBST Maternity Opaque

IM
OST-
TARIF

Der Kompressionsstrumpf für das Wohlbefinden von Schwangeren

>> Seite 22



JOBST UlcerCare

IM
OST-
TARIF

2in1 Kompressionssystem für die Behandlung von venösem Ulkus

>> Seite 42



JOBST FarrowWrap®

IM
OST-
TARIF

Medizinisches adaptives Kompressionssystem mit einfacher Anwendung zur Förderung des Selbstmanagements.

>> Seite 44



JOBST Comprinet® pro und forte

Die Thromboseprophylaxe-Strümpfe, um das Risiko einer tiefen Venenthrombose zu reduzieren

>> Seite 48/49



JOBST Comprilan® und Comprihaft®

Die verstellbaren Kompressionsverbände für Venen- und Lympherkkrankungen

>> Seite 50




JOBST® HAFTBANDVARIANTEN



JOBST SoftFit - der Einzigartige. Eine Revolution für Kompressionsversorgungen!

- Ein spezielles System aus Silikonfäden, das direkt in den Bund des Kompressionsstrumpfes eingewoben wird
- Hält die Kompressionsversorgung, ohne den Druck zu erhöhen oder einzuschnüren
- Zum Patent angemeldete Technologie sorgt für einen durchgehenden Kompressionsverlauf
- Erhöht gleichzeitig Wirksamkeit und Tragekomfort

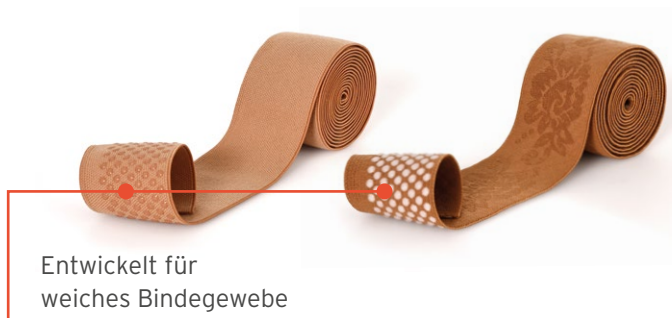

Entwickelt für weiches Bindegewebe

Noppe und Schmuck-Noppe - die Starken.

- Aus Silikon bestehende Noppen-Struktur
- Entwickelt um mögliches Rutschen zu verringern
- Hilft den korrekten Halt der Kompressionsversorgung sicherzustellen
- Für JOBST Opaque und JOBST UltraSheer auch mit dekorativem Textilband als Schmucknoppe verfügbar.



Entwickelt für normales und festes Bindegewebe

French-Bijou und Zick Zack - die Modischen.

- Flache Silikon-Streifen bilden eine große Auflagefläche.
- Hilft mit effizientem Halt die Kompressionsversorgung sicher an Ort und Stelle zu halten.
- Elegant und Effektiv: French-Bijou und Zick Zack mit modischem Textilband.


Sensitive - das Weiche.

- Sanftes Silikongarn wird im einzigartigen Fertigungsprozess in das Textilband eingenäht.
- Das Silikon verteilt sich gleichmäßig über das gesamte Band und erzeugt so einen sanften Halt auf der Haut.
- Mit der geringeren Silikonoberfläche kann das Textilband Feuchtigkeit schneller aufnehmen und nach außen abgeben.




Entwickelt mit einem Ziel: Höherer Tragekomfort für weiches Bindegewebe


Haftbandvarianten

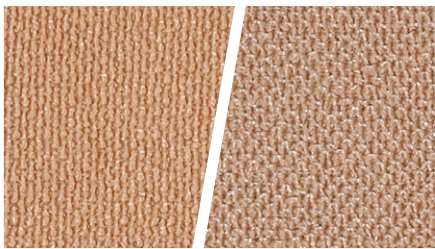


SOFTFIT

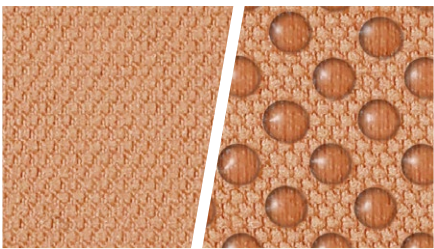

NOPPE

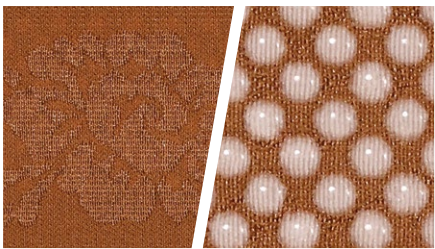


SCHMUCK-NOPPE

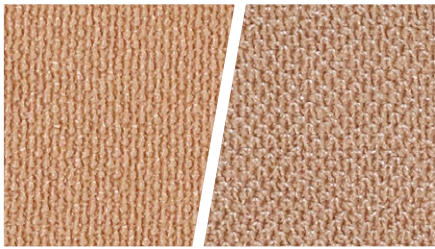

SENSITIVE



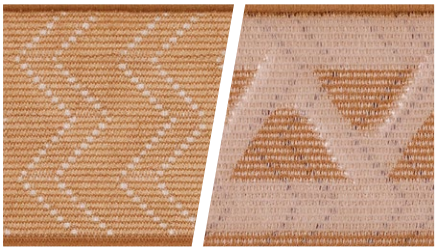


FRENCH-BIJOU



ZICK ZACK

Beliebte Längentypen

Längentyp	Haftband	JOBST Opaque	JOBST Maternity Opaque	JOBST UltraSheer	JOBST Classic	JOBST Bellavar
 <p>AD</p>	SoftFit	Standard & Maß	Standard & Maß	Standard & Maß	Standard & Maß	
	Noppe	Standard & Maß			Standard & Maß	Maß
 <p>AF</p>	Noppe	Maß			Maß	Standard & Maß
	SchmuckNoppe			Maß		
	Sensitiv	Maß		Maß	Maß	
	French-Bijou	Maß		Maß	Maß	Maß
 <p>AG</p>	Noppe	Standard & Maß	Maß		Standard & Maß	Standard & Maß
	SchmuckNoppe			Standard & Maß		
	Sensitiv	Standard & Maß		Standard & Maß	Standard & Maß	
	French-Bijou	Standard & Maß		Standard & Maß	Maß	Maß
	Zick Zack			Standard & Maß		

INDIKATIONSÜBERSICHT

Chronische Venenerkrankungen und Venenthrombosen

Die wichtigsten Eigenschaften der JOBST Kompression sind Grundlage unserer Produktempfehlungen für die unterschiedlichen Schweregrade einer chronischen Venenerkrankung und Venenthrombosen.

INDIKATION / DIAGNOSE CHRONISCHE VENENERKRANKUNGEN		
Klasse und klinische Zeichen entsprechend der CEAP-Klassifikation** (Leitlinie*** Diagnostik und Therapie der Varikose)		
C0		Keine sichtbaren oder tastbaren Zeichen einer Venenerkrankung (bei Veranlagung zum Venenleiden kann präventiv gehandelt werden)
C1		Besenreiser (Netzförmig aussehende Venen - oft an der Rückseite des Oberschenkels zu finden) Teleangiectasien (klar sichtbare, irreversibel erweiterte Kapillargefäße) Retikuläre Varizen (Netzartige, breite Venengeflechte - oft an der Außenseite des Beins)
C2		Varikose (Krampfadern)
C3		Venöses Ödem
C4		Hautveränderungen aufgrund schlechter Durchblutung (Verfärbung grau bis bläulich-violett). C4a: Pigmentierung, Stauungsekzeme - meist starkes Jucken der trockenen Haut C4b: Atrophie blanche (weiße Narbenansammlungen), Dermatoliposklerose (Verhärtung des Unterfettgewebes) C4c: Corona phlebectatica (dunkelblaue Hautvenen am Fußrand)
C5		Abgeheiltes Ulcus cruris venosum (Geschwür)
C6		Florides Ulcus cruris venosum



Therapielösungen zur Versorgung chronischer Wunden finden Sie unter der Marke Cutimed®

VENENTHROMBOSEN
Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient*innen
Oberflächliche Venenthrombose
Tiefe Beinvenenthrombose (im späteren Therapieverlauf)
Postthrombotisches Syndrom

*Die erforderliche Kompressionsklasse für die Versorgung einzelner Patient*innen legt in jedem Falle der*die verordnende Ärzt*in fest. Die Aufstellung der einzelnen Diagnosen und zugeordneter Kompressionsversorgungen hat Empfehlungscharakter und ist daher nicht bindend. Die Auswahl der Kompressionsklasse ist abhängig von Alter und Mobilität des*der Patient*in, Umfängen der betroffenen Extremität, eventuellen Begleiterkrankungen und individueller Druckempfindlichkeit des*der Patient*in.

JOBST UltraSheer	JOBST Opaque	JOBST Maternity Opaque	JOBST forMen Ambition	JOBST forMen Explore	JOBST Classic	JOBST Bellavar	JOBST UlcerCare
VERFÜGBARE KOMPRESSIONSKLASSE JE KOMPRESSIONSVERSORGUNG *							
KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 2	KKL 2	KKL 3 40 mmHg
KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 3	KKL 3	

	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•	•
	•	•	•	•	•			
		•	•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	•	
						•	•	

Die CEAP-Klassifikation ist der weltweit anerkannte Standard zur Einteilung der chronisch venösen Insuffizienz. Die Abkürzung CEAP stammt aus dem Englischen und steht für: C = Klinischer Befund (Erscheinungsbild), E = Ätiologie (Ursprung der Krankheit), A = Anatomische Ausdehnung (Lokalisation), P = Pathophysiologie (Ursache). *S2k - Leitlinie Diagnostik und Therapie der Varikose, AWMF-Register Nr. 037/018

BERATUNGSANSÄTZE



PATIENT*INNEN-BEDÜRFNIS	BERATUNGSANSATZ
<p style="text-align: center;">FREIZEIT, BEWEGUNG, SPORT & LIFESTYLE leichte bis schwere chronische Venenerkrankung</p>	
<p>„Ich bewege mich viel, bin oft unterwegs und habe Spaß an körperlichen Aktivitäten.“</p>	<p>Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf mit JOBST SoftFit als Haftband. JOBST SoftFit sorgt dafür, dass der Kompressionsstrumpf bei Bewegung in Position bleibt, ohne einzuengen (Seite 8).</p> <p>Wählbar bei Kniestrümpfen der Qualität: JOBST Opaque, JOBST Maternity Opaque, JOBST UltraSheer und JOBST Classic.</p>
<p>„Wenn ich Kompression trage, schwitze ich häufig. Wie kann ich dies reduzieren?“</p>	<p>Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf mit einem System für das Feuchtigkeitsmanagement. Dieses sorgt dank doppellagiger Konstruktion dafür, dass die Feuchtigkeit der Haut aufgenommen und nach außen abgegeben wird. Verfügbar bei: JOBST Opaque, JOBST Maternity Opaque und JOBST forMen Ambition.</p> <p>Wählen Sie eine JOBST forMen Versorgung. Diese verbinden einen hohen Baumwollanteil mit einer aktiven Geruchskontrolle für ein hervorragendes Tragegefühl (Seite 26 - 31).</p>
<p>„Ich treibe viel Sport, wie kann ich dies mit Kompression kombinieren?“</p>	<p>Empfehlen Sie JOBST Sport. Dieser Kompressionsstrumpf ist speziell für Kund*innen entwickelt, die sich für ihre sportlichen Aktivitäten einen Kompressionsstrumpf wünschen, der besonders weich, leicht und atmungsaktiv ist (Seite 41).</p>
<p style="text-align: center;">TÄGLICHES SITZEN & STEHEN leichte bis schwere chronische Venenerkrankung</p>	
<p>„Ich bin ein aktiver Mensch und bei mir soll die Kompression optimal in jeder Lebenslage sitzen.“</p>	<p>Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf, der für das tägliche Tragen in einem aktiven Leben (sitzende Positionen, stehende Tätigkeiten, gehende Aktivitäten) entwickelt wurde.</p> <p>Beispielsweise die hochwertigen Kompressionsversorgungen JOBST Opaque, JOBST UltraSheer und JOBST forMen.</p>
<p style="text-align: center;">UNTERSTÜTZUNG & PFLEGE</p>	
<p>„Ich habe Arthrose, wie kann ich Kompression anziehen?“</p>	<p>Empfehlen Sie die JOBST Griphandschuhe als Unterstützung für das tägliche Anziehen von Kompressionsversorgungen (Seite 54).</p>
<p>„Ich spüre, dass meine Haut oft trocken ist.“</p>	<p>Empfehlen Sie Cutimed ACUTE Hautpflegeschaum mit Urea, um den natürlichen Schutzmantel der Haut auch beim täglichen Tragen von Kompression zu erhalten (Seite 60).</p>

BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME



Blickdicht

Kaschiert kleine Unregelmäßigkeiten



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System für optimalen Tragekomfort



Soft Touch

Mischung aus geschmeidigen Garnen



Transparent

Stilvoll und transparent für schöne Beine



Atmungsaktiv

Die hohe Luftdurchlässigkeit sorgt für einen raschen Feuchtigkeitstransport



Glänzend

Durchscheinendes, seidiges Gestrick für einen eleganten Look



Ventilationsbereich

Luftdurchlässige Fußsohle



Flex Zone

Die elastische Maternity Softflex-Zone bei der Umstandshose passt sich dem wachsenden Bauch an



Effektive Geruchskontrolle

Das Material verhindert aktiv eine Geruchsbildung für ein besseres Frischegefühl



Haltbarkeit

Die Belastbarkeit des Materials sorgt für einen haltbaren und strapazierfähigen Kompressionsstrumpf



Anpassbar

Durch das stufenlose Verschlusssystem kann der Support Belt kontinuierlich und individuell an den Schwangerschaftsfortschritt angepasst werden



Diskretes Design

Der getragene Gurt fällt durch das diskrete Design unter der Kleidung kaum auf



Anatomische Passform

Die Form des Support Belts wurde gemeinsam mit Schwangeren entwickelt, um eine optimale, anatomische Passform zu gewährleisten



Baumwolle

Das Garn hat einen hohen Baumwollanteil für ein natürliches Tragegefühl



Einfaches Anziehen

Flexibles, anpassungsfähiges Gewebe für ein leichtes Anziehen



2in1-Therapiesystem

Für eine einfache Handhabung und hohe Compliance der Patient*innen



Starker Halt

Gradueller Druckverlauf zur Unterstützung der Blutzirkulation und Reduktion von Schwellungen



Helfen Schwellungen zu minimieren

Unterstützen spürbar die Blutzirkulation in den Beinen und erleichtern den Blutrückfluss zum Herzen



Reisen

Speziell entwickelt, um den Auswirkungen von Inaktivität während einer Reise entgegenzuwirken



Anatomisch gepolstert

Anatomisch gepolsterter Fuß- und Fersenbereich, sowie extraflache Zehennaht für hohen Komfort bei Aktivitäten



Einfache Größenerkennung

Die farbige Größenkennzeichnung vereinfacht die Größenwahl



Wiederaufbereitbar

Unter Berücksichtigung der speziellen Waschempfehlung bis zu 10-mal ohne Beeinträchtigung des Druckprofils waschbar



Entstauung

Ödemreduktion und ggf. Wundmanagement



Erhaltung

Ödem- und ggf. Wundmanagement



Prävention

Übergang zur langfristigen Therapie mit Kompressionsstrümpfen



Unisex

Universell einsetzbare Strumpfversorgung



JOBST® UltraSheer

NEU AB 2026:
AUCH STANDARD-
SORTIMENT
IM OST-TARIF

Der modische Kompressionsstrumpf

JOBST UltraSheer Kompressionsstrümpfe verbinden die graduelle Kompressionstherapie mit viel Stil und Eleganz. Ihr feines, atmungsaktives, satiniertes Garn überzeugt mit einer unvergleichlichen Transparenz. Hinzu kommt, dass der modische Glanz einen eleganten Eindruck hinterlässt, während müden und schweren Beinen entgegengewirkt wird.



TRANSPARENT



ATMUNGSAKTIV



GLÄNZEND


Indikation: Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4	C5
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV

Die Versorgung in der Übersicht

		Standard				Maß				
▼ Ausführungen		AD	AG	AT	AT/UM	AD	AF	AG	AT	AT/UM
KKL 1: 18 - 21 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit	●				●				
	Schmuck-Noppe		●				●	●		
	Sensitive		●				●	●		
	French-Bijou		●				●	●		
	Volant	●				●	●	●		
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Materialzusammensetzung		KKL 1: 58 % Polyamid, 42 % Elasthan KKL 2: 53 % Polyamid, 47 % Elasthan								
Wäsche		Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.								
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Griphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum								

Farben

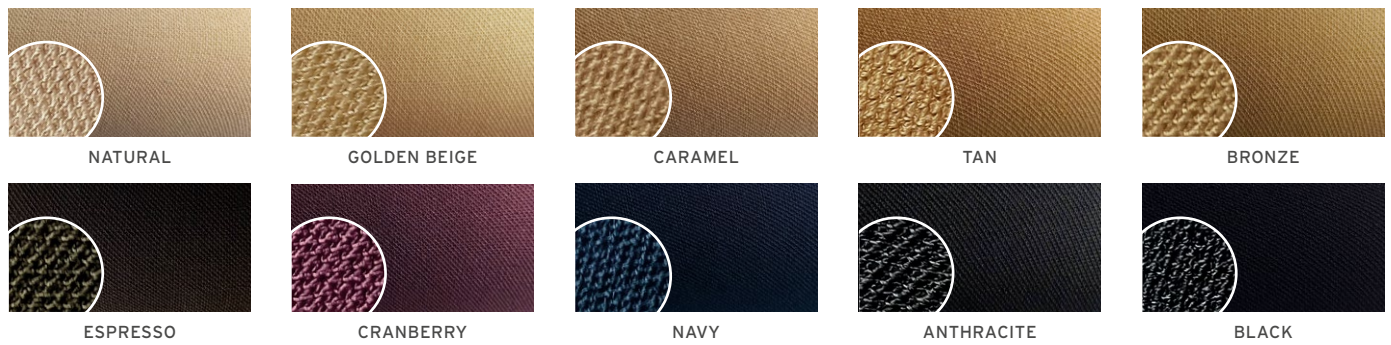

JOBST Trendfarben - limitierte Edition!


Scannen & direkt anschauen:

<https://www.jobst-austria.at/trendfarben>



2 TRENDFARBEN
JE EDITION

Haftbänder AUSSEN/INNEN

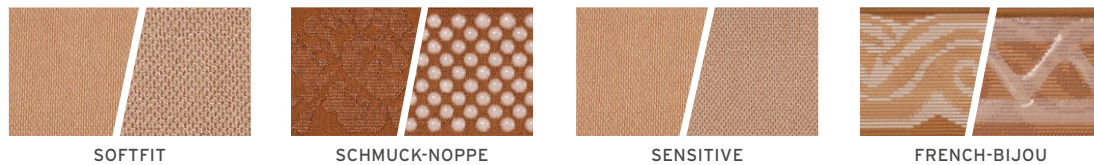






Größentabelle

Messpunkte ▼	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	ID	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		IG	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		IK	Regular	75-85	Petite	65-75	
Maxi Leibteil Empfehlung je Größe in cm ab							
	I	II	III	IV	V	VI	
	Taille 80, Hüfte 95	Taille 90, Hüfte 105		Taille 110, Hüfte 125		Taille 120, Hüfte 135	






Standardsortiment Ab 1.1.2026 neu in der Erstattung (im OST-Tarif)

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 1	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	44310/054	44320/109
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	44310/054	44320/109
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44814/040	44824/084
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	45311/050	45322/088
	Strumpfhose AT Maxi	Stück	45311/050	45322/088
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	45312/041	45323/063
	Strumpfhose AT mit Silhouette-Form-Effekt	Stück	45311/050	45322/088

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 1	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	44310/001	44320/001
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	44310/001	44320/001
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	44811/001	44821/001
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	44813/001	44823/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	44812/001	44822/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44814/001	44824/001
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	45311/001	45322/001
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	45312/001	45323/001



JOBST® Opaque

IM OST-TARIF

Der komfortable Kompressionsstrumpf für jeden Tag

JOBST Opaque kombiniert außergewöhnliche Funktionalität mit einem besonders weichen, sehr angenehmen Tragegefühl. Das feine, undurchsichtige Garn versteckt diskret Schönheitsfehler, sorgt für ein effektives Feuchtigkeitsmanagement und erleichtert komfortabel das tägliche Anziehen.



BLICKDICHT



FEUCHTIGKEITS-MANAGEMENT



SOFT TOUCH


Indikation: Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4	C5
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV

Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen	Standard				Maß					
	AD	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit	●				●				
	Noppe	●	●			●	●	●		
	Sensitive		●				●	●		
	French-Bijou		●				●	●		
Fußspitze	Volant	●	●			●	●	●		
	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Materialzusammensetzung	KKL 1: 64 % Polyamid, 36 % Elasthan KKL 2: 60 % Polyamid, 40 % Elasthan									
Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.									
Patient*innen wählen auch ...	JOBST Griphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum									

Farben

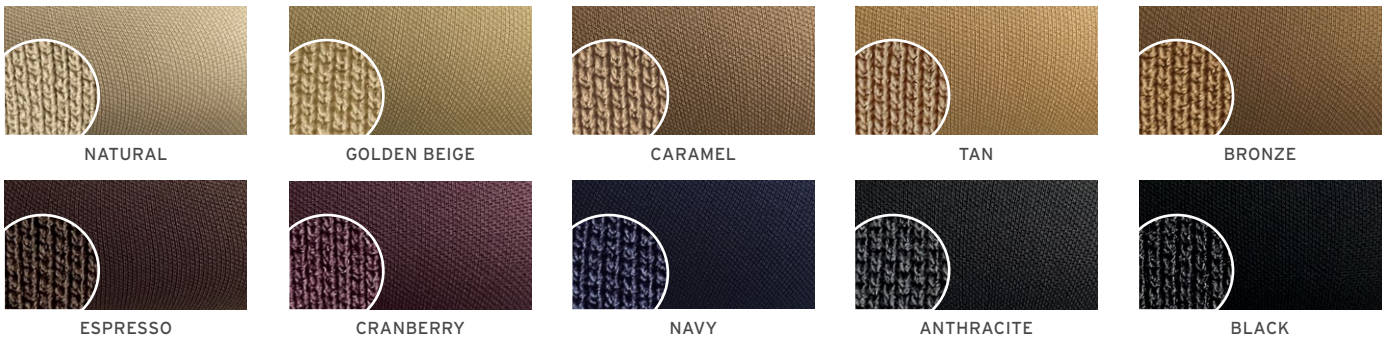

JOBST Trendfarben - limitierte Edition!


Scannen & direkt anschauen:

<https://www.jobst-austria.at/trendfarben>



2 TRENDFARBEN
JE EDITION

Haftbänder AUSSEN/INNEN

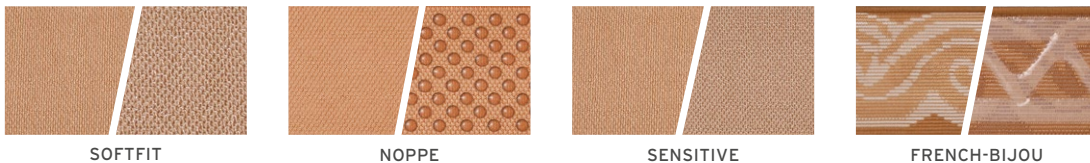






Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 8.

Größentabelle

Messpunkte ▼	Umfangmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht	
	I	II	III	IV	V	VI		
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68		
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81		
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81		
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73		
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51		
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48		
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49		
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39		
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30		
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40		
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34		
	Längenmaße in cm							
AD	Länge	ID	Regular	39-45	Petite	34-39		
AG		IG	Regular	70-80	Petite	60-69		
AT / AG-T		IK	Regular	75-85	Petite	65-75		
	Maxi Leibteil Empfehlung je Größe in cm ab							
	I	II	III	IV	V	VI		
	Taille 80, Hüfte 95	Taille 90, Hüfte 105	Taille 110, Hüfte 125	Taille 120, Hüfte 135				

Standardsortiment











Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 1	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	44310/072	44320/137
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband Ab 01.01.26 zusätzlich über angio Gruppe 44311/013 (KKL 1) und Gruppe 44321/014 (KKL 2) erstattungsfähig	Paar	44310/072	44320/137
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	44310/072	44320/137
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	44812/050	44822/110
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44814/056	44824/108
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	45310/028	45321/063
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	45311/062	45322/105
	Strumpfhose AT Maxi	Stück	45311/062	45322/105
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	Nullprodukt*	45324/026

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 1	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	44310/001	44320/001
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	44310/001	44320/001
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	44310/001	44320/001
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	44811/001	44821/001
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	44813/001	44823/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	44812/001	44822/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44814/001	44824/001
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	45310/001	45321/001
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring Eingriff	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring komprimierendes Leibteil	Stück	-	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring komprimierendes Leibteil Eingriff	Stück	-	Nullprodukt*
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	45311/001	45322/001
	Strumpfhose AT komprimierendes Leibteil	Stück	-	45322/001
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	Nullprodukt*	45324/001
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff komprimierendes Leibteil	Stück	-	45324/001

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.



JOBST® Maternity Opaque

IM OST-TARIF

Der Kompressionsstrumpf für die Schwangerschaft
 JOBST Maternity Opaque Kompressionsstrümpfe wurden mit besonderem Augenmerk auf das Wohlbefinden von Schwangeren entwickelt.



SOFT TOUCH



VENTILATIONS-
BEREICH



FEUCHTIGKEITS-
MANAGEMENT



FLEX ZONE

Indikation: Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4	C5
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV

Die Versorgung in der Übersicht

		Standard			Maß		
▼ Ausführungen		AD	AG	AT/UM	AD	AG	AT/UM
KKL 1: 18 - 21 mmHg		•	•	•	•	•	•
KKL 2: 23 - 32 mmHg		•	•	•	•	•	•
Haftband	SoftFit	•			•		
	Zick Zack Silikonhaftband		•			•	
	Noppe					•	
Fußspitze	Offen	•	•	•	•	•	•
	Geschlossen	•	•	•	•	•	•
Materialzusammensetzung		KKL 1: 64 % Polyamid, 36 % Elasthan KKL 2: 60 % Polyamid, 40 % Elasthan					
Wäsche		Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.					
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Maternity Support Belt, das Produkt finden Sie auf Seite 25					


Farben



CARAMEL



CRANBERRY

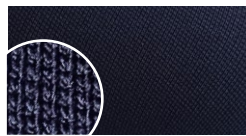

NAVY



ANTHRACITE



BLACK


Haftbänder AUSSEN/INNEN



SOFTFIT MIT ZICK-ZACK MUSTER



ZICK ZACK SILIKONHAFTBAND

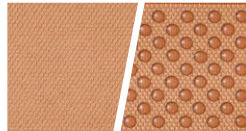

NOPPE



UMSTANDSHOSE MIT TAILLIENBAND UND ZICK-ZACK-MUSTER

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

SoftFlex-Zone im Bauchbereich

Die JOBST Maternity Opaque Umstandshose ist mit einer SoftFlex-Zone im Bauchbereich ausgestattet. Das Hosenteil kombiniert somit ein sanftes Gefühl mit zuverlässiger Passform. Die elastische Stretchzone passt sich dem wachsenden Bauch an und umfasst die sensible Haut sanft im Bereich der Taille.




Größentabelle

Messpunkte ▼	Umfangmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht	
	I	II	III	IV	V	VI		
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68		
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81		
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81		
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73		
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51		
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48		
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49		
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39		
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30		
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40		
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34		
	Längenmaße in cm							
AD	Länge	ID	Regular	39-45	Petite	34-39		
AG		IG	Regular	70-80	Petite	60-69		
AT / AG-T		IK	Regular	75-85	Petite	65-75		


Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

	Ausführung	Einheit	Tarifnummer KKL 1	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	44310/071	44320/133
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44814/055	44824/104
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	45312/048	45323/072

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

	Ausführung	Einheit	Tarifnummer KKL 1	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	44310/001	44320/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44814/001	44824/001
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	45312/001	45323/001



JOBST® Maternity Support Belt

IM OST-TARIF

Der JOBST Maternity Support Belt ist eine Rückenbandage für Schwangere. Sie soll den Lenden- und Bauchbereich angenehm stützen und entlasten und so dazu beitragen, Rückenschmerzen und andere Beschwerden in der Schwangerschaft zu lindern.



ANPASSBAR



DISKRETES DESIGN



ANATOMISCHE PASSFORM

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Erleichterung für Bauch und Rücken

Zwischen 45 % und 75 % der Schwangeren sind im Verlauf ihrer Schwangerschaft von Schmerzen im unteren Rückenbereich betroffen. Deshalb bietet unser Sortiment einen ganzheitlichen Ansatz. JOBST Maternity unterstützt Schwangere und gibt ein leichteres Gefühl in Beinen, Bauch und Rücken.

DER JOBST MATERNITY SUPPORT BELT IST IM OST-TARIF: 31322/025



Größentabelle

	Farbe	Messpunkt	Umfangsmaße in cm			
			S	M	L	XL
	Rosa	Hüfte	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 130
		Bestellnummer	7643500	7643501	7643502	7643503



KOMPRESSION FÜR MÄNNER

Herren-Kompressionsstrümpfe für alle Anlässe

Da Männer auch an venösen Erkrankungen oder Krampfadern leiden können, bietet JOBST ein spezielles Sortiment an Kompressionsstrümpfen für diese Zielgruppe an. Wir haben unser Bestes getan, um sicherzustellen, dass die JOBST-Kompressionsstrümpfe für Männer diskret sind und normalen Socken ähneln.



EFFEKTIVE
GERUCHSKONTROLLE



BAUMWOLLE






JOBST® forMen Ambition und Explore im Detail



Das **optimierte Abschlussbündchen** mit seinem besonders weitmaschigen Gestrick sichert den festen Halt ohne dabei einzuschnüren.



Der **komfortable Fersenbereich** passt sich jeder Bewegung an, ist anatomisch geformt und bietet so Männerfüßen ausreichend Platz. Eine zusätzliche Verstärkung macht diesen Bereich ausgesprochen strapazierfähig.

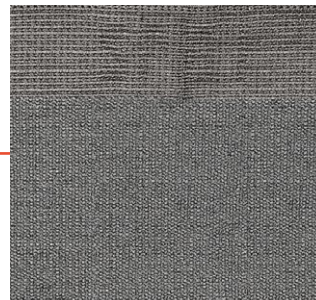

In die Innenseite der Fußsohle **integrierte Carbonfasern** sorgen für frische und trockene Füße. Sie verhindern aktiv Geruchs- und Feuchtigkeitbildung auf innovative Art, ganz ohne chemische Zusätze.



Ein **großzügiger Zehenabschluss** mit flachen Nähten und die am Zehengrundgelenk anschließende Entlastungszone reduzieren effektiv Druckstellen und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

Nur bei
JOBST
forMen


INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Baumwolle und Carbonfasern, das ist der einzigartige C²-effect!

Der Anteil an hochwertiger Baumwolle schafft ein exzellentes Tragegefühl und erhöht die Therapietreue Ihrer Kunden.

Integrierte Carbonfasern leisten effektive Geruchskontrolle, verhindern eine elektrostatische Aufladung und sorgen für ein angenehmes Fußklima.

Der C²-effect bleibt dauerhaft erhalten und geht auch nicht durch regelmäßiges Tragen und Waschen verloren. Darin unterscheidet sich JOBST forMen von herkömmlichen, lediglich oberflächenbehandelten Funktionstextilien.

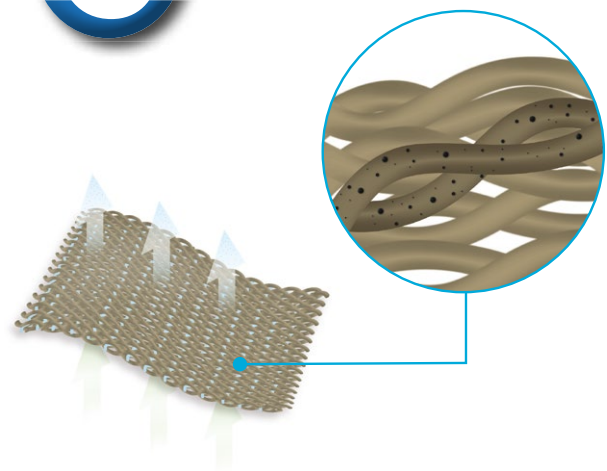

Carbonfasern mit Aktiv-Partikeln absorbieren und neutralisieren Gerüche.



JOBST® forMen Ambition

Der modische Kompressionsstrumpf für Männer

JOBST forMen Ambition vereint modisches Design mit medizinischer Wirksamkeit für höchste Verträglichkeit, Leistung und Komfort.



FEUCHTIGKEITS-
MANAGEMENT



EFFEKTIVE
GERUCHSKONTROLLE



HALTBARKEIT

Indikation: Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4	C5	
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	


Die Versorgung in der Übersicht

	Standard	Maß
▼ Ausführungen	 AD	 AD
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Farbe	Khaki, Brown, Navy, Anthracite, Black	Black
Abschluss	Breites Bündchen mit innovativer Stricktechnik	
Fußspitze	Geschlossen	
Materialzusammensetzung	KKL 1: 63% Polyamid, 21% Elasthan, 15% Baumwolle, 1% Polyester KKL 2: 59% Polyamid, 25% Elasthan, 15% Baumwolle, 1% Polyester	
Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.	
Patient*innen wählen auch ...	JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum	

Farben




KHAKI

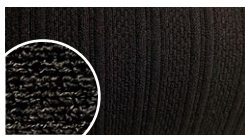


BROWN



NAVY

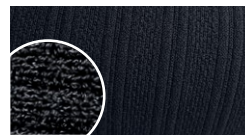

ANTHRACITE

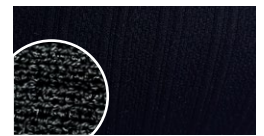

BLACK

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Elegantes Strickmuster

Feine Garne mit 15 % Baumwollanteil im eleganten Ripp-Design machen JOBST forMen Ambition zu einem perfekten Begleiter im Berufsalltag.



Größentabelle

Messpunkte ▼	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	I	II	III	IV	V	VI	
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52	
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53	
cB'	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
	Längenmaße in cm						
AD	Länge	ID	Regular	39-45			
AD		ID	Long	45-51			

Standard- und Maßsortiment

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 1	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Standard	Paar	Nullprodukt*
		Maß	Paar	44310/001

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.



JOBST® forMen Explore

Der legere Kompressionsstrumpf für Männer

JOBST forMen Explore ist ein strapazierfähiger Alltagsstrumpf mit hohem Baumwollanteil - ideal für jede Freizeitaktivität und das tägliche ungezwungene Tragen.



FEUCHTIGKEITS-MANAGEMENT



EFFEKTIVE GERUCHSKONTROLLE



BAUMWOLLE

Indikation: Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4	C5	
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	

Die Versorgung in der Übersicht

	Standard	Maß
▼ Ausführungen	 AD	 AD
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Farbe	Khaki, Navy, Anthracite, Black	Black
Abschluss	Breites Bündchen mit innovativer Stricktechnik	
Fußspitze	Geschlossen	
Materialzusammensetzung	KKL 1: 46 % Polyamid, 30 % Elasthan, 23 % Baumwolle, 1 % Polyester KKL 2: 39 % Polyamid, 35 % Elasthan, 25 % Baumwolle, 1 % Polyester	
Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.	
Patient*innen wählen auch ...	JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum	

Farben



KHAKI



NAVY



ANTHRACITE



BLACK

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Legeres Strickmuster

Langlebige Materialien mit einem Baumwollanteil von bis zu 25 % sowie ein legeres Strickmuster machen JOBST forMen Explore besonders für einen vielseitigen und aktiven Lebensstil interessant.



Größentabelle

Messpunkte ▼	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	I	II	III	IV	V	VI	
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52	
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53	
cB'	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
	Längenmaße in cm						
AD	Länge	ID	Regular	39-45			
AD		ID	Long	45-51			

Standard- und Maßsortiment

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 1	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Standard	Paar	Nullprodukt*
		Maß	Paar	44310/001

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.

JOBST® Classic

NEU AB 2026:
PRODUKTE IM KKL2
& KKL3 STANDARD-
SORTIMENT IM
OST-TARIF

Der Kompressionsstrumpf für individuelle Ansprüche

JOBST Classic Kompressionsstrümpfe leisten starke
Kompression für individuelle Bedürfnisse von Patient*innen.




Indikation: Chronische Venenerkrankung

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	Florides UCV

Die Versorgung in der Übersicht

▼ Ausführungen		Standard				Maß					
KKL 2: 23 - 32 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 3: 34 - 46 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit	●				●					
	Noppe	●	●			●	●	●			
	Sensitive		●				●	●			
	French-Bijou						●	●			
	Volant	●				●	●	●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Materialzusammensetzung		KKL 2: 63% Polyamid, 37% Elasthan KKL 3: 63% Polyamid, 37% Elasthan									
Wäsche		Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.									
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Griphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Hautpflegeschaum, TENA Wet Wash Gloves Hautpflege									

Farben

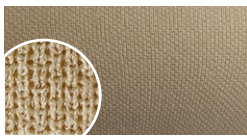

SAND



PEARL



TOPAS




BLACK

Haftbänder AUSSEN/INNEN



SOFTFIT

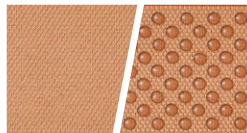

NOPPE



SENSITIVE



FRENCH-BIJOU



Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 8.


INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Geripptes Design

JOBST Classic ist zusätzlich zum elegant glatten Design auch im klassisch sportlichen Ripp-Design speziell für die Business-Garderobe erhältlich.



ANTHRACITE GERIPPT

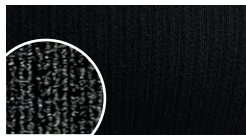

BLACK GERIPPT

Längentyp AD Kniestumpf

Standard & Maß:

KKL 2

Haftband: SoftFit oder Noppe

mit Volant

Fußspitze geschlossen

Nur Maß:

Fußspitze offen oder geschlossen







Größentabelle

Messpunkte ▼	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	IG	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		IG*	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		IK	Regular	75-85	Petite	65-75	

*AG Länge IG auch in Long (81 - 91cm) verfügbar.

Standardsortiment Ab 1.1.2026 neu in der Erstattung (im OST-Tarif)

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 2	Tarifnummer KKL 3
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	44320/111	44330/038
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	44320/111	44330/038
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	44320/111	44330/038
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44824/086	44834/074
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	45321/057	Nullprodukt*
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	45322/090	Nullprodukt*
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	45324/024	Nullprodukt*
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	45323/065	-

Maßsortiment









Kompressionsklasse 2-3

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 2	Tarifnummer KKL 3
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	44320/001	44330/001
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	44320/001	44330/001
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	44320/001	44330/001
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	44821/001	44831/001
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	44823/001	44833/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	44822/001	44832/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44824/001	44834/001

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.

Maßsortiment

Kompressionsklasse 2-3

	Ausführung	Einheit	Tarifnummer KKL 2	Tarifnummer KKL 3
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	45321/001	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring Eingriff	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring komprimierendes Leibteil	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring komprimierendes Leibteil Eingriff	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	45322/001	45331/001
	Strumpfhose AT komprimierendes Leibteil	Stück	45322/001	45331/001
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff komprimierendes Leibteil	Stück	45324/001	45333/001
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff Tailleband 5 cm	Stück	45324/001	45333/001
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff Tailleband 2,5 cm	Stück	45324/001	45333/001
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	45324/001	45333/001
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	45323/001	-

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.



JOBST® Bellavar®

NEU AB 2026:
AUCH STANDARD-
SORTIMENT
IM OST-TARIF

Maximale Therapiesicherheit

JOBST Bellavar eignet sich in seiner robusten Qualität insbesondere zur Behandlung starker Venenerkrankungen, Phlebödemen und bei frühem Lymphödem. Auch besonders zu empfehlen für aktive Patienten.



HALTBARKEIT



EINFACHES
ANZIEHEN



ATMUNGSAKTIV

Indikation: Chronische Venenerkrankung

			C3	C4	C5	C6
			Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	Florides UCV


Indikation: LYMPHÖDEM

Entstauungsphase	Erhaltungsphase
------------------	-----------------

Die Versorgung in der Übersicht

		Standard					Maß					
▼ Ausführungen		AD	AF	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL 2: 23 - 32 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 3: 34 - 46 mmHg							●	●	●	●	●	●
Haftband	Noppe		●	●			●	●	●			
	French-Bijou							●	●			
	Volant	●	●	●			●	●	●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●					●	●	●	●	●	●
Materialzusammensetzung		KKL 2: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan KKL 3: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan										
Wäsche		Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.										
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Griphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, TENA Wet Wash Gloves Hautpflege										

Farben

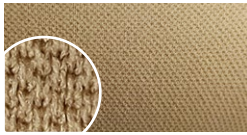


SAHARA



PEARL

Farben Maß

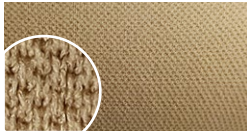

SAHARA




PEARL



BLACK

Haftbänder AUSSEN/INNEN

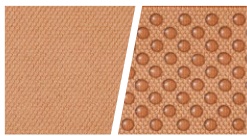

NOPPE



FRENCH-BIJOU







Größentabelle

Messpunkte ▼	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	I	II	III	IV	V	VI	
cG	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	
cF	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56	
cE	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	44-46	
cD	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	
cC	29-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45	
cB'	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	
cY	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	
cA+cB	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	
Längenmaße in cm							
AD*	Länge	ID	Regular	40-43	Petite	36-39	
AF		IF	58-62				
AG		IG	69-74				
AT / AG-T		IK	Regular	76-80	Petite	70-75	

* Fußgrößen AD mit geschlossener Fußspitze: kurz bis Schuhgröße 39, lang ab Schuhgröße 40

Standardsortiment Ab 1.1.2026 neu in der Erstattung (im OST-Tarif)












Kompressionsklasse 2

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	Nullprodukt*
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	Nullprodukt*
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	Nullprodukt*
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	44822/060
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44824/030
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	Nullprodukt*
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	45322/045
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	45324/012

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.

Maßsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung		Einheit	Tarifnummer KKL 2	Tarifnummer KKL 3
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	44320/001	44330/001
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	44320/001	44330/001
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	44821/001	44831/001
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	44823/001	44833/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	44822/001	44832/001
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	44824/001	44834/001
	Hüftbefestigung AG-T rechts/links (auch beidseitig)	Stück	45321/001	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring Eingriff	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring komprimierendes Leibteil	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring komprimierendes Leibteil Eingriff	Stück	Nullprodukt*	Nullprodukt*
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	45322/001	45331/001
	Strumpfhose AT komprimierendes Leibteil	Stück	45322/001	45331/001
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	45324/001	45333/001
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff komprimierendes Leibteil	Stück	45324/001	45333/001
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	45323/001	45332/001

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.




JOBST® Travel

Kompression auf Reisen

JOBST Travel sind medizinische Kompressionsstrümpfe und können präventiv helfen, dem Risiko einer Reisetrombose vorzubeugen, damit Reisende gesund und erholt am Ziel ankommen.



REISEN

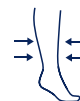HELFFEN SCHWELLUNGEN
ZU MINIMIEREN

BAUMWOLLE

Das Sortiment im Überblick

Ausführung	Farbe	Schuhgröße	Einheit	Material	Kompressionsdruck
 AD	Beige	1 (37/38) 2 (39/40) 3 (41/42) 4 (43/44) 5 (45/46)	Paar	55 % Polyamid 33 % Baumwolle 12 % Elasthan	 Der Kompressionsdruck im Fesselbereich beträgt 15-20 mmHg
	Navy				
	Black				

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Wohltuender Tragekomfort für Reisende

JOBST Travel sind hochwertige Kniestrümpfe, die dabei helfen den venösen Blutfluss in den Beinvenen auf Reisen zu verbessern, um unangenehme Schwellungen an Beinen und Füßen zu vermeiden und um das Risiko einer tiefen Venenthrombose zu reduzieren. Das atmungsaktive Material fühlt sich angenehm weich an und der hohe Baumwollanteil sorgt für einen wohltuenden Tragekomfort.

Größentabelle

Messpunkte ▼	Größen				
	1	2	3	4	5
Wadenumfang (cC) in cm	27-37	30-40	33-43	36-46	39-49
Knöchelumfang (cB) in cm	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29
Schuhgröße in cm	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46



JOBST® Sport

Mit
Carbon-
fasern

Sportkompression

JOBST Sport sind medizinische Kompressionsstrümpfe und können damit helfen den Blutfluß zu verbessern und Schwellungen entgegenzuwirken. Sie helfen, die Durchblutung zu verbessern und Schwellungen zu reduzieren.



ANATOMISCH
GEPOLSTERT



HELFEN SCHWELLUNGEN
ZU MINIMIEREN



STARKER
HALT



GERUCHS-
KONTROLLE

Das Sortiment im Überblick

Ausführung	Farbe	Schuhgröße	Einheit	Material	Kompressionsdruck
	Pink / Grey	S (37-40) M (39-42) L (41-44) XL (42-46)	Paar	60% Nylon 30% Polyester 10% Elasthan	Der Kompressionsdruck im Fesselbereich beträgt 15-20 mmHg
	Royalblue / Grey				
	White / Grey				
	Black / Grey				
	Black / Cool Black				

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Sportlicher Laufkomfort für Aktive

JOBST Sport Kniestrümpfe sind mit einem anatomisch gepolsterten Fuß- und Fersenbereich, einem nahtlosen Zehenbereich und einer effektiven Geruchskontrolle ausgestattet. Der graduelle Druckverlauf unterstützt die Blutzirkulation wodurch mehr Sauerstoff und mehr Nährstoffe zu den Muskeln geleitet werden. Der erhöhte Sauerstoffgehalt kann die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit von Muskeln steigern.

Größentabelle

Messpunkte ▼	Größen			
	S	M	L	XL
Wadenumfang (cC) in cm	28-38	30-42	32-46	34-50
Knöchelumfang (cB) in cm	18-21	21-25	25-29	29-33
Schuhgröße in cm	37-40	39-42	41-44	42-46



JOBST® UlcerCare

IM OST-TARIF

Für die effektive Behandlung von Ulcus cruris venosum

JOBST UlcerCare ist ein 2in1 Kompressionssystem für die Therapie von venösem Ulcus /UCV. Kompressions- und Kompressionsunterziehstrumpf (Liner) erzielen in Kombination den nominalen Druck von 40 mmHg und bieten einen hohen Stiffness Faktor. Der hautfreundliche Liner kann aufgrund seiner leichten Kompression auch während der Ruhe- und Schlafphasen zur Ödemprävention getragen werden und fixiert zusätzlich den Wundverband.



2IN1-THERAPIESYSTEM



STARKER HALT







EINFACHES ANZIEHEN FÜR BEINE

Indikation: Chronische Venenerkrankung und Ulcus cruris venosum (UCV)

						C5	C6
						Abgeheiltes UCV	Florides UCV

Die Versorgung in der Übersicht

		Standard und Maß	
			
▼ Ausführungen		AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf
KKL 1			●
KKL 3: 40 mmHg**		●	
Optionen	Mit Reißverschluss*** links oder rechts	●	
	Ohne Reißverschluss	●	●
Fußspitze	Offen	●	
	Geschlossen		●
Materialzusammensetzung		76% Nylon/Polyamid, 24% Spandex/Elasthan	79% Nylon/Polyamid, 16% Spandex/Elasthan, 5% Seide
Wäsche		bei 40°C waschbar 	bei 60°C waschbar 
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Grifphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, TENA Wet Wash Gloves Hautpflege	

KKL 3 entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf *Reißverschluss muss auf die ulkusfreie Seite.

Farben

Kompressionsstrumpf Standard



BEIGE



BLACK

Farbe

Unterziehstrumpf (Liner) Standard



WHITE

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Kompressions- & Unterziehstrumpf im Zusammenspiel

Eine spezielle Gestrick-Struktur im Wadenbereich des Kompressionsstrumpfes und im Schienbeinbereich des Unterziehstrumpfes lässt beide System-Komponenten besonders gut ineinandergreifen. Dies bietet einen hohen Tragekomfort und fördert die Akzeptanz der Patient*innen.

Anwendungshinweise

- JOBST UlcerCare wird als Kompressionssystem nach erfolgreicher Ödemreduktion durch Kompressionsbinden empfohlen.
- Offene Wunden müssen vor Anwendung mit einer Wundauflage abgedeckt werden. Therapielösungen für die Versorgung chronischer Wunden finden Sie bei Essity unter der Marke Cutimed®.
- Nach vollständiger Abheilung des venösen Ulcus wird empfohlen, weiterhin medizinische Kompression zu tragen.



Sortiment

Kompressionsklasse 3**

Ausführung		Standard	Maß
		Tarifnummer KKL 3**	
	Kniestumpf AD (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	40033/024	40037/011
	Kniestumpf AD mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	Nullprodukt*	Nullprodukt*
		Leichte Kompression zur Ödemprävention	
	3 Unterziehstrümpfe (Liner) AD/U	40034/016	-
	1 Unterziehstrumpf (Liner) AD/U	-	40038/011

Größentabelle

Messpunkte ▼	Größen						
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Wadenumfang (cC) in cm	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60
Knöchelumfang (cB) in cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39

* Aktuell nur als Nullprodukt erhältlich, bei allen anderen Produkten ist die Tarifnummer angegeben.



JOBST® FarrowWrap®

IM OST-TARIF

Einfache Anwendung zur Förderung des Selbstmanagements

JOBST FarrowWrap ist ein medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) mit anpassbaren Klettbandagen aus strapazierfähigen Materialien, das dazu dient Schwellungen an den Extremitäten zu reduzieren.



LEICHT ANZULEGEN



KURZZUG-TECHNOLOGIE



ANPASSBAR

Indikation: Chronische Venenerkrankung und Ulcus cruris venosum (UCV)

			C3	C4	C5	C6
			Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	Florides UCV


Indikation: LYMPHÖDEM

ENTSTAUUNGSPHASE	
------------------	--

Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen	Standard								
	Fußteil	Wadenteil	Oberschenkel inkl. Knie teil	Armteil	Handteil	Farrow Hybrid ADI	Farrow Liner AD	Farrow Liner AG	
LITE 20 - 30 mmHg	•	•	•	•	•	•			
CLASSIC 30 - 40 mmHg	•	•	•						
STRONG 30 - 40 mmHg	•	•	•						
Liner im Lieferumfang enthalten		2 x AD	2 x AG						
Materialzusammensetzung	LITE: Gewebe: 82% Polyamid, 18% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie- und Armteil: 100% Polyurethan CLASSIC/STRONG: 47% Baumwolle, 16% Polyester, 32% Polyamid, 5% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie teil: 100% Polyurethan				Gewebe: 89% Polyamid, 11% Elasthan Schaumstoff: 100% Polyurethan		83% Polyamid, 17% Elasthan	96% Polyamid, 4% Elasthan	85% Baumwolle, 15% Elasthan
Wäsche	LITE: bei 30°C waschbar CLASSIC/STRONG: Handwäsche					bei 40°C waschbar			
Patient*innen wählen auch ...	JOBST WashCARE - Waschmittel								

Farbe Kompressionssystem

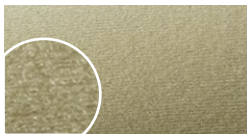

LITE - BEIGE



CLASSIC - BEIGE



TAUPE

Farbe Unterziehstrumpf (Liner)



BEIGE (AD)



WHITE (AG)

85 %
der Patient*innen!



Nachgewiesene Patientenzufriedenheit*

Eine Studie hat gezeigt, dass 85 % der Patient*innen JOBST FarrowWrap einfach an ihre Bedürfnisse anpassen konnten. 73 % der Patient*innen haben die Anwendbarkeit mit gut oder sehr gut bewertet. So kann JOBST FarrowWrap eine geeignete Wahl für die Bewältigung der Probleme sein, welche mit venösen und lymphatischen Erkrankungen verbunden sind.

OST-Tarifnummern in der Übersicht

Bitte beachten Sie: JOBST FarrowWrap ist in verschiedenen Längentypen und Kompressionsstärken erhältlich.

				
Fußteil inkl. Unterziehstrumpf	Wadenteil inkl. Unterziehstrumpf	Oberschenkel mit Knie inkl. Unterziehstrumpf	Armteil inkl. Unterziehstrumpf	Farrow Hybrid ADI
40047/016 40047/017	40040/021 40040/022	40041/018 40041/019	40042/013	40044/18

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Nicht kompressiver Unterziehstrumpf (Liner): JOBST Farrow Liner AD & AG

In Kombination entweder mit JOBST FarrowWrap LITE, CLASSIC oder STRONG wird ein Liner empfohlen, damit das Kompressionssystem nicht direkt auf der Haut aufliegt. Der Liner schützt die Haut und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Der Liner ist beim Wadenteil paarweise in der Länge **AD** und beim Knie- inkl. Oberschenkelteil in der Länge **AG** im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Liner können über das Maßblatt paarweise dazu bestellt werden.


Unterziehstrumpf mit Fußkompression: JOBST FarrowHybrid ADI


FarrowHybrid **ADI** von JOBST ist ein Liner mit Fußkompression, der sich für milde bis mäßige Ödeme eignet. Auf den Fuß bis zum Knöchel wird eine Kompression von 20-30 mmHg ausgeübt, während die Wade keine Kompression erfährt. JOBST FarrowHybrid kann mit einem Wadenteil kombiniert werden.





*Beobachtungsstudie JOBST FarrowWrap 2019, interne Daten.

Maßtabellen Untere Extremitäten

JOBST FarrowWrap Fußteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
	c (A1) Mittelfuß- / Ristumfang	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
	l (A) Fußlänge (standard)	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
	l (A) Fußlänge (lang)	18-19	19-20	21-22	22-23	24-25


JOBST FarrowWrap Wadenteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
	c (C) Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
	c (B) Knöchelumfang	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
	le (A) - (D) standard	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
	le (A) - (D) lang	38-41	40-43	42-45	44-47	44-47


JOBST FarrowWrap Knieenteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
	c (E) Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
	c (C) Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68	63-73

JOBST FarrowWrap Oberschenkelteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	
	c (G) Oberschenkelumfang	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100	95-110	
	c (E) Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87	
	Länge (in cm)		kurz		standard		lang	
	le (E) - (G)		16-20		21-26		27-31	


JOBST FarrowHybrid ADI Liner mit Fußkompression	Messpunkt (Angaben in cm)	S	M	L	XL	
	Schuhgröße	35-38	38-41	41-44	44-46	
	Länge (in cm)		standard		weit	
	c (A1) Mittelfuß- / Ristumfang	20-27 cm		28-35 cm		

Maßtabellen Obere Extremitäten


JOBST FarrowWrap LITE Armteil	Messpunkt (Angaben in cm)	S	M	L	
	c G	Oberarmumfang	22-31	29-39	32-45
	c E	Ellenbogenumfang	20-27	25-34	30-40
	c C	Handgelenksumfang	14-18	16-21	19-25
	Länge (in cm)		kurz	standard	lang
	le C - G	40-43	44-47	48-51	

JOBST FarrowWrap LITE Handteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	
	c A	Umfang an den Fingergrundgelenken*	16-18	18-20	20-22	22-24
	c B	Mittelhandumfang (Höhe Daumenschwimmhaut)	17-19	19-21	21-23	23-26
	c C	Handgelenksumfang	15-18	17-20	19-22	22-24

Messpunkte Untere Extremitäten

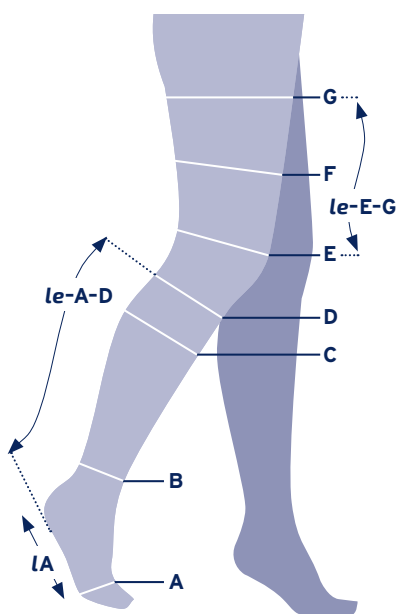

Messpunkte Obere Extremitäten

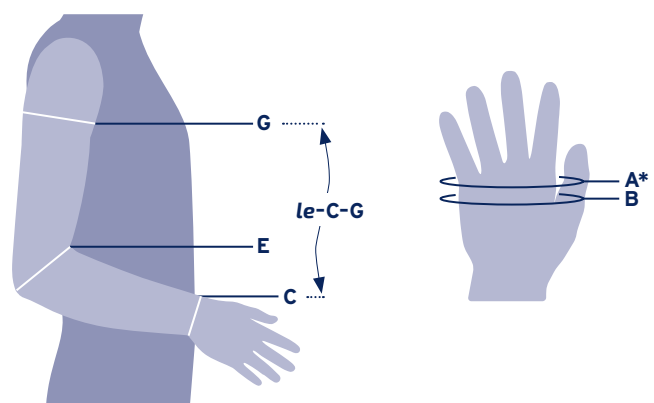

le = Konturmessung (der Kontur folgend) **ce** = 10 cm oberhalb des Knies zu messen

* Umfang Fingergrundgelenke mit flach aufliegender Hand.

Falls die Maße nicht eindeutig einer Größe zuzuordnen sind, sollte immer die kleinere der in Frage kommenden Größen gewählt werden.

JOBST® Comprinet® pro

JOBST Comprinet pro erfüllt alle wissenschaftlichen Ansprüche an einen anatomisch formgerechten Thromboseprophylaxe-Strumpf. Der Kompressionsdruck beträgt im Fesselbereich ca. 18 mmHg und fällt von distal nach proximal linear ab. Eine einfache Größenerkennung wird durch die Farbkennzeichnung am Zehensichtfenster an der Fußoberseite ermöglicht.



EINFACHE
GRÖßENERKENNUNG



WIEDERAUFBEREITBAR



	Farbcode	Größe	Wadenumfang (=Strumpfwerte)	Beinlänge (=Strumpflänge)	Einheit in Paar	Bestell- nummer	PZN
Comprinet pro 1 Paar im Polybeutel Thromboseprophylaxe 18 mmHg oberschenkellang Erstattung im OST-Tarif: 44870/016		1	Small 23-30 cm	normal 64-80 cm	10	4633500	2064464
		2		lang 80-97 cm	10	4633600	2064470
		3	Medium 30-38 cm	normal 64-80 cm	10	4633700	2064487
		4		lang 80-97 cm	10	4633800	2064493
		5	Large 38-46 cm	normal 64-80 cm	10	4638800	2056134
		6		lang 80-97 cm	10	4638900	2064501
		7	X-Large 46-53 cm	normal 64-80 cm	10	7712500	2971989
		8		lang 80-97 cm	10	7712800	2971995
		9	XX-Large 53-66 cm	normal 64-80 cm	10	7713000	3847174
		10		lang 80-97 cm	10	7713100	3847180
Comprinet pro 1 Paar im Polybeutel Thromboseprophylaxe 18 mmHg knielang		1	Small	23-30 cm	10	7702600	2248833
		2	Medium	30-38 cm	10	7702700	2248856
		3	Large	38-46 cm	10	7702800	2248862
		4	X-Large	46-53 cm	10	7712400	2971972
		5	XX-Large	53-66 cm	10	7713300	3847197

JOBST® Comprinet® forte

JOBST Comprinet forte wurde entwickelt, um durch hohe Kompression des Beines die Venenfunktion zu unterstützen und Ödeme zu vermeiden, z.B. zur Kompressionsversorgung nach venenchirurgischen Eingriffen. Erhältlich mit einem Kompressionsdruck von 23 mmHg oder 35 mmHg. Die offene Fußspitze ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Durchblutung.



	Farbcode	Größe	Fesselumfang	Wadenumfang	Oberschenkelumfang	Einheit in Paar	Bestellnummer
Comprinet forte 23 1 Paar im Polybeutel		1	18-21 cm	24-34 cm	39-74 cm	10	7508700
		2	21-24 cm	34-40 cm	45-80 cm	10	7508800
		3	24-27 cm	36-46 cm	50-86 cm	10	7508900
		4	27-30 cm	42-52 cm	50-90 cm	10	7509000
Comprinet forte 35 1 Strumpf im Polybeutel		1	18-21 cm	24-34 cm	39-74 cm	10	7509100
		2	21-24 cm	34-40 cm	45-80 cm	10	7509200
		3	24-27 cm	36-46 cm	50-86 cm	10	7509300
		4	27-30 cm	42-52 cm	50-90 cm	10	7509400
Comprinet forte Liner Einheitsgröße	-	-	-	-	bis 90 cm	10	7508600



KOMPRESSIONS- BANDAGEN

Kurzzugbinden, Unterpolsterung, Kompressionssysteme

JOBST Kompressionsbinden und Polstermaterialien bieten ein umfassendes Sortiment zur Ödemreduktion und zur individuellen Therapie in jeder Phase der chronisch venösen Insuffizienz.



ENTSTAUUNG



ERHALTUNG



PRÄVENTION

Kurzzugbinden* in der Entstauungsphase

JOBST Comprilan®

Textilelastische, hautfreundliche Kurzzugbinde (100% Baumwolle)

Für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen geeignet. Längsdehnung von ca. 90% möglich. Die Binde ist waschbar bis 60° und bis zu 10x wiederverwendbar.



JOBST Comprihaft®

Textilelastische, kohäsive, hautfreundliche Kurzzugbinde (100% Baumwollgewebe mit selbsthaftender Beschichtung)

Die mikroporöse Beschichtung sorgt für eine Haftung der Bindenlagen aufeinander, nicht aber auf der Haut. Somit wird ein sicherer Sitz ohne Verrutschen auch nach längerer Tragezeit gewährleistet. Längsdehnung 75%.




* Verwendetes Material erhält nach dem Prozess des Standardautoklavierens die therapeutisch relevanten Materialeigenschaften aufrecht.

Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Kurzzugbinden		Abmessung	Inhalt/VE	Bestellnummer	PZN
Comprilan** Textilelastische Kurzzugbinde	1 Binde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	5 Stück	102600	1402924
		5 m x 8 cm	5 Stück	102700	0921622
		5 m x 10 cm	5 Stück	102800	0921639
		5 m x 12 cm	5 Stück	102900	1402930
	Einzelbinde lose im Karton	5 m x 6 cm	10 Stück	4538100	-
		5 m x 8 cm	10 Stück	4538200	-
		5 m x 10 cm	10 Stück	4538300	-
		5 m x 12 cm	10 Stück	4538400	-
	1 Binde in Faltschachtel	10 m x 10 cm	20 Stück	7718800	-
JOBST Comprihaft** Kohäsive Kurzzugbinde	Einzelbinde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	5 Stück	4595700	-
		5 m x 8 cm	5 Stück	4595800	-
		5 m x 10 cm	5 Stück	4595900	-
		5 m x 12 cm	5 Stück	4596000	-

 Unterpolsterung  für Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Unterpolsterung		Abmessung	Inhalt	Bestellnummer	PZN
Tricofix** Elastischer Schlauchverband	A/1: Finger und Zehen	20 m x 1,5 cm	1 Stk.	0219100	0635106
	B/2: Finger, Zehen und geschiente Finger	20 m x 2,5 cm	1 Stk.	0219200	0635112
	C/3: Hände und Kinderarme	20 m x 4 cm	1 Stk.	0219300	0635129
	D/5: Hände, Arme, Füße und Unterschenkel	20 m x 6 cm	1 Stk.	0219500	0635135
	E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe	20 m x 8 cm	1 Stk.	0219700	0635141
	F/7: Oberschenkel und große Köpfe	20 m x 10 cm	1 Stk.	0219800	0635158
	G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe	20 m x 12 cm	1 Stk.	0219900	-
Artiflex** Hochgebauchte Polsterbinde		3 m x 6 cm	50 Stk.	0904400	3451720
		3 m x 10 cm	30 Stk.	0904600	3451737
		3 m x 15 cm	20 Stk.	0904700	3451743
		3 m x 20 cm	15 Stk.	0904800	3451789
Artiflex® Nat** Hochgebauchte Polsterbinde		2,7 m x 5 cm	70 Stk.	7287000	-
		2,7 m x 7 cm	50 Stk.	7287100	-
		2,7 m x 10 cm	30 Stk.	7287200	-
		2,7 m x 15 cm	20 Stk.	7287300	-
JOBST Foam Pad** Schaumgummipolster		1 cm x 9 cm	1 Stk.	7849610	-



Eine adäquate Unterpolsterung des Kompressionsverbandes gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung, schont druckempfindliche Regionen und vermeidet Einschnürungen unter dem Kompressionsverband. Die Empfehlung, eine Bandagierung mit Unterpolsterung vorzunehmen, wurde in die aktuelle Leitlinie S2k aufgenommen. Publiziert auf www.awmf.org, Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), [...]. AWMF-Registernummer: 037/005

**LATEX
FREE
FORMULA**

** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.



KOMPRESSIONSSETS

2-Lagen-Kompressionssysteme, Bandagenset

JOBST bietet für ein effektives Ödemmanagement bei phlebologischen sowie lymphologischen Indikationen bedarfsgerecht zusammengestellte Kompressions- und Bandagensets.



ENTSTAUUNG



ERHALTUNG



PRÄVENTION

Kompressionssets in der Entstauungsphase

In der Entstauungsphase können Kurzzugbinden mit einer zusätzlichen Unterpolsterung, 2-Lagen Kompressionssysteme oder Bandagensets eingesetzt werden.

2-Lagen-Kompressionssysteme mit Druckindikator

JOBST Compriz | JOBST Compriz lite

JOBST Compriz und JOBST Compriz lite fördern eine effektive Ödemreduktion und bieten Kompression nach Bedarf. Die Sets bestehen jeweils aus einer Polsterwatte sowie einer kohäsiven Kurzzugbinde samt Druckindikator und bieten je nach Indikation die einfache Lösung zum Erreichen der individuell notwendigen Kompression. Die zuverlässige Kompression fördert eine effektive Wundheilung und somit den Therapieerfolg.



Kompressionssysteme / Kompressionsset	Abmessung	Inhalt	Bestellnummer	PZN	Erstattung via OST-Tarif
JOBST Compriz** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 40 mmHg ABPI >= 0,8	18-25 cm	1 Set	7627100	4531912	40030/100
JOBST Compriz lite** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 20-30 mmHg ABPI 0,5-0,8	18-25 cm	1 Set	7627102	4531906	40030/101

ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN DES JOBST COMPRI2 SETS



1 Erste Binde
 Polsterwatte auf Polyesterbasis mit Polyurethanschaum beschichtet

- Einfaches Anlegen auch im Fersenbereich aufgrund von 2-dimensionaler Dehnbarkeit.
- Zerreißbar, um bei Bedarf zusätzliche Polsterung anlegen zu können und das Risiko von druckindizierten Hautdefekten zu verringern.
- Aktives Feuchtigkeitsmanagement führt Feuchtigkeit ins Innere des Systems ab und hält die Haut trocken.
- Die Verwendung einer Unterpolsterung entspricht der Empfehlung in der Leitlinie S2k*



2 Zweite Binde
 Kohäsive Kurzzugbinde

- Der Druckindikator visualisiert den korrekten Anlagedruck der Kompressionsbinde.
- Kohäsive Eigenschaften erleichtern die Anlage und ermöglichen eine Korrektur der Wickeltouren.
- Zuverlässiger, rutschsicherer Halt
- Tragedauer bis zu 7 Tagen möglich
- 100 % Baumwolle, luftdurchlässig
- Anwendungsvideo:



Bandagenset

JOBST LymphCARE Bandagenset

In den JOBST LymphCARE Bandagensets sind alle Materialien, die für einen Kompressionsverband an Arm, Bein oder Unterschenkel erforderlich sind, bedarfsgerecht zusammengestellt. Alle Produkte sind übersichtlich angeordnet, mit einem Griff einsetzbar und leicht zu handhaben.



Kurzzugbinden / Kompressionssysteme	Abmessung	Inhalt	Bestellnummer	PZN	Erstattung via OST-Tarif
JOBST LymphCARE Bandagenset	Arm	1 Set	7863900	4296730	40031/19
	Unterschenkel	1 Set	7864100	4296747	40031/18
	Bein	1 Set	7864200	4296753	40031/17



ANZIEHHILFEN UND KOMPRESSIIONSPFLEGE


Ein sorgsamer Umgang mit Kompressionsversorgungen, der richtige Einsatz von Anziehhilfen, sowie der Gebrauch von Zubehörprodukten können während der Therapie eine wichtige Rolle spielen.

Unterstützung und Schutz beim Anziehen

JOBST Grifhandschuhe	Größe	Einheit	Bestellnummer	
Für das leichte und schonende Anziehen der Kompressionsversorgung. 60% Latex, 40% Nylon	XS	1 Paar	77400-00027-00	
	S		77400-00014-00	
	M		77400-00015-00	
	L		77400-00030-00	
	XL		77400-00031-00	

Leichteres Über-den-Fuß-Ziehen

JOBST Seidenanziehhilfe	Ausführung	Einheit	Bestellnummer	
<p>Nur für Kompressionsversorgungen ohne Spitze.</p> <p>Für ein leichteres und einfacheres Über-den-Fuß-Ziehen.</p> <p>Reduziert den Widerstand zwischen der Haut des Patienten und der Kompression - für spürbar weniger Irritationen.</p>	Einzelverpackung	Stück	78463-00001-01	

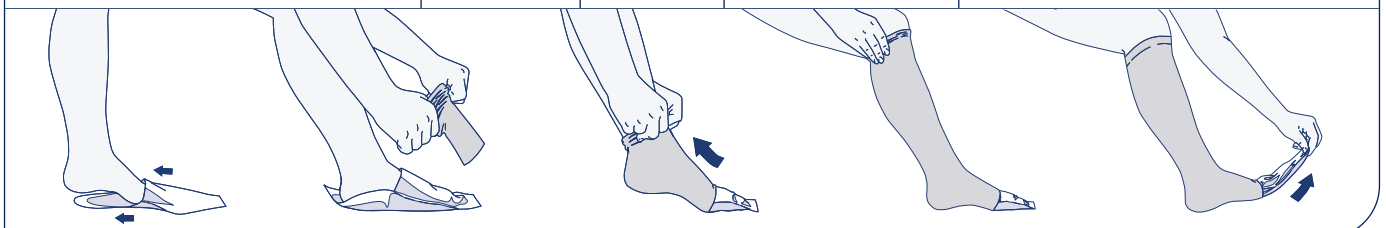

Zur Pflege von Kompressionsversorgungen

JOBST WashCARE	Ausführung	Einheit	Bestellnummer	
<p>JOBST WashCARE ist ein pflegendes Waschmittelkonzentrat, das sich hervorragend für die Reinigung von Kompressionsversorgungen eignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle waschaktive Substanzen und Pflegestoffe reinigen und schützen die hochwertigen Garne. • JOBST WashCARE ist hautfreundlich, pH-neutral und verleiht Kompressionsversorgungen einen angenehm frischen Duft. • Eine Flasche reicht für ca. 125 Handwäschen. 	Theken- display	6 Flaschen à 250 ml	77400-00002-01	
	Sachet	50 Sachets à 15 ml	16923-00020-03	

Zum Schutz von Kompressionsversorgungen

JOBST Wäschenetz	Ausführung	Einheit	Bestellnummer	
<p>Das JOBST Wäschenetz bietet Kompressionsversorgungen einen optimalen Pflegeschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch die feinmaschige Netzstruktur wird das hochwertige Kompressionsgestrick beim Waschen vor mechanischen Einflüssen wirksam geschützt. • Das JOBST Wäschenetz gewährleistet eine besonders schonende und effektive Reinigung, die eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Kompressionsversorgung unterstützt. 	Einzel- verpackung	1 Netz	77400-00004-01	
	Theken- display	10 Netze	77400-00005-02	

PFLEGEHINWEISE

JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich oder mindestens jeden zweiten Tag gewaschen werden. Verwenden Sie keine Wäschezusätze wie Weichspüler, optische Aufheller oder Fleckentferner. Spülen Sie Ihre Kompressionsstrümpfe gut aus. Rollen Sie die nassen Kompressionsstrümpfe nach dem Waschen in ein Handtuch ein und drücken Sie überschüssiges Wasser aus. Nicht auswringen. Trocknen Sie die Kompressionsstrümpfe nicht auf der Heizung oder in direktem Sonnenlicht. Ob Ihre Kompressionsstrümpfe trocknergeeignet sind, können Sie dem Etikett Ihrer Kompressionsstrümpfe entnehmen.

Pflege des Silikonbandes

Waschen Sie das Silikonband bei Bedarf von Hand, um Creme- und Lotionsreste, Haare und andere Fremdkörper zu entfernen.

Bild: Lymphödem Vereinigung Schweiz, www.lv-schweiz.ch



JOBST® An- und Ausziehhilfen von Arion

Arion Easy-Slide	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit offener Fußspitze. Reduziert die Körperliche Belastung.				
	Einzelverpackung/ Stück	Small	34 - 36	79658-00006-00
		Medium	37 - 38,5	79658-00005-00
		Large	39 - 41	79659-00003-00
		Extra Large	≥ 42	79660-00002-00

Arion Magnide	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze. Verfügt über eine magnetische Schließung, die die Handhabung vereinfacht.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	≤ 38	79571-00019-00
		Large	39 - 43	79571-00020-00
		Extra Large	≥ 44	79571-00021-00

Arion Easy-Off	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze. Besonders robust und einfach zu handhaben.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	38 - 41	79570-00003-00
		Large	42 - 45	79570-00004-00

Arion Sim-Slide	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit offener Fußspitze. Eine zweite Materialschicht auf der Innenseite erleichtert die Anwendung.				
	Einzelverpackung/ Stück	Small	≤ 34 - 36	70633-00005-00
		Medium	37 - 38,5	70633-00006-00
		Large	39 - 41	70633-00007-00
		Extra Large	≥ 42	70633-00008-00

Arion Magnide 2in1	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Spitze. Durch den Klettverschluss kann sie leicht fixiert werden.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	≤ 38	79571-00024-00
		Large	39 - 43	79571-00025-00
		Extra Large	≥ 44	79571-00026-00

Arion SlideX	Ausführung/ Einheit	Größe	Knöchelumfang	Bestellnummer
Zusätzliche An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe. Die SlideX kann in Kombination mit allen Arion An- und Ausziehhilfen angewendet werden.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	≤ 40 cm	79571-00022-00
		Large	≤ 60 cm	79571-00023-00
		Extra Large	≤ 100 cm	79571-00027-00

Arion Easy-Slide Arm	Ausführung/ Einheit	Größe	Länge	Bestellnummer
Anziehhilfe für medizinische Armstrümpfe. Das glatte Material sorgt für einen ausgesprochen geringen Reibungswiderstand.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	59 - 67 cm	79661-00004-00
		Large	> 67 cm	75100-00002-00





SERVICEPRODUKTE

Dekorationshilfen und Anmesshilfen


Für Poster und Stoffbanner kontaktieren Sie bitte Ihren JOBST Außendienst.


Dekorationshilfen

JOBST AD-Dekobein	Ausführung	Einheit	Bestellnummer
 <p>Dekobein zum Präsentieren von Kniestrümpfen</p>	Einzelverpackung	Stück	16926-00102-01

JOBST AG-Dekobein	Ausführung	Einheit	Bestellnummer
 <p>Dekobein zum Präsentieren von Oberschenkelstrümpfen inkl. Ständer</p>	Einzelverpackung	Stück	16924-00208-01

Anmesshilfen

JOBST Klapp-Maßbrett	Ausführung	Einheit	Bestellnummer
 <p>Das Maßbrett für den mobilen Einsatz</p>	Einzelverpackung	Stück	16926-00125-00

JOBST Mobiles Maßbrett	Ausführung	Einheit	Bestellnummer
 <p>Das handliche Maßbrett - jederzeit einsatzbereit</p>	Einzelverpackung	Stück	16926-00101-00



HAUTPFLEGE-PRODUKTE

Unsere Qualitätsprodukte für ein gutes Hautgefühl.

Hautpflege ist eine wichtige Säule in der Therapie. Die Kompressionsbekleidung kann die Haut zusätzlich belasten, denn insbesondere bei Lymphödemen verändert sich auch die Haut durch die Erkrankung. Mit Qualitätsprodukten von Essity können Ihre Patienten die natürliche Barrierefunktion der Haut schützen.

Medizinische Hautpflege mit Urea

Cutimed ACUTE Hautpflegeschaum mit Urea	Produkt	Einheit	Bestellnummer	
Cutimed® ACUTE eignet sich als Spezialpflege für trockene und stark beanspruchte Haut und kann auch hervorragend als medizinische Hautpflege bei Kompressionstherapie eingesetzt werden. Cutimed® ACUTE mit einer Ureakonzentration von 5 % und 10 % ist für Diabetiker geeignet.	Schaumcreme mit 5 % Urea	1 Flasche à 125 ml	7264128	
	Schaumcreme mit 10 % Urea	1 Flasche à 125 ml	7264131	

Pflegend reinigend ohne zusätzliches Wasser

TENA Wet Wash Gloves	Produkt	Einheit*	Bestellnummer	
Weiche, mit Reinigungs lotion versehene Waschhandschuhe für die Ganzkörperreinigung. * Innenverpackung	TENA Wet Wash Glove, milder Duft	8 Stk. à 23 x 15 cm	1116	
	TENA Wet Wash Glove, parfümfrei	8 Stk. à 23 x 15 cm	1158	

KOMPRESSION AUF EINEN BLICK



Die JOBST Patientenratgeber, Anmessleitlinie und Seminarkalender können Sie über Ihre*n JOBST Ansprechpartner*in oder den JOBST Customer Service bestellen.

Patientenratgeber Lymphödem und Lipödem



Flachstricksortiment und Kompressionslösungen




ANLEITUNG ZUM ANMESSEN

Phlebologische Kompressionsstrümpfe

Die wichtigste Voraussetzung für den Therapieerfolg ist die Passgenauigkeit der Kompressionsstrümpfe. Das Anmessen darf deshalb nur von entsprechend geschultem Fachpersonal nach festgelegten Kriterien (wie z. B. definierte Messpunkte) durchgeführt werden. Vor dem Anmessen sollte die Extremität weitgehend ödemfrei sein. Bis Messpunkt **F** sollte der Anmessvorgang im Idealfall mit einem Maßbrett an sitzenden oder liegenden Personen vorgenommen werden. Ab Messpunkt **G** sollte das Anmessen dann im Stehen fortgesetzt werden.

Die Messpunkte

Die nachfolgende Grafik zeigt die relevanten Messpunkte beim Anmessen von medizinischen Kompressionsstrümpfen (siehe auch nebenstehende Abbildungen). Je nach Messpunkt wird das Umfangmaß **c (circumference)** und/oder das Längenmaß **l (length)** benötigt. Bitte tragen Sie alle ermittelten Maße bei der Bestellung in das Auftragsformular an der entsprechenden Stelle ein.

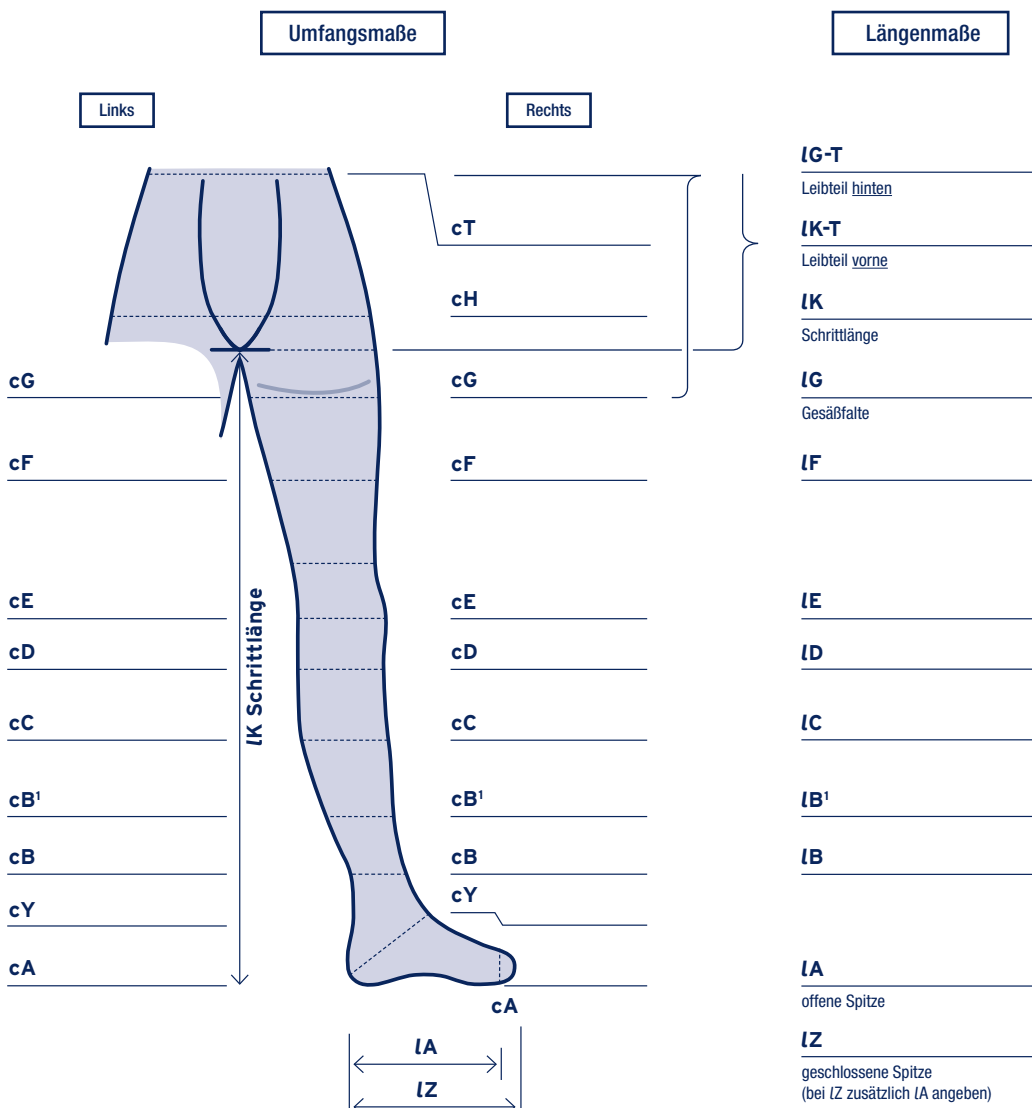

Kompressionsstrümpfe nach Maß



Maßbrett stabil auflegen, Maßband, Kugelschreiber und Maß-Auftragsformular bereithalten; Bein auf das Maßbrett auflegen lassen.



Fußlänge ohne Spitze **IA** vom Zehengrundgelenk bis zum Fersenende. Fußlänge mit Spitze **IZ** von den Zehenspitzen bis zum Fersenende.



Umfangmaß **CA** am Grundgelenk des kleinen Zehs ausmessen.



Umfangmaß **cY** in maximaler Dorsalflexion um Spann und Ferse messen.



Umfang **cB** und das Längenmaß **IB** oberhalb des Knöchels an der schmalsten Stelle des Unterschenkels abmessen.



Umfang **cB'** und das Längenmaß **IB'** am Übergang Achillessehne/Wade messen.



Umfang **cC** und Länge **IC** am größten Umfang der Wade abmessen.



Umfang **cD** und Länge **ID** beim Fibulaköpfchen (zwei Finger breit unter der Kniescheibe) messen.



Längenmaß **IE** bis Mitte Kniekehle in gestreckter Beinhaltung messen.



Umfang **cE** ist der Knieumfang; Mitte der Patella messen; das Bein dabei leicht anwinkeln.



Umfang **cF** und Längenmaß **IF** werden in der Mitte des Oberschenkels genommen.




Umfang **cG** und Längenmaß **IG** werden in stehender Position am größten Umfang des Oberschenkels gemessen.


Kompressionsstrumpfhosen




Schrittlänge (**IK**) messen.

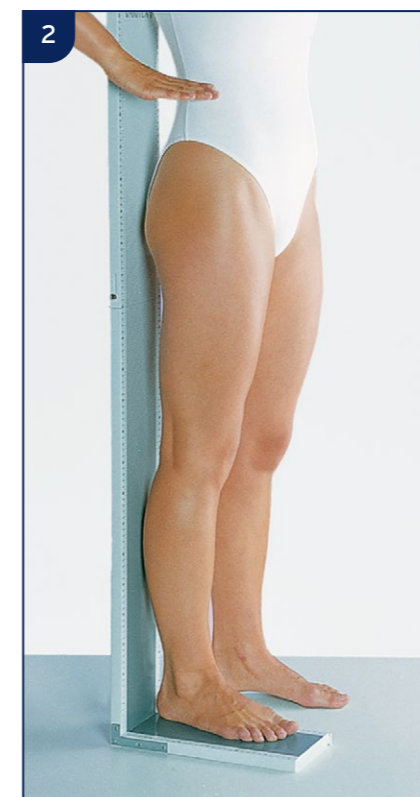


Länge **IT** außen bis zum Hosenende messen, am Maßbrett direkt ablesen.

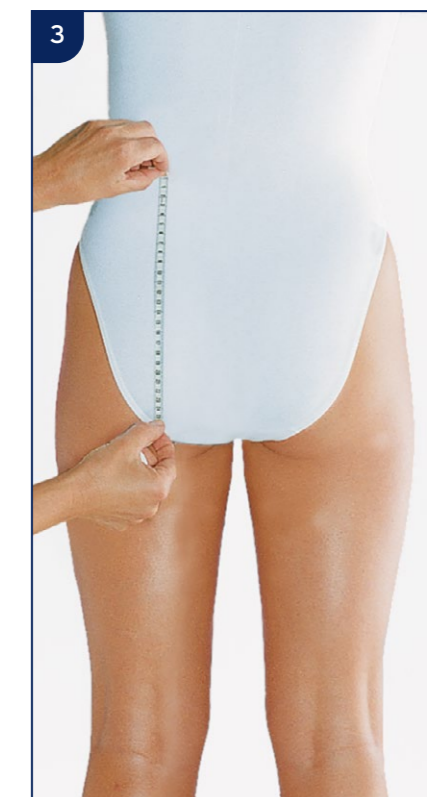

Länge Leibteil hinten vom Hosenende über den Po bis zur Pofalte messen.

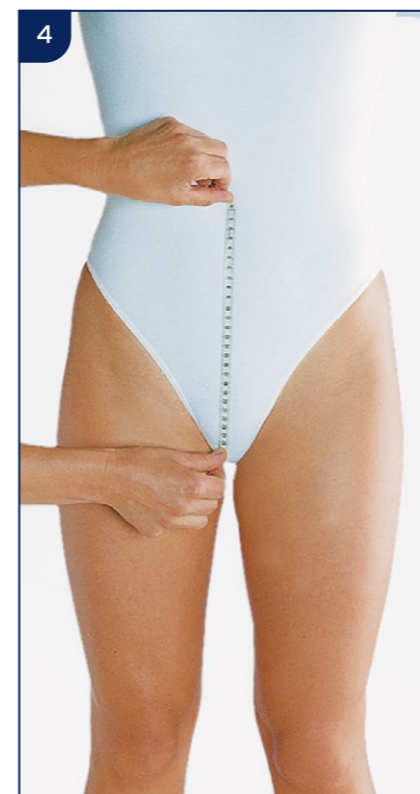

Länge Leibteil vorne vom Hosenende bis zum Schritt messen.

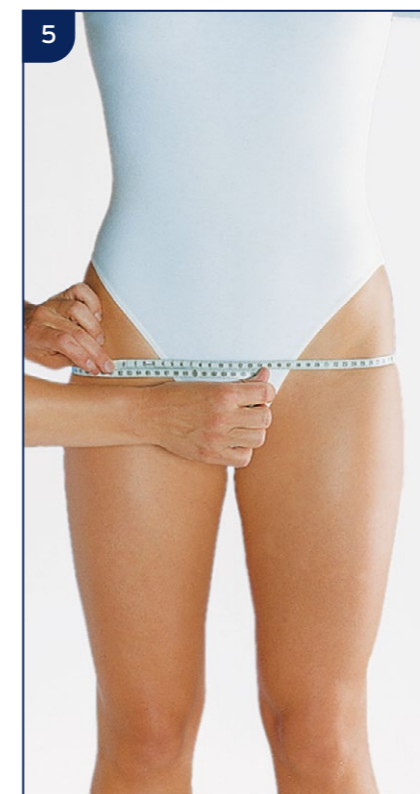

Umfang **cH** wird in Höhe des größten Po-Umfangs gemessen.



Umfang **cT** wird am Hosenende gemessen.

ANLEITUNG ZUM ANMESSEN

- Kompressionsstrümpfe nach Maß
- Kompressionsstrumpfhosen



PHLEBOLOGIE- SORTIMENT

Stand: November 2025

250002558 AT | 10/2025