

Catalogue de physiothérapie et de gestion des fractures



Essity – Le plâtre, nous le connaissons bien

En cas de traumatisme orthopédique, des soins optimaux sont essentiels à la meilleure guérison possible. Lorsqu'il s'agit d'os fracturés ou de blessures aux ligaments, Delta-Cast®, AquaCast® et Actimove® sont des partenaires de confiance. En tant que leader du marché mondial de gestion des fractures et s'appuyant sur un solide héritage de marques, Essity dispose d'un portefeuille complet et innovant sur lequel compter.

Les marques Delta-Cast, AquaCast et Actimove sont fières de soutenir ses clients par le biais du service et de la formation, en leur fournissant les connaissances et les outils nécessaires pour relever tous les défis liés au plâtre qui se présentent à eux.

LA VASTE GAMME DE SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES DE ESSITY COMPREND :

Attelle – Facile à manipuler et extrêmement polyvalent, ce système d'attelles comble les exigences des utilisateurs modernes.

Plâtre de Paris – Des plâtres bien ajustés, solides et durables pour une application traditionnelle.

Bande d'immobilisation – Conçue avec un souci pour la facilité d'application et le confort du patient.

Ouate et jersey orthopédiques – Les protections sous plâtre naturelles et synthétiques maximisent le confort du patient pendant le traitement par plâtre.

Retrait de plâtre – Des scies durables qui offrent une performance de coupe élevée avec des niveaux de bruit et de vibration faibles.

Accessoires de plâtre – Une grande variété d'accessoires, comme des ciseaux, des écarteurs, un coussinage adhésif supplémentaire et des souliers pour plâtre, aident les techniciens et les patients.

Appareils orthopédiques – Tiennent compte du support dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'attelles, d'orthèses ou de bottes orthopédiques.



Gestion des fractures

BANDES D'IMMOBILISATION SYNTHÉTIQUES

Delta-Lite® Plus – Bande d'immobilisation en fibre de verre	5
Delta-Cast® Conformable – Bande d'immobilisation en polyester	6
Delta-Cast® Elite – Bande d'immobilisation en polyester	7
Delta-Cast® Prints – Bande d'immobilisation imprimée en polyester	8
Delta-Cast® Soft – Bande d'immobilisation semi-rigide en polyester	9

ATTELLES SYNTHÉTIQUES

Dynacast® Prelude – Système d'attelle en fibre de verre	10
Delta-Cast® Prelude – Système d'attelle en polyester	11

PLÂTRE DE PARIS

Gypsona® – Bande et attelle en plâtre de Paris	12
Gypsona® Roll – Système d'attelle en plâtre de Paris	12

PROTECTIONS SOUS PLÂTRE

Delta Terry-Net ^{MC} S – Jersey orthopédique en ratine synthétique	13
Delta-Net® / Protouch® – Jersey orthopédique en ratine synthétique	14
Protouch® – Jersey orthopédique en coton	14
Doublure Aquacast®	15
Bandes Saw Stop® DE-FLEX ^{MC} par Aquacast®	16
Doublure Hipster® Pantaloon par Aquacast®	17
Delta-Dry® – Protection sous plâtre hydrofuge	18
Delta-Dry® Pantaloon	19
Specialist® 100 / Specialist® 100 Sterile – Ouate orthopédique en coton	20
Sof-Rol® / Sof-Rol® Sterile – Ouate orthopédique naturelle	20
Soffban® Synthetic – Ouate orthopédique	21
Delta-Rol® – Ouate orthopédique synthétique	21

ACCESSOIRES

Delta Terry-Net ^{MC} – Doublure adhésive pour contour de plâtre	22
Delta Terry-Net ^{MC} – Coussinage adhésif en feutre	22
Delta Terry-Net ^{MC} – Coussinage adhésif en mousse/ratine	23
Delta Terry-Net ^{MC} – Système d'attaches à velcro	23
Scie à plâtre	24
Aspirateurs à poussière de plâtre.....	24
Lames pour scie à plâtre.....	25
Zip Stick.....	25
Delta-Cast® Serene ^{MC}	26
Repose-genou	27
Support à plâtre ajustable	27
Instruments pour plâtre.....	27
Tensoplast® STK – Système de traction cutanée	28
Soulier pour plâtre à semelle recourbée Actimove®	28

Gestion des fractures (suite)

SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES

Bottes Actimove® Standard Walker et Standard Air Walker	29
Botte rigide Actimove® Air Walker	30
Actimove® Sling – Support pour membres supérieurs	31

Physiothérapie - Bandages et rubans

RUBANS DE CONTENTION

Strappal® – Ruban de contention de qualité supérieure	33
Leukotape® P – Ruban rigide de contention très adhésif	33
Coach® par Actimove® - Ruban de contention rigide adhésif en tissu poreux.....	34
Zonas® par Actimove® - Ruban de contention rigide adhésif en tissu poreux.....	34

BANDAGES ET RUBANS ÉLASTIQUES ADHÉSIFS

Elastikon® par Actimove® - Ruban adhésif élastique.....	34
Tensoplast® / Tensoplast® LF / Tensosport® – Bandage élastique adhésif robuste	35
Leukotape® K – Ruban élastique adhésif pour le soulagement de la douleur ...	35
Tensoplast® – Ruban élastique adhésif robuste	36
Tensoplast® – Ruban élastique adhésif athlétique	36
Lightplast® Pro – Ruban élastique adhésif léger	37

BANDAGES COHÉSIFS

Co-Plus® LF – Bandage cohésif élastique	37
---	----

BANDAGES ÉLASTIQUES NON-ADHÉSIFS

Elastocrepe® – Bandage élastique non-adhésif	38
--	----

BANDAGES TUBULAIRES

Tensogrip® – Bandage tubulaire élastique de soutien	38
---	----

Delta-Lite® Plus

Bande d'immobilisation en fibre de verre

Delta-Lite® Plus forme un plâtre extrêmement rigide avec des surfaces et des rebords doux. Le système de résine avancé qui s'active à l'eau procure des propriétés non collantes qui facilitent l'activation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Surface douce
- Support rigide
- Bonne conformabilité
- Excellente lamination
- Temps de travail et de prise constants et fiables
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,5 cm x 1,8 m	Blanc	7345800	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Blanc	7345801	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Blanc	7345802	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Blanc	7345803	10 rouleaux	Boîte
12,5 cm x 3,6 m	Blanc	7345804	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7345820	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7345821	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7345822	10 rouleaux	Boîte
12,5 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7345823	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Vert	7345825	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Vert	7345826	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Vert	7345827	10 rouleaux	Boîte
12,5 cm x 3,6 m	Vert	7345828	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Rouge	7345830	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Rouge	7345831	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Rouge	7345832	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Bleu pâle	7345835	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Bleu pâle	7345836	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Bleu pâle	7345837	10 rouleaux	Boîte
12,5 cm x 3,6 m	Bleu pâle	7345838	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Noir	7345845	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Noir	7345846	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Noir	7345847	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Assorties*	7345850	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Assorties*	7345851	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Assorties*	7345852	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Rose	7345855	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Rose	7345856	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Rose	7345857	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Mauve	7345860	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Mauve	7345861	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Mauve	7345862	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Jaune	7345865	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Jaune	7345866	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Jaune	7345867	10 rouleaux	Boîte

Attelles de renforcement

5 cm x 20 cm	Blanc	7348500	10 attelles	Boîte
7,5 cm x 20 cm	Blanc	7348501	10 attelles	Boîte
7,5 cm x 38 cm	Blanc	7227200	10 attelles	Boîte
10 cm x 38 cm	Blanc	7348503	10 attelles	Boîte
7,5 cm x 76 cm	Blanc	7348502	10 attelles	Boîte
10 cm x 90 cm	Blanc	7227201	10 attelles	Boîte
12,5 cm x 90 cm	Blanc	7348504	10 attelles	Boîte

* Couleurs assorties : bleu foncé, rouge, bleu pâle, mauve et rose

Delta-Cast® Conformable

Bande d'immobilisation en polyester

Delta-Cast® Conformable est une bande d'immobilisation sans fibre de verre facile à utiliser, légère et robuste avec une conformabilité élevée. Ce produit est idéal lorsque l'adaptabilité au membre du patient et le confort sont critiques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conformabilité élevée
- Surface lisse et rebords doux
- Immobilisation rigide
- Radiotransparence élevée
- Excellente lamination entre les couches
- Excellente pour la thérapie fonctionnelle avec plâtre ou les plâtres amovibles
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,5 cm x 1,8 m	Blanc	7228000	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Blanc	7228001	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Blanc	7228002	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Blanc	7228003	10 rouleaux	Boîte
12,5 cm x 3,6 m	Blanc	7228004	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7228200	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7228201	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7228202	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Vert	7228700	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Vert	7228701	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Vert	7228702	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Rouge	7228500	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Rouge	7228501	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Rouge	7228502	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Noir	7228800	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Noir	7228801	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Noir	7228802	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Assorties*	7228910	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Assorties*	7228911	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Assorties*	7228912	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Rose	7228100	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Rose	7228101	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Rose	7228102	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Mauve	7228600	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Mauve	7228601	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Mauve	7228602	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Jaune	7228300	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Jaune	7228301	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Jaune	7228302	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Orange	7228400	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Orange	7228401	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Orange	7228402	10 rouleaux	Boîte

* Couleurs assorties : bleu foncé, rouge, noir, mauve et rose

Delta-Cast® Elite

Bande d'immobilisation en polyester

Delta-Cast® Elite est un plâtre en polyester qui offre solidité et durabilité. Il est fait d'un fil extensible offrant des capacités de moulage supérieures et procure une surface douce pour le confort du patient.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Surface lisse et rebords doux
- Immobilisation rigide
- Radiotransparence élevée
- Conformabilité élevée
- Excellente lamination entre les couches
- Excellente solution de rechange pour la bande d'immobilisation en fibre de verre
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,5 cm x 1,8 m	Blanc	7227904	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Blanc	7227900	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Blanc	7227901	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Blanc	7227902	10 rouleaux	Boîte
12,5 cm x 3,6 m	Blanc	7227903	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7227600	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7227601	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7227602	10 rouleaux	Boîte
12,5 cm x 3,6 m	Bleu foncé	7227603	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Vert	7345400	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Vert	7345401	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Vert	7345402	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Rouge	7227500	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Rouge	7227501	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Rouge	7227502	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Bleu pâle	7345300	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Bleu pâle	7345301	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Bleu pâle	7345302	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Noir	7227800	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Noir	7227801	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Noir	7227802	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Assorties*	7345700	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Assorties*	7345701	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Assorties*	7345702	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Rose	7345500	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Rose	7345501	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Rose	7345502	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Mauve	7227700	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Mauve	7227701	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Mauve	7227702	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Orange	7345600	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Orange	7345601	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Orange	7345602	10 rouleaux	Boîte

Attelles de renforcement 3 épaisseurs

5 cm x 20 cm	Blanc	7454507	10 attelles	Boîte
7,5 cm x 20 cm	Blanc	7454508	10 attelles	Boîte
7,5 cm x 38 cm	Blanc	7454509	10 attelles	Boîte

Attelles de renforcement 5 épaisseurs

10 cm x 38 cm	Blanc	7454503	10 attelles	Boîte
10 cm x 90 cm	Blanc	7454504	10 attelles	Boîte
12,5 cm x 90 cm	Blanc	7454505	10 attelles	Boîte

*Couleurs assorties : bleu foncé, rouge, bleu pâle, mauve et rose

Delta-Cast® Prints

Bande d'immobilisation imprimée en polyester

Ajoutez de la personnalité aux plâtres, grâce à ces plâtres imprimés colorés. En plus de réduire l'anxiété éprouvée par le patient et de rendre le port du plâtre plus agréable, Delta-Cast® Prints offre une immobilisation robuste et légère. Les motifs imprimés sont inaltérables et radiotransparents.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mêmes avantages que Delta-Cast® Elite
- Style unique
- Motifs de longue durée
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 3,6 m	Pastel	7227317	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Pastel	7227307	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Oursons	7227305	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Dinosaures	7227302	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Ballons de soccer	7227308	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Ballons de soccer	7227309	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Camouflage	7227322	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Camouflage	7227306	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Pattes d'animal	7227320	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Pattes d'animal	7227321	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Camouflage rose	7227340	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Camouflage rose	7227341	10 rouleaux	Boîte



Delta-Cast® Soft

Bande d'immobilisation semi-rigide en polyester

Delta-Cast® Soft est une bande d'immobilisation semi-rigide en polyester qui permet une plus grande amplitude de mouvement et un retour plus rapide à la mobilité pour éviter certains problèmes découlant d'une immobilisation stricte, comme l'atrophie musculaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Surface lisse et rebords doux
- Radiotransparence élevée
- Procure le soutien nécessaire tout en permettant une mobilité réduite et contrôlée
- Peut être retiré avec des ciseaux ou par simple déroulage
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,5 cm x 1,8 m	Blanc	7270802	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Blanc	7270812	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Blanc	7270822	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Blanc	7270832	10 rouleaux	Boîte
12,5 cm x 3,6 m	Blanc	7270842	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Bleu	7270805	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Bleu	7270815	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Bleu	7270825	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Rouge	7270808	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Rouge	7270818	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Rouge	7270828	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Noir	7270801	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Noir	7270811	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 3,6 m	Noir	7270821	10 rouleaux	Boîte
5 cm x 3,6 m	Pattes d'animal	7270809	10 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	Pattes d'animal	7270819	10 rouleaux	Boîte



Dynacast® Prelude

Système d'attelle en fibre de verre

Dynacast® Prelude est un système d'attelle économique pour tous les besoins en immobilisation. Son rembourrage intégré s'étire facilement pour couvrir tous les rebords, et son format en rouleau élimine tout gaspillage.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Application possible des deux côtés
- Minimum d'eau nécessaire pour l'activation
- Rembourrage facile à étirer pour couvrir tous les rebords
- Peut être ouvert pour le découpage, le renforcement et un ajustement parfait
- Technologie monocouche à fibres entrecroisées
- Grandeurs additionnelles 2,5 cm et 15 cm
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
En rouleau				
2,5 cm x 4,6 m	7141800	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
5 cm x 4,6 m	7142000	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
7,5 cm x 4,6 m	7142100	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
10 cm x 4,6 m	7141500	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
12,5 cm x 4,6 m	7141600	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
15 cm x 4,6 m	7141700	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
Format pré-coupé				
7,5 cm x 30 cm	4722200	5 attelles	-	Boîte
7,5 cm x 40 cm	4722300	5 attelles	-	Boîte
10 cm x 30 cm	4722400	5 attelles	-	Boîte
10 cm x 40 cm	4722500	5 attelles	-	Boîte
10 cm x 76 cm	4722600	4 attelles	-	Boîte
12,5 cm x 65 cm	4722700	4 attelles	-	Boîte
12,5 cm x 76 cm	4723500	4 attelles	-	Boîte
Dynacast® Prelude Solo - Format pré-coupé sans rembourrage				
5 cm x 25 cm	7296300	10 attelles	-	Boîte
7,5 cm x 30 cm	7296301	10 attelles	-	Boîte
7,5 cm x 87 cm	7296302	10 attelles	-	Boîte
10 cm x 38 cm	7296303	10 attelles	-	Boîte
10 cm x 75 cm	7296304	10 attelles	-	Boîte
12,5 cm x 75 cm	7296305	10 attelles	-	Boîte
15 cm x 30 cm	7296306	10 attelles	-	Boîte



SUGGESTION

- Les bandages cohésifs Co-Plus® LF ou Easifix® Cohesive sont parfaits pour maintenir en place les attelles Dynacast® Prelude et réduire le risque de glissement.





Delta-Cast® Prelude

Système d'attelle en polyester

Delta-Cast® Prelude est un système d'attelle synthétique avec substrat en polyester. En plus de présenter tous les avantages exceptionnels de Dynacast® Prelude, Delta-Cast® Prelude offre un rembourrage extrêmement confortable qui permet à la peau de mieux respirer, ainsi que des rebords doux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ouate orthopédique hydrofuge extrêmement confortable avec structure en 3D permettant à la peau de mieux respirer
- Rembourrage à séchage rapide réduisant le risque de macération
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,5 cm x 4,6 m	7301801	1 rouleau	Boîte
5 cm x 4,6 m	7301802	1 rouleau	Boîte
7,5 cm x 4,6 m	7301803	1 rouleau	Boîte
10 cm x 4,6 m	7301804	1 rouleau	Boîte
12,5 cm x 4,6 m	7301805	1 rouleau	Boîte



Gypsona®

Bandes et attelles en plâtre de Paris

La texture crémeuse et riche de Gypsona® permet un moulage rapproché et crée un plâtre au fini lisse et attrayant, ce qui fait de Gypsona® la marque numéro un au monde.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tricot de gaze pour stabilité supérieure
- Texture crémeuse
- Perte minimale de plâtre
- Cœur de plastique
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Gypsona® Roll

Système d'attelle en plâtre de Paris

Sa composition en mousse et flanelle de coton, combinée à un plâtre à prise extrêmement rapide, fait de Gypsona® Roll le choix des cliniciens pour les applications d'attelle économiques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système d'attelle tout en un
- Prise extrêmement rapide
- Facile à couper pour un ajustement sur mesure
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
Bandes - Prise extrêmement rapide / 2 minutes				
5 cm x 2,7 m	LPL23	24 rouleaux	3 boîtes	Caisse
7,5 cm x 2,7 m	LPL33	12 rouleaux	6 boîtes	Caisse
10 cm x 2,7 m	LPL43	12 rouleaux	6 boîtes	Caisse
15 cm x 2,7 m	LPL63	12 rouleaux	6 boîtes	Caisse
20 cm x 2,7 m	LPL83	12 rouleaux	4 boîtes	Caisse
10 cm x 4,5 m	LPL45	12 rouleaux	6 boîtes	Caisse
15 cm x 4,5 m	LPL65	12 rouleaux	4 boîtes	Caisse
20 cm x 4,5 m	LPL85	12 rouleaux	4 boîtes	Caisse
90 cm x 5,4 m	7198737	3 rouleaux	-	Caisse
Attelles - Prise extrêmement rapide / 2 minutes				
7,5 cm x 75 cm	L5330	50 attelles	6 boîtes	Caisse
10 cm x 75 cm	L5430	50 attelles	6 boîtes	Caisse
12,5 cm x 75 cm	L5530	50 attelles	6 boîtes	Caisse
5 épaisseurs - 10 cm x 18 m	LP542	1 attelle pliée	-	Boîte
5 épaisseurs - 15 cm x 18 m	LP562	1 attelle pliée	-	Boîte



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
10 couches			
7,5 cm x 7,3 m	5702	1 rouleau	Boîte
10 cm x 7,3 m	5703	1 rouleau	Boîte
12,5 cm x 7,3 m	5704	1 rouleau	Boîte
15 couches			
10 cm x 7,3 m	5751	1 rouleau	Boîte
12,5 cm x 7,3 m	5752	1 rouleau	Boîte
15 cm x 7,3 m	5753	1 rouleau	Boîte

Delta Terry-Net^{MC} S

Jersey orthopédique en ratine synthétique

Le jersey orthopédique en ratine Delta Terry-Net^{MC} S est fait de fibres synthétiques perméables à l'air pour aider à éviter la macération cutanée. Le tissu éponge est conçu pour offrir un coussinage supplémentaire et s'étire jusqu'à trois fois sa largeur normale pour s'ajuster aux anatomies complexes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fibres synthétiques douces
- S'étire jusqu'à trois fois sa largeur normale
- Disponible en format pré-coupé avec doublure de pouce incorporée
- Boîte distributrice
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
En rouleau				
5 cm x 13,5 m	7230600	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
7,5 cm x 13,5 m	7230601	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
10 cm x 13,5 m	7230602	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
12,5 cm x 13,5 m	7230603	1 rouleau	-	Boîte
15 cm x 13,5 m	7230604	1 rouleau	-	Boîte
Format pré-coupé				
5 cm x 41 cm - Court	7230802	10 jerseys	-	Boîte
7,5 cm x 41 cm - Court	7230800	10 jerseys	-	Boîte
5 cm x 48 cm - Long	7230803	10 jerseys	-	Boîte
7,5 cm x 48 cm - Long	7230801	10 jerseys	-	Boîte



Delta-Net® / Protouch®

Jersey orthopédique synthétique

Les jerseys orthopédiques synthétiques Delta-Net® et Protouch® s'étirent jusqu'à plus de deux fois leur largeur pour s'ajuster confortablement aux anatomies les plus complexes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fibres synthétiques
- Bonne conformabilité
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
Delta-Net®					
5 cm x 22,75 m	Blanc	7230700	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
7,5 cm x 22,75 m	Blanc	7230701	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
10 cm x 22,75 m	Blanc	7230702	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
15 cm x 22,75 m	Blanc	7230703	1 rouleau	-	Boîte
20 cm x 22,75 m	Blanc	7230704	1 rouleau	-	Boîte
2,5 cm x 22,75 m	Noir	7272300	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
5 cm x 22,75 m	Noir	7272301	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
7,5 cm x 22,75 m	Noir	7272302	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
10 cm x 22,75 m	Noir	7272303	1 rouleau	2 boîtes	Caisse
15 cm x 22,75 m	Noir	7272304	1 rouleau	-	Boîte
Protouch®					
2,5 cm x 22,75 m	Blanc	301001	1 rouleau	-	Boîte
5 cm x 22,75 m	Blanc	301002	1 rouleau	-	Boîte
7,5 cm x 22,75 m	Blanc	301003	1 rouleau	-	Boîte
10 cm x 22,75 m	Blanc	301004	1 rouleau	-	Boîte
15 cm x 22,75 m	Blanc	301006	1 rouleau	-	Boîte
20 cm x 22,75 m	Blanc	301008	1 rouleau	-	Boîte



Protouch®


Jersey orthopédique en coton

Le jersey orthopédique en coton Protouch® est conçu pour protéger la peau du patient sous le plâtre de Paris et les matériaux synthétiques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coton de qualité supérieure
- Bonne conformabilité
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,5 cm x 22,75 m	307001	1 rouleau	Boîte
5 cm x 22,75 m	307002	1 rouleau	Boîte
7,5 cm x 22,75 m	307003	1 rouleau	Boîte
10 cm x 22,75 m	307004	1 rouleau	Boîte
15 cm x 22,75 m	307006	1 rouleau	Boîte
20 cm x 22,75 m	307008	1 rouleau	Boîte

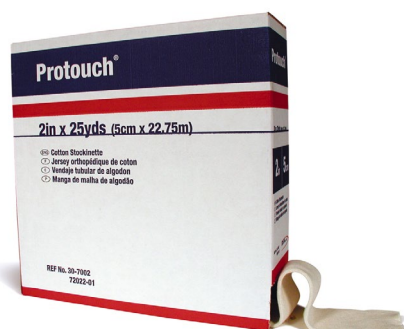

Doublure AquaCast®

Doublure imperméable pour plâtre

La **doublure AquaCast®** est une doublure confortable, imperméable et respirante pour plâtre qui est utilisée sous les matériaux pour plâtre imperméable.

La **doublure préformée AquaCast®** offre une doublure en une pièce imperméable et unique pour plâtre court du bras. Les deux produits sont perméables à la vapeur d'eau et sont faits avec des coussinets et des canaux qui favorisent le confort et facilitent le drainage.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Séchage rapide du plâtre qui permet au patient de prendre un bain, de nager et de faire de l'exercice
- Diminue les odeurs et favorise l'hygiène grâce à la capacité de laver à fond et de rincer la peau
- État cutané favorable après le retrait du plâtre
- Moins de démangeaisons en raison de la surface lisse du matériau
- Moins de plâtres à refaire en raison de plâtre mouillé ou endommagé
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Table des matières

Description / Taille	Code	Unité de vente
Doublures Aquacast®		
5 cm x 1,6 m	7336510	12 rouleaux / boîte
7,5 cm x 1,6 m	7336511	12 rouleaux / boîte
10 cm x 1,6 m	7336512	12 rouleaux / boîte
15 cm x 1,6 m	7336513	6 rouleaux / boîte
Doublures préformées Aquacast®		
Doublure préformée - Petit	7336520	4 unités / sac
Doublure préformée - Moyen	7336521	4 unités / sac
Doublure préformée - Grand	7336522	4 unités / sac

DOUBLURE
AquaCast®



SAW STOP® DE-FLEX^{MC}

Bandes protectrices par AquaCast®

Les bandes protectrices Saw Stop® DE-FLEX^{MC} sont des rubans imperméables, robustes et flexibles qui procurent une couche de protection supplémentaire contre la scie. Ces bandes sont offertes en deux styles, et mesurent 3 cm (1¼ po) de largeur par 3 m (10 pi) de long dans les deux cas. Ces produits à endos adhésif sont faciles à appliquer.

Bandes protectrices Saw Stop DE-FLEX bleues :

ce matériau exclusif bleu est utilisé lorsque le technicien croit nécessaire d'ajouter une couche de protection. Le matériau est conçu pour fonctionner avec tout matériau de coussinage.

Bandes protectrices Saw Stop DE-FLEX blanches :

ce matériau procure toute la protection de notre bande protectrice Saw Stop DE-FLEX bleue, mais il est plus mince, plus conforme, plus durable et sèche plus rapidement. Il devrait être utilisé dans les applications les plus exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Endos adhésif facile à appliquer
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Description	Couleur	Code	Unité de vente
Bandes protectrices AquaCast® DE-FLEX			
3,175 cm x 3,05 m	Bleu	7336570	1 / boîte
3,175 cm x 3,05 m	Bleu	7336571	3 / boîte
3,175 cm x 3,05 m	Bleu	7336572	10 / boîte
3,175 cm x 3,05 m	Blanc	7336575	1 / boîte
3,175 cm x 3,05 m	Blanc	7336576	3 / boîte
3,175 cm x 3,05 m	Blanc	7336577	10 / boîte
Aquacast® Saw Stop DE-FLEX Zip Stick			
Régulier	-	7336371	1 / boîte
Mini	-	7336372	1 / boîte



Doublure Hipster® Pantaloon®

Protection sous plâtre hydrofuge


La doublure Hipster® Pantaloon® par Aquacast® est une doublure imperméable et respirante pour spica à la hanche. Son concept de produit innovateur comprend un matériau supplémentaire dans la région périnéale pour permettre de former un manchon. Les jambes obliques permettent un meilleur ajustement et moins d'entassement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le concept en une pièce crée une barrière qui protège la doublure des souillures
- La surface imperméable facilite le nettoyage d'excréments et d'urine sur la peau
- La respirabilité garde la peau au sec en permettant à l'eau, à l'humidité et à la transpiration de s'évaporer
- Avec l'ajout de la doublure AquaCast®, le plâtre entier peut devenir imperméable, améliorant davantage l'expérience de l'utilisateur

Taille	Code	Âge (mois)	Unité de vente
Pédiatrique 2 (taille ≤ 45,7 cm)	7336550	0-9	Simple 1/bte
Pédiatrique 4 (taille ≤ 55,8 cm)	7336551	6-24	Simple 1/bte
Pédiatrique 6 (taille ≤ 76,2 cm)	7336552	18-36	Simple 1/bte
Pédiatrique 8 (taille ≤ 86,3 cm)	7336553	> 36	Simple 1/bte
Adulte 20	7336555	-	Simple 1/bte
Adulte 24	7336556	-	Simple 1/bte
Adulte 30	7336557	-	Simple 1/bte
Pédiatrique 2 (taille ≤ 45,7 cm)	7336560	0-9	Double 2/bte
Pédiatrique 4 (taille ≤ 55,8 cm)	7336561	6-24	Double 2/bte
Pédiatrique 6 (taille ≤ 76,2 cm)	7336562	18-36	Double 2/bte
Pédiatrique 8 (taille ≤ 86,3 cm)	7336563	> 36	Double 2/bte
Adulte 20	7336565	-	Double 2/bte
Adulte 24	7336566	-	Double 2/bte
Adulte 30	7336567	-	Double 2/bte

HIPSTER®
Pantaloon^{MC}
 Doublure par **AquaCast®**

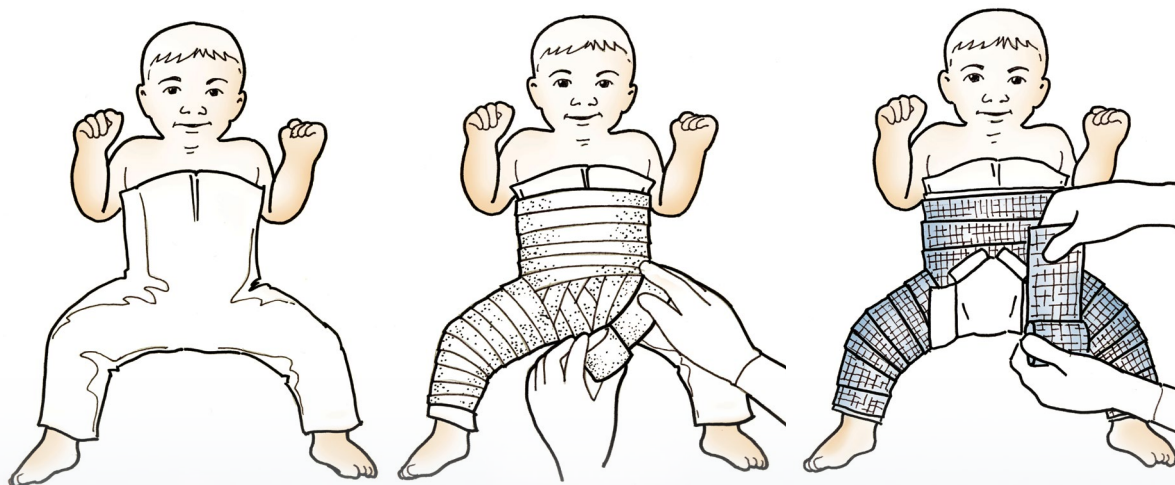

Delta-Dry®

Protection sous plâtre hydrofuge

Le matériau breveté de Delta-Dry® résiste à l'eau. La structure des fibres à tricot ouvert accélère le drainage après avoir été submergée. La température du corps évapore ensuite l'humidité résiduelle rapidement par les mailles aérées (MVTR élevé). De cette manière, le plâtre et la peau sèchent rapidement. La personne se sent au sec environ 90 minutes après une routine d'hygiène.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet aux patients de se doucher, de nager et de se laver les mains
- Aide à réduire les odeurs sous le plâtre
- Excellente conformabilité aux contours du corps
- Procure un plâtre confortable qui sèche rapidement
- Application simple et rapide
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Ouate orthopédique			
5 cm x 2,4 m	7344300	12 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 2,4 m	7344301	12 rouleaux	Boîte
10 cm x 2,4 m	7344302	12 rouleaux	Boîte
Delta-Dry® - Jersey orthopédique			
2,5 cm x 10 m	7456400	1 rouleau	Boîte
5 cm x 10 m	7456401	1 rouleau	Boîte
7,5 cm x 10 m	7456402	1 rouleau	Boîte
10 cm x 10 m	7456403	1 rouleau	Boîte
12,5 cm x 10 m	7456404	1 rouleau	Boîte
Delta-Dry® Softliner - Jersey orthopédique coussiné			
2,5 cm x 10 m	7277901	1 rouleau	Boîte
5 cm x 10 m	7277902	1 rouleau	Boîte
7,5 cm x 10 m	7277903	1 rouleau	Boîte
10 cm x 10 m	7277904	1 rouleau	Boîte
12,5 cm x 10 m	7277905	1 rouleau	Boîte



Table des matières

Delta-Dry® Pantaloone

Protection sous plâtre hydrofuge

Cette doublure préformée, douce et hydrofuge a été conçue à partir de la technologie Delta-Dry® éprouvée et brevetée pour simplifier le traitement de la dysplasie développementale de la hanche ou des fractures du fémur. Ses propriétés extensibles permettent une application facile et minimisent les plis, réduisant ainsi le risque de marques de pression.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Disponible en 3 tailles dans une forme pré-coupée
- La résistance à l'eau permet de maintenir l'hygiène du patient¹
- Permet la prise de bain ou de douche et le rinçage
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau - sèche en 90 minutes
- Application facile et ajustement adéquat avec peu de plis
- Doux, flexible et rembourré pour la peau du nourrisson
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Description / Taille	Code	Unité de vente
Taille 1 (cuisse ≤ 25 cm)	7336500	1
Taille 2 (cuisse 25-29,5 cm)	7336501	1
Taille 3 (cuisse ≥ 29,5 cm)	7336502	1



1. Wolff et al., J Pediatr Orthop 1995; 15(3): 386-388.



Specialist® 100 / Specialist® 100 Sterile

Ouate orthopédique en coton

Specialist® 100 offre les caractéristiques recherchées par les utilisateurs de coton; matériau doux à bords amincis et auto-aggloméré pour procurer une surface lisse sous le plâtre. Specialist® 100 se déchire à la main et s'applique facilement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Matériau perméable à l'air pour aider à éviter la macération
- 100 % coton
- Faible peluchage
- Peut se déchirer à la main
- Disponible en version stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Sof-Rol® / Sof-Rol® Sterile

Ouate orthopédique absorbante en rayonne

Sof-Rol® est fait de rayonne hautement absorbante. Ce matériau doux et naturel procure une surface tout confort sous le plâtre synthétique ou classique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Hautement absorbante
- Application facile
- 100 % rayonne de viscose
- Disponible en version stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
Specialist® 100				
5 cm x 3,7 m	7230200	24 rouleaux	6 sacs	Caisse
7,5 cm x 3,7 m	7230201	12 rouleaux	6 sacs	Caisse
10 cm x 3,7 m	7230202	12 rouleaux	6 sacs	Caisse
15 cm x 3,7 m	7230203	6 rouleaux	6 sacs	Caisse
Specialist® 100 Sterile				
5 cm x 3,7 m	7234600	50 rouleaux	-	Boîte
7,5 cm x 3,7 m	7234601	50 rouleaux	-	Boîte
10 cm x 3,7 m	7234602	25 rouleaux	-	Boîte
15 cm x 3,7 m	7234603	25 rouleaux	-	Boîte



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
Sof-Rol®				
5 cm x 3,6 m	9052	24 rouleaux	6 sacs	Caisse
7,5 cm x 3,6 m	9033	12 rouleaux	6 sacs	Caisse
10 cm x 3,6 m	9034	12 rouleaux	6 sacs	Caisse
15 cm x 3,6 m	9036	6 rouleaux	6 sacs	Caisse
Sof-Rol® Sterile				
5 cm x 3,6 m	7234510	20 rouleaux	-	Boîte
7,5 cm x 3,6 m	7234511	20 rouleaux	-	Boîte
10 cm x 3,6 m	7234512	20 rouleaux	-	Boîte
15 cm x 3,6 m	7234513	20 rouleaux	-	Boîte



Soffban® Synthetic

Ouate orthopédique

Soffban® Synthetic est fait d'un matériau synthétique perméable à l'air qui ne retient pas l'humidité contre la peau. Il procure une excellente conformabilité et un rembourrage qui réduit le risque de frottement et de plaie sous le plâtre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à déchirer et à appliquer
- Excellente conformabilité
- Procure un bon rembourrage pour réduire le risque de frottement et de plaies sous le plâtre
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
5 cm x 2,7 m	7146401	12 rouleaux	24 sacs	Caisse
15 cm x 2,7 m	7146501	12 rouleaux	8 sacs	Caisse
7,5 cm x 2,7 m	7146701	12 rouleaux	16 sacs	Caisse
10 cm x 2,7 m	7148605	12 rouleaux	12 sacs	Caisse

Delta-Rol®

Ouate orthopédique synthétique

La ouate orthopédique Delta-Rol® est faite d'un matériau synthétique perméable à l'air qui attire l'humidité loin de la peau. Sa conformabilité permet de s'ajuster aux parties étroites du corps sans couper ou déchirer.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Étirement conforme
- Faible peluchage
- Fibres synthétiques non absorbantes
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
5 cm x 3,6 m	6882	24 rouleaux	3 sacs	Caisse
7,5 cm x 3,6 m	6883	12 rouleaux	3 sacs	Caisse
10 cm x 3,6 m	6884	12 rouleaux	3 sacs	Caisse
15 cm x 3,6 m	8666	6 rouleaux	3 sacs	Caisse

Delta Terry-Net^{MC}

Doublure adhésive pour contour de plâtre

La doublure adhésive en molleton Delta Terry-Net^{MC} possède des capacités d'étirement uniques qui permettent de recouvrir facilement les coins et contours, assurant ainsi des bords de plâtre lisses. Elle offre aussi un adhésif de qualité supérieure pour une mise en place sûre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Très conformable
- Extensibilité unique
- Adhésif sûr
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
3 cm x 13,5 m	Noir	7229513	1 rouleau	Caisse

Delta Terry-Net^{MC}

Coussinage adhésif en feutre

Le coussinage adhésif en mousse/ratine Delta Terry-Net^{MC} procure au patient une protection et un coussinage accru en alliant une couche de ratine douce fixée à 0,32 cm/1/8 po de mousse. L'endos adhésif en facilite la fixation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Feutre orthopédique doux
- Endos adhésif
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
58 cm x 100 cm	54012	1 feuille	Boîte

Delta Terry-Net^{MC}

Coussinage adhésif en mousse/ratine

Le coussinage adhésif en feutre Delta Terry-Net^{MC} est un feutre orthopédique adhésif utilisé pour ajouter au confort du patient. L'endos adhésif en facilite la fixation. Il peut aussi être utilisé comme coussinage en bordure d'un plâtre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mousse à alvéoles ouvertes
- Endos adhésif
- Coussinage en ratine confortable
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
58 cm x 100 cm	55012	1 feuille	Boîte



Delta Terry-Net^{MC}

Système d'attaches à velcro

Ce système d'attaches à velcro facile à utiliser possède un adhésif de qualité supérieure qui assure une mise en place sûre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Légèrement extensible
- Adhésif de qualité supérieure
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Crochets			
2,5 cm x 9 m	7229500	1 rouleau	Boîte
5 cm x 9 m	7229502	1 rouleau	Boîte
Feutre			
2,5 cm x 13,7 m	7229501	1 rouleau	Boîte
5 cm x 13,7 m	7229503	1 rouleau	Boîte



American Orthopaedic^{MC}

Scie à plâtre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Spécialement conçue pour un usage intensif : l'outil idéal qui allie puissance et endurance
- Lubrification interne pour une durée de vie prolongée
- Interrupteur conçu et placé de façon à éviter qu'il ne se brise l'appareil est échappé
- Prise hexagonale qui permet 4 rotations de lames prolongeant la vie de la lame de 50 % lorsque comparé aux modèles similaires
- Garantie limitée d'un an



Description	Code	Unité de vente
Scie à plâtre 115V HEX D	0295200	1/chaque

American Orthopaedic^{MC}

Aspirateurs pour poussière de plâtre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES - aspirateur pour poussière de plâtre portatif

- Léger et mobile; déplacement facile d'une pièce à l'autre ou d'un patient à l'autre
- Cartouche de filtre amovible jetable unique pour une mise au rebut plus rapide, plus facile et plus propre qu'un sac
- Fonctionnement silencieux pour le confort du patient
- Fonction permettant la mise en fonction simultanée de la scie et de l'aspirateur au contact du plâtre

Description	Code	Unité de vente
Aspirateur portatif 115V noir	0295300	1/chaque
Aspirateur pour poussière de plâtre AM 115V	0295400	1/chaque
Cartouche de filtre jetable American Ortho HEPA pour 0295-300	0295175	1/chaque
Cartouche de filtre HEPA pour 0295-400	0295410	1/chaque



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES - aspirateur pour poussière de plâtre

- Cartouche de filtre amovible jetable unique
- Unité autonome offrant un logement pratique pour les écarteurs à plâtres, les ciseaux, les lames de rechange et les bouchons de rangement pour filtres
- Construction légère et poignée pratique pour faciliter le transport de l'appareil
- Appareil polyvalent qui s'adapte à la plupart des scies à plâtres



Lames de scie à plâtre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'orifice universel permet d'adapter les lames à la plupart des modèles de scies à plâtres populaires, à clavette comme à prise hexagonale
- Les lames à prise hexagonale procurent 6 rotations de lame aux scies pour plâtre à prise hexagonale



1. Lames électropolies



2. Lames enduites de PTFE



3. Lames enduites de nitrure de titane « or »



4. Lames enduites de Dicronite®


Toutes les lames sont fabriquées en acier inoxydable, trempées et fournies avec différents finis pour accroître leur durée de vie.

Numéro	Code	Fini	Prise	Taille	Unité de vente	Utilisation recommandée
1	4183110	Électropolie	Universelle	5 cm	6 / paq.	Plâtre, bois, os
1	4183112	Électropolie	Universelle	6,35 cm	6 / paq.	Plâtre, bois, os
2	4183114	Enduit de PTFE	Universelle	5 cm	1 / chaque	Plâtre, matériaux de plâtre synthétique
2	310265	Enduit de PTFE	Universelle	6,35 cm	1 / chaque	Plâtre, matériaux de plâtre synthétique
3	310168	Nitrure de titane « or »	Universelle	6,35 cm	1 / chaque	Plâtre, synthétiques, composites, plastiques
4	0295225	Dicronite	Universelle	5 cm	1 / chaque	Plâtre, synthétiques, composites, plastiques
4	0295226	Dicronite	Universelle	6,35 cm	1 / chaque	Plâtre, synthétiques, composites, plastiques

Zip Stick

Aide au retrait de plâtre

Cette aide au retrait de plâtre pratique offre une protection additionnelle au patient durant le retrait du plâtre. La règle flexible glisse sous le plâtre et ouvre un chemin délicat pour les ciseaux ou la scie à plâtre. Les mesures standards ou métriques ajoutent à la fonctionnalité.

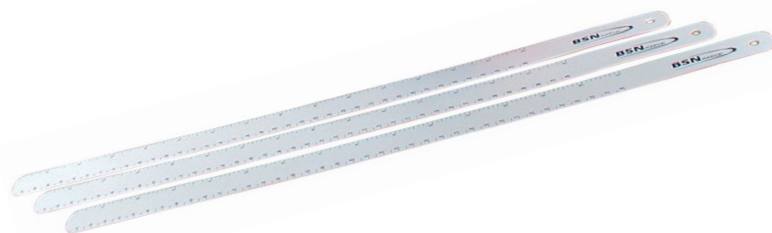

Description	Code	Unité de vente
Zip Stick blanc	7204629	1 / chaque

Delta-Cast® Serene^{MC}

Retrait d'un plâtre

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

Pour vous :

- **Plus propre :** Lame statique qui ne produit aucune particule dans l'air, garde l'air ambiant plus propre sans avoir à utiliser un système d'aspiration
- **Facile à utiliser :** Le poids équilibré de l'instrument repose sur le plâtre, ce qui permet de l'utiliser d'une seule main sans force
- **Plus silencieux :** Minimise le risque d'exposition de longue durée à un bruit fort et permet de travailler dans un milieu de travail moins stressant
- **Efficace :** Coupe facilement et complètement jusqu'à 10 couches de matériau de plâtre synthétique
- **Simple d'entretien :** Durabilité de la lame jusqu'à 200 coupes, lame facile à remplacer et à nettoyer
- **Portatif :** Facile à déplacer d'une salle à une autre, sans dispositif d'aspiration encombrant

Pour vos patients :

- **Plus silencieux :** Moins bruyant que les scies à plâtre traditionnelles, favorise la communication et réduit l'anxiété des patients
- **Utilisation pédiatrique :** Lame dissimulée ne produisant ni vibration ni chaleur, rend l'expérience moins intimidante pour les patients, particulièrement les enfants
- **Sécuritaire :** Fonctionne sans oscillation de la lame et comprend un pied protecteur et une lame cachée, pour aider à atténuer le risque de coupure et de brûlure
- **Plus propre :** Coupe le plâtre sans produire de particules dans l'air, procurant un milieu plus propre pour les patients

Description	Code	Unité de vente
1 trousse Delta-Cast® Serene ^{MC}	7628900	1 instrument 1 lame de rechange 1 bloc d'alimentation
Tige Delta-Cast® Serene ^{MC}	7628905	1 tige
Pied protecteur Delta-Cast® Serene ^{MC}	7628906	1 pied protecteur
Lames de rechange Delta-Cast® Serene ^{MC}	7628907	10 lames
Bloc d'alimentation Delta-Cast® Serene ^{MC}	7628910	1 bloc d'alimentation



Accessoires pour salle de plâtre



Ce solide repose-genou est utilisé pour faciliter le positionnement du membre du patient lors de l'application du plâtre et lui assurer un confort supplémentaire durant le processus. Il est recouvert de vinyle lavable pour un nettoyage facile.

Description	Code	Unité de vente
Repose-genou	7309300	Unité
Support à plâtre ajustable	58050000	Unité


Ce support facilite l'application du plâtre et améliore le confort du patient. La partie verticale peut être élevée ou abaissée de 31,8 à 53,3 cm pour satisfaire le clinicien aussi bien que le patient. Comprend une cuvette de plastique réutilisable pour l'écoulement.



Instruments pour plâtre

Les instruments de retrait de plâtre de Essity sont efficaces pour couper les matériaux d'immobilisation. Ils sont fabriqués à la main, en acier inoxydable de haute qualité, afin de vous offrir une performance de haute précision.

Description	Code	Unité de vente
(A) Écarteur de plâtre médical	7204611	1 / chacun
(B) Ciseaux Fiskars PowerArc	7204658	1 / chacun
(C) Ciseaux Clean Cut	7229402	1 / chacun
(D) Ciseaux dentelés Bohler 235 mm	7293500	1 / chacun
(E) Ciseaux Lister 180 mm	7293200	1 / chacun
(F) Ciseaux Lister 200 mm	7293300	1 / chacun
(G) Petits ciseaux de précision	7293400	1 / chacun

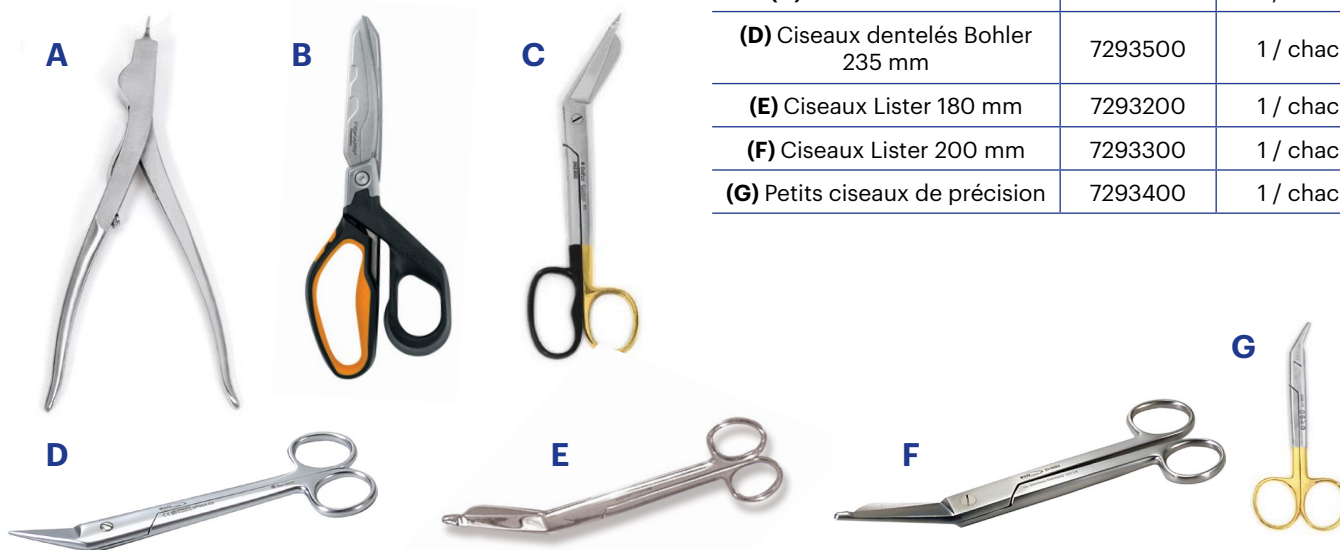

Accessoires de plâtre

Tensoplast® Système de traction cutanée

Système de traction cutanée adhésif appliqué directement sur la peau pour une réduction non invasive des fractures. Simple et efficace, la trousse de traction cutanée Tensoplast® STK est utilisée avec des poids (non compris) et offre une traction des plus fiables. (Exempt de latex de caoutchouc naturel)

Description	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
Système de traction cutanée (adulte)	7154400	1 ensemble	12 boîtes	Caisse
Système de traction cutanée (enfant)	7155400	1 ensemble	12 boîtes	Caisse



Actimove® Soulier pour plâtre à semelle recourbée

La semelle recourbée aide à atténuer la pression et permettre une démarche plus fluide.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les patients peuvent se sentir en sûreté en raison de la semelle antidérapante
- Facile à enfiler et à retirer
- Protège le plâtre de l'eau, la chaussure étant à l'épreuve de l'eau
- Léger
- Convient aux personnes sensibles au latex, produit exempt de latex de caoutchouc naturel
- En terme d'inventaire, se porte au pied gauche ou droit

Description	Dimensions	Couleur	Code	Unité de vente
Soulier pour plâtre à semelle recourbée	Pédiatrique	Noir	6500480	Unité
Soulier pour plâtre à semelle recourbée	Très petit	Noir	6500481	Unité
Soulier pour plâtre à semelle recourbée	Petit	Noir	6500482	Unité
Soulier pour plâtre à semelle recourbée	Moyenne	Noir	6500483	Unité
Soulier pour plâtre à semelle recourbée	Grand	Noir	6500484	Unité
Soulier pour plâtre à semelle recourbée	Très grand	Noir	6500485	Unité



Bottes Actimove® Standard Walker et Standard Air Walker

Botte orthopédique

Standard Walker

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Concept qui stabilise et protège le pied, la cheville et la jambe
- Nouveau concept pour un port plus confortable - au moins 20 % plus légère que les versions précédentes
- Courroies sur la circonférence pour plus de stabilité, semelle qui absorbe les chocs pour minimiser l'impact et accroître le confort
- Semelle courbée pour reproduire une démarche naturelle
- Disponible en cinq tailles et deux hauteurs

Standard Air Walker

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pompe et valve intégrées pour ajuster facilement le niveau de compression souhaité
- Nouveau concept pour un port plus confortable - au moins 20 % plus légère que les versions précédentes
- Concept qui stabilise et protège le pied, la cheville et la jambe
- Courroies sur la circonférence pour plus de stabilité, semelle qui absorbe les chocs pour minimiser l'impact et accroître le confort
- Semelle courbée pour reproduire une démarche naturelle
- Disponible en cinq tailles et deux hauteurs

Grandeur	Pointure - homme	Pointure - femme	Code	Unité de vente
Standard Walker - Courte				
Très petit	< 4,5	< 6	7627050	Unité
Petit	4,5 - 7	6 - 8	7627051	Unité
Moyen	7,5 - 10	8,5 - 11	7627052	Unité
Grand	10,5 - 12,5	11,5 - 13,5	7627053	Unité
Très grand	> 12,5	> 13,5	7627054	Unité
Standard Walker - Haute				
Très petit	< 4,5	< 6	7627055	Unité
Petit	4,5 - 7	6 - 8	7627056	Unité
Moyen	7,5 - 10	8,5 - 11	7627057	Unité
Grand	10,5 - 12,5	11,5 - 13,5	7627058	Unité
Très grand	> 12,5	> 13,5	7627059	Unité
Standard Air Walker - Courte				
Très petit	< 4,5	< 6	7627250	Unité
Petit	4,5 - 7	6 - 8	7627251	Unité
Moyen	7,5 - 10	8,5 - 11	7627252	Unité
Grand	10,5 - 12,5	11,5 - 13,5	7627253	Unité
Très grand	> 12,5	> 13,5	7627254	Unité
Standard Air Walker - Haute				
Très petit	< 4,5	< 6	7627255	Unité
Petit	4,5 - 7	6 - 8	7627256	Unité
Moyen	7,5 - 10	8,5 - 11	7627257	Unité
Grand	10,5 - 12,5	11,5 - 13,5	7627258	Unité
Très grand	> 12,5	> 13,5	7627259	Unité



20 % plus
légère



Botte rigide Actimove® Air Walker

Botte orthopédique rigide Air Walker

Botte rigide et légère avec système de pompe et valve intégré. Conçue pour offrir le plus haut niveau de protection à la jambe, à la cheville et au pied.

Une armature rigide de haute qualité pour un niveau de protection au pied, à la cheville et à la jambe. Des courroies circonférentielles, une semelle qui absorbe les chocs et des matériaux respirants procurent un confort notable au patient. Les produits Actimove® Walker simulent une démarche physiologique qui semble presque naturelle grâce à la semelle berçante qui absorbe les chocs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de pompe et de valve intégré conçu pour ajuster facilement le niveau de compression souhaité
- Pochette d'air intégrée à la doublure moins susceptible aux perforations
- Protège-orteil ajustable procure une protection à cette région spécifique
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Grandeur	Pointure - homme	Pointure - femme	Code	Unité de vente
Botte rigide courte				
Très petit	< 4,5	< 6	7627630	Unité
Petit	4,5 - 7	6 - 8	7627631	Unité
Moyen	7,5 - 10	8,5 - 11	7627632	Unité
Grand	10,5 - 12,5	11,5 - 13,5	7627633	Unité
Très grand	> 12,5	> 13,5	7627634	Unité

Botte rigide haute				
Très petit	< 4,5	< 6	7627635	Unité
Petit	4,5 - 7	6 - 8	7627636	Unité
Moyen	7,5 - 10	8,5 - 11	7627637	Unité
Grand	10,5 - 12,5	11,5 - 13,5	7627638	Unité
Très grand	> 12,5	> 13,5	7627639	Unité

Description	Taille	Code	Couleur	Unité de vente
Accessoire Actimove Walker				
Talon compensée	Universelle	7627796	Noir	Unité



Actimove® Sling

Support polyvalent pour membres supérieurs

Actimove® Sling est un système de support pratique en rouleau pour les membres supérieurs. La combinaison de la courroie avec les attaches en Y offre aux utilisateurs et aux patients un support facile d'ajustement et fiable. Pour un ajustement sur mesure avec un seul produit.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Hautement polyvalent; un produit, plusieurs applications
- Économique; remplace plusieurs produits et tailles
- La mousse résistante à l'étirement garde le bras dans la position désirée
- Les attaches en Y permettent un ajustement facile de la position du bras
- La largeur de courroie demeure constante durant l'utilisation, ce qui réduit la tension et augmente le confort du patient
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Description	Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Rouleau distributeur*	5,5 cm x 12 m	7285918	2 rouleaux	Boîte
Attaches en Y	-	7346600	14 attaches	Boîte

* Comprend 28 attaches en Y





Choisir le bandage ou ruban approprié

RUBANS RIGIDES DE CONTENTION

- Strappal®
- Leukotape® P
- Coach® par Actimove®
- Zonas® par Actimove®

BANDAGES ET RUBANS ÉLASTIQUES ADHÉSIFS

- Tensoplast® / Tensosport®
- Leukotape® K
- Elastikon® par Actimove®

BANDAGES ÉLASTIQUES

- Lightplast® Pro
- Co-Plus® LF
- Elastocrepe®
- Tensogrip®



Strappal®

Ruban de contention de qualité supérieure

Fabriqué d'un tissu de viscose combiné à un adhésif à l'oxyde de zinc, le ruban de contention Strappal® de qualité supérieure procure un soutien pour la stabilisation efficace des articulations.

INDICATIONS

- Support rigide pour articulations ou utilisation pour « strapping »
- Restriction de la mobilité

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Peut se déchirer à la main
- Matériau de renforcement rigide
- Bords frangés
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
1,25 cm x 10 m	7149615	36 rouleaux	Boîte
2,5 cm x 10 m	7148700	36 rouleaux	Boîte
4 cm x 10 m	7149000	24 rouleaux	Boîte
5 cm x 10 m	7149300	18 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 10 m	7149401	6 rouleaux	Boîte



Leukotape® P

Ruban rigide de contention très adhésif

Leukotape® P est un ruban de résistance supérieure pour permettre une contention rigide. Hautement adhésif, il contient aussi une forte concentration d'oxyde de zinc. Même s'il est poreux et peut se déchirer à la main, il offre un soutien pour le traitement d'entorses et de foulures.

INDICATIONS

- Entorses et foulures
- Idéal pour les techniques de bandage fémoropatellaires
- Correction de la posture

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poreux
- Peut se déchirer à la main
- Adhésif hautement efficace

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
3,8 cm x 13,7 m	7616800	1 rouleau	Boîte





Ruban de contention rigide adhésif en tissu poreux

Support et conformité aident à protéger contre les entorses et les blessures. Adhère de façon sûre, et se déchire pourtant à la main.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Haute résistance à la traction
- Revêtement en coton à 100 % permet à la transpiration de s'échapper



Ruban de contention rigide adhésif en tissu poreux

Pour utilisation prophylactique aux sports. Idéal lorsque support et immobilisation sont nécessaires. Adhère de façon sûre, et se déchire pourtant à la main.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Plus haute résistance à la traction
- Revêtement en coton à 100 % permet à la transpiration de s'échapper



Ruban adhésif élastique

Ruban élastique en coton doux qui se conforme aux articulations, comme coude, genou et épaule. Compression fiable pour soutenir les entorses, foulures et blessures musculaires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet à la peau de respirer et à l'humidité de traverser
- Traitement d'affections exigeant de limiter l'amplitude de mouvement, comme entorses, blessures sportives
- Utilisation prophylactique aux sports
- Contention de pansements et d'appareils, comme post-chirurgie orthopédique et générale ou sur une blessure musculaire

***Mise en garde:** Ces produits contiennent du caoutchouc naturel sec.

Dimensions	Code	Couleur	Unité de vente
3,8 cm x 13,7 m / 1,5 po x 15 vgs	6500001	Blanc	32 roul./caisse (Speed Pack)



Dimensions	Code	Couleur	Unité de vente
2,5 cm x 9,1 m / 1 po x 10 vgs	6500104	Blanc	12 roul./bte 12 btes/caisse 144 roul./caisse



Dimensions	Code	Couleur	Unité de vente
2,5 cm x 2,2 m / 1 po x 2,5 vgs	7308016	Crème	12 roul./bte 12 btes/caisse 144 roul./caisse
7,6 cm x 2,2 m / 3 po x 2,5 vgs	7308017	Crème	4 roul./bte 12 btes/caisse 48 roul./caisse
10,2 cm x 2,2 m / 4 po x 2,5 vgs	7308018	Crème	6 roul./bte 6 btes/caisse 36 roul./caisse



Tensoplast®

Bandage élastique adhésif robuste

Ce bandage élastique, adhésif et poreux, est fait d'un tissu extensible de qualité supérieure qui procure une compression contrôlée. Son adhésif fiable le maintient efficacement en place, même durant un traitement prolongé.

INDICATIONS

- Support ferme pour articulations blessées
- Contrôle des épanchements et de l'enflure
- Maintien en place de pansements sur des régions difficiles et nécessitant une compression

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif poreux qui permet à la peau de respirer
- Adhésif ferme et fiable
- Rebords frangés pour un confort accru
- Ligne jaune centrale pour faciliter l'application

Dimensions*	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
Tensoplast®					
5 cm x 4,5 m	Crème	7205039	12 rouleaux	-	Boîte
7,5 cm x 4,5 m	Crème	7205040	12 rouleaux	-	Boîte
10 cm x 4,5 m	Crème	7205038	12 rouleaux	-	Boîte
5 cm x 4,5 m	Crème	7205037	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
7,5 cm x 4,5 m	Crème	7205043	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
10 cm x 4,5 m	Crème	7205042	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
Tensoplast® LF					
5 cm x 4,5 m	Crème	7623200	12 rouleaux	-	Boîte
7,5 cm x 4,5 m	Crème	7623201	12 rouleaux	-	Boîte
10 cm x 4,5 m	Crème	7623202	12 rouleaux	-	Boîte
Tensosport®					
5 cm x 4,5 m	Blanchi	7205015	36 rouleaux	Boîte	Caisse
7,5 cm x 4,5 m	Blanchi	7205016	24 rouleaux	Boîte	Caisse

*Étiré



Leukotape® K

Ruban élastique adhésif

Leukotape® K est un ruban élastique adhésif appartenant au groupe de rubans de kinésiothérapie. Les rubans de kinésiothérapie peuvent améliorer la proprioception, favoriser le drainage lymphatique et aider à réduire la douleur. Aussi disponible dans une nouvelle longueur de 25 m sous la marque Leukotape K par Actimove.

INDICATIONS

Utilisation en techniques de kinésiothérapie

- Les domaines d'application comprennent :
 - Lymphœdème
 - Douleur musculaire
 - Trouble de tonicité

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Formation d'une journée disponible
- Très confortable et doux pour la peau
- Durable; reste en place pendant jusqu'à 9 jours
- Hydrofuge; pratique lors de sports et sous la douche
- Facile à appliquer
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Contenu du paquet	Unité de vente
5 cm x 25 m	Beige	6507807	1 rouleau	1 boîte	Paquet
2,5 cm x 5 m	Beige	7297810	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
5 cm x 5 m	Beige	7297811	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
7,5 cm x 5 m	Beige	7297812	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
2,5 cm x 5 m	Rouge	7297815	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
5 cm x 5 m	Rouge	7297816	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
7,5 cm x 5 m	Rouge	7297817	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
2,5 cm x 5 m	Bleu	7297820	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
5 cm x 5 m	Bleu	7297821	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
7,5 cm x 5 m	Bleu	7297822	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
5 cm x 5 m	Noir	7297823	1 rouleau	5 boîtes	Paquet
5 cm x 5 m	Rose	7297825	1 rouleau	5 boîtes	Paquet



Tensoplast®

Ruban élastique adhésif robuste

Ce bandage élastique, adhésif et poreux, est fait d'un tissu extensible de qualité supérieure qui procure une compression contrôlée et un soutien ferme. Son adhésif fiable le maintient efficacement en place, même durant un traitement prolongé.

INDICATIONS

- Fixation ou bandage sécuritaire et confortable, avec conformabilité maximale
- Entorses et foulures nécessitant un traitement de soutien
- Maintien en place de pansements sur des régions difficiles et nécessitant une compression
- Bandage de support pour blessures aux doigts

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif poreux qui permet à la peau de respirer
- Répartition uniforme et totale de l'adhésif, assurant une adhésion ferme

Dimensions*	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
2,5 cm x 4,5 m	7206902	1 rouleau	6 boîtes	Caisse
5 cm x 4,5 m	7205218	6 rouleaux	-	Boîte
7,5 cm x 4,5 m	7205219	4 rouleaux	-	Boîte

*Étiré



Tensoplast®

Ruban élastique adhésif athlétique

Tensoplast® est un ruban élastique adhésif léger à compression et soutien modérés. Il conserve ses propriétés adhésives et procure un soutien contrôlé.

INDICATIONS

- Entorses et foulures
- Corrections posturales

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Propriétés adhésives élevées
- Procure une compression et un soutien modérés
- Hydrofuge
- Perméable à l'air
- Substrat plus mince

Dimensions*	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 4,5 m	04412001	24 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 4,5 m	04413001	16 rouleaux	Boîte
10 cm x 4,5 m	04414001	16 rouleaux	Boîte

*Étiré



Lightplast® Pro

Ruban élastique adhésif léger

Lightplast® Pro est un ruban élastique adhésif léger qui peut se déchirer à la main et qui est recommandé pour une compression et un support légers. Son support spécial en tissu permet une bonne conformabilité aux mouvements du corps le rendant idéal pour usages multiples.

INDICATIONS

- Entorses et foulures
- Utilisation prophylactique pour blessures sportives

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Peut se déchirer à la main
- Bon pouvoir adhésif
- Léger
- Bonne conformabilité
- Élastique en longueur

Dimensions*	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,5 cm x 4,5 m	7695200	48 rouleaux	Boîte
3,75 cm x 4,5 m	7695300	32 rouleaux	Boîte
5 cm x 4,5 m	7695400	24 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 4,5 m	7695500	16 rouleaux	Boîte
5 cm x 6,8 m	7695600	24 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 6,8 m	7695700	16 rouleaux	Boîte

*Étiré



Co-Plus® LF

Bandage cohésif élastique

À la fois flexible, élastique et auto-adhérent, ce bandage procure une compression douce et un support léger qui ne glisse pas. Grâce à son procédé de fabrication unique, Co-Plus® LF augmente le confort du patient, car il adhère sur lui-même et non à la peau et il s'utilise sans attaches ni agrafes.

INDICATIONS

- Compression et support légers
- Maintien d'un système d'attelle

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fixation de pansement sécuritaire
- Ne glisse pas
- Perméable à l'air
- Peut se déchirer à la main
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions*	Couleur	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Co-Plus® LF - Sans latex				
2,5 cm x 4,5 m	Beige	7210060	72 rouleaux	Boîte
5 cm x 4,5 m	Beige	7210016	36 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 4,5 m	Beige	7210017	24 rouleaux	Boîte
10 cm x 4,5 m	Beige	7210018	18 rouleaux	Boîte
15 cm x 4,5 m	Beige	7210019	12 rouleaux	Boîte
5 cm x 4,5 m	Assorties**	7210033	36 rouleaux	Boîte
7,5 cm x 4,5 m	Assorties**	7210020	24 rouleaux	Boîte
10 cm x 4,5 m	Assorties**	7210021	18 rouleaux	Boîte

*Étiré

**Couleurs assorties : rose fluo, bleu foncé, bleu pâle, mauve, vert fluo et rouge

Elastocrepe®

Bandage élastique non-adhésif

Elastocrepe® est fait d'un mélange de tissu coton/rayonne souple, de qualité supérieure, à rebords sans effilochage. Sa trame particulière permet d'éviter un étirement excessif, tout en appliquant une compression bien ciblée.

INDICATIONS

- Entorses et foulures
- Contrôle d'œdème après retrait de plâtre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Léger et conformable
- Rebords sans effilochage
- Perméable à l'air
- Soutien procuré par élasticité longitudinale
- Ligne jaune centrale pour application précise
- Exempt de latex de caoutchouc naturel (à l'exception des agrafes)

Dimensions*	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 4,5 m	7208247	12 rouleaux	Sac
7,5 cm x 4,5 m	7208249	12 rouleaux	Sac
10 cm x 4,5 m	7208243	12 rouleaux	Sac
15 cm x 4,5 m	7208267	6 rouleaux	Sac

*Étiré



Tensogrip®

Bandage tubulaire élastique de soutien

Tensogrip® est un bandage tubulaire de soutien, élastique, idéal pour le traitement de foulures, d'entorses et de blessures des tissus mous. Il procure une compression et un soutien constant pour des zones variées du corps.

INDICATIONS

- Compression et support légers
- Maintien en place de pansements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Procure un support léger et une compression légère en plus de garder le pansement en place
- Élasticité horizontale
- Facile à couper sur mesure
- Perméable à l'air

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
4,5 cm x 10 m, Grandeur A	7151300	1 rouleau	Boîte
6,25 cm x 10 m, Grandeur B	7151400	1 rouleau	Boîte
6,75 cm x 10 m, Grandeur C	7151900	1 rouleau	Boîte
7,5 cm x 10 m, Grandeur D	7151500	1 rouleau	Boîte
8,75 cm x 10 m, Grandeur E	7152000	1 rouleau	Boîte
10 cm x 10 m, Grandeur F	7151600	1 rouleau	Boîte
12 cm x 10 m, Grandeur G	7152100	1 rouleau	Boîte
17,5 cm x 10 m, Grandeur J	7151700	1 rouleau	Boîte
21,5 cm x 10 m, Grandeur K	7152300	1 rouleau	Boîte
32,5 cm x 10 m, Grandeur L	7152200	1 rouleau	Boîte
37,5 cm x 10 m, Grandeur M	7152400	1 rouleau	Boîte





 ca.servicealaclientele@essity.com

 [essity.com](https://www.essity.com)

Essity
1275 North Service Road West, bureau 800
Oakville, ON Canada L6M 3G4
Tél. 1 877 978-5526 Téléc. 1 877 978-9703
136589F ©Essity, Produits de santé et d'hygiène, AB, 2026 D26